



mouse

Ръководство за експлоатация и

поддръжка

Брой 9/2023-12-05

Количка за специални нужди

Това е медицинско устройство.

Използвайте го в съответствие с инструкциите

Потребител със зрение, четене или когнитивно увреждане е помолен да докладва на производителя.

Цел на наръчника

Ръководството за експлоатация и поддръжка е предназначено за лица, които пряко се грижат за деца с увреждания (детски асистенти - родители, настойници), които ще бъдат транспортирани в количка. Той е предназначен и за лекари и физиотерапевти, работещи с количката.

ЗАБЕЛЕЖКА! Преди да започне да използва количката, всеки Потребител е длъжен да прочете съдържанието на това ръководство и да го следва.

ЗАБЕЛЕЖКА! В случай на медицински инцидент, свързан с присъствието на количката mouse, трябва незабавно да уведомите Производителя писмено с препоръчана поща или електронна поща с обратна разписка.

Данни за контакт с производителя:

- пощенски адрес: MyWam sp. z o.o., 34 Lwowska Street, 41-500 Chorzów, Полша
- телефон за връзка: +48 32 733 11 31
- Имейл адрес: mywam@mywam.eu



Версия на ръководството за експлоатация и поддръжка: EN Edition 9/2023-12-05

MyWam sp. z o.o. си запазва правото да прави технически и търговски промени в съдържанието на Ръководството за експлоатация и поддръжка без предизвестие. Всяка промяна ще се определя от датата на последна актуализация на декларацията. Електронният вариант на наръчника ще бъде достъпен на сайта на www.mywam.eu

ЗАБЕЛЕЖКА! Снимките в Инструкциите за употреба са само за справка и могат да се различават от закупения продукт.

Съдържание

1.	Цел и указания за използването на количката.....	5
2.	Бърз старт.....	5
■	Безопасност.....	6
3.	Важни съвети и правила за безопасност.....	6
4.	Плочки.....	7
5.	Символна маркировка.....	7
■	Продукт.....	8
6.	Обща конструкция на количката.....	8
7.	Настройка и използване – рамка за количка.....	8
7.1.	Механизъм за сгъване на рамката.....	9
7.2.	Разгъване на рамката на количката. Транспортна ключалка.....	9
7.3.	Сглобяване на рамката.....	9
7.4.	Предни колела. Монтаж и демонтаж. Въртящо се заключване.....	9
7.5.	Задни колела. Монтаж и демонтаж на задното колело върху оста.....	10
7.6.	Система за окачване на задните колела.....	10
7.7.	Механизъм и регулиране на ъгъла на дръжката.....	10
7.8.	Централна спирачка. Включване и изключване на централната спирачка.....	11
7.9.	Наклон крак.....	11
7.10.	Транспортната дръжка.....	11
7.11.	Крака. Настройка и употреба.....	11
8.	Конфигурация и употреба - терапевтична седалка с облегалка.....	12
8.1.	Монтаж и демонтаж на седалката към рамката.....	12
8.2.	Регулируема седалка, "наклонена седалка".....	12
8.3.	Регулируема облегалка.....	12
9.	Основно оборудване.....	13
9.1.	Петточкови колани.....	13
9.2.	Предпазна бариера.....	13
9.3.	Регулируем сенник с прозорец.....	14
9.4.	Кошница за пазаруване.....	14
9.5.	Колани за отвличане и стабилизиране.....	14
9.6.	Клин.....	15
9.7.	Lininig подложки.....	15
9.8.	Тапицерия.....	15
10.	Аксесоари.....	15
10.1.	Регулируема облегалка за глава - ↔ и ↕.....	15
10.2.	Регулируеми подложки за гърди и кръста - ↔ и ↕.....	15
10.3.	Терапевтична маса.....	16
10.4.	Комплект за минимизиране на седалките.....	16
10.5.	Пътна чанта.....	16
10.6.	Чадър за слънце.....	17
10.7.	Зимни ръкавици.....	17
10.8.	Зимен спален чувал.....	17
10.9.	Мрежа против комари.....	17

10.10.	Дъждобран	17
11.	Технически характеристики на количка mouse	18
11.1.	Състав на суровината на количката	19
12.	Доставка и инструменти.....	19
13.	Монтаж и разглобяване на количката	19
14.	Подготовка за употреба	20
15.	Използване на количката	20
15.1.	Преместване на количката	20
15.2.	Влизане и излизане от количката	20
15.3.	Точно така позиция в количката.....	21
15.4.	Езда в количка.....	21
15.5.	Преместване по наклонени повърхности	21
15.6.	Преодоляване на прагове или бордюри	21
15.7.	Транспорт в колата и в други превозни средства.....	21
15.8.	Почистване и грижи.....	22
16.	Съхранение на колички.....	22
17.	Сервиз и периодични прегледи	22
18.	Разположение	23
19.	Съответствие с изискванията за медицинските изделия.....	23
20.	Списък на оторизираните сервизни центрове	24
21.	Гаранционна карта	25
22.	Бележки	26

-

А. Цел и указания за използването на количка mouse

Количката е медицинско изделие от клас I, предназначено за употреба от тези деца с увреждания, които поради състоянието си не могат да ходят, да стоят прави или да седят самостоятелно. Продуктът е предназначен за транспортиране и преместване на горепосочените хора в седнало или легнало положение и за корекция на стойката.

Клиничните показания включват, m.in, церебрална парализа, миеломенингоцеле, дистрофии, пареза и др.

Продуктът е предназначен за потребители на възраст от 2 до 6 години, с височина 80-110 см и тегло до 30 кг. Устройството трябва да се използва в съответствие с препоръките на лекуващия лекар или физиотерапевт.

Противопоказания:

В случай на противопоказания за седнало положение и / или пасивно изправено положение, регулирането на количката трябва да се консултира с физиотерапевт или лекуващ лекар.

Б. Бърз старт

За да използвате количката бързо, тя трябва да бъде разопакована и подготвена за употреба съгласно точка 13 Монтаж и демонтаж на количката и точка 14 Подготовка за употреба.



▪ **Безопасност**

В. Важни съвети и правила за безопасност

- Забранено е използването на количката по начин, за който количката не е предназначена.
- Продуктът съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане от дете!
- Поради големите възможности за регулиране на количката, при регулиране на ъгъла на седалката и ъгъла на облегалката е възможно да се зададе позиция, в която главата на детето е под тазовата линия. Забранено е използването на такава позиция, тъй като това може да доведе до опасност от задавяне или задушаване на детето.
- Забранено е поставянето на допълнителна тежест върху количката, което се отнася по-специално за поставянето на допълнителна тежест в задната част на облегалката, например раница или чанта. Това може да доведе до преобръщане на количката на мишката и да причини нараняване на потребителя! Не се прилага за оригинални допълнителни аксесоари, предназначени за мишката, които не надвишават допустимото натоварване. Всички допълнителни елементи, прикрепени към количката, влияят на нейната стабилност.

- **ВНИМАНИЕ!** В зависимост от направените корекции - това се отнася за позицията на дръжката за бутане на количката, височината на облегалката, регулирането на ъгъла на облегалката, регулирането на дълбочината на седалката, ъгъла на седалката, регулирането на ъгъла на поставката за крака и регулирането на поставката за крака - количката може да надвишава препоръчителните максимални размери.
- **ВНИМАНИЕ!** При преминаване през врати или подобни стеснения, които ограничават посоката на движение на количката, уверете се, че има достатъчно място от двете страни на количката, за да предотвратите заклещването на ръцете или други части на тялото, както и да предотвратите повреда на количката.
- **ВНИМАНИЕ!** Температурата на количката може да се повиши, когато количката е изложена на слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



- Никога не оставяйте детето си без надзор в количката, тъй като това може да бъде опасно!
 - Този продукт не е подходящ за бягане, пързаяне или каране на ролери.
 - Количката не е предназначена за седалка в превозни средства.
 - Внимавайте за пропуски и движещи се части – съществува риск от заглушаване.
- Не носете количката с детето.
- Количката е опакована в чанта. Да се съхранява на място, недостъпно за кърмачета и малки деца.







- **ВНИМАНИЕ!** Забранено е използването на количката, ако техническото състояние на продукта или неговият отделен елемент поражда съмнения от страна на потребителя или е очевидно неправилно, тогава не трябва да се използва. В такава ситуация се препоръчва спешно да се свържете с Продавача, за да получите съвет.



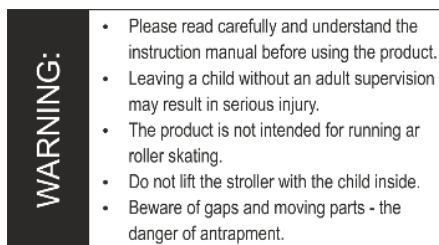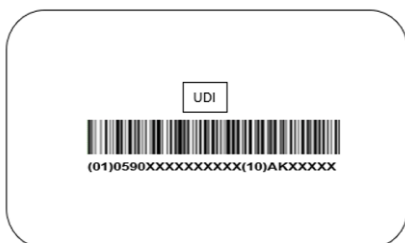

Г. Плочки

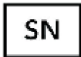Табелка с името UDI кодова табела Предупредителна табела



Д. Символна маркировка

	Сериен номер на продукта		Име на производителя
	Допустимо общо тегло на ползвателя		Въпросният продукт е медицинско изделие


	Дата на производство	 <p>ОПИСАНИЕ "ВНИМАНИЕ!" и символ в това ръководство се използват за повишаване на вниманието на читателя към съдържанието, маркирано с този знак. Неспазването на съдържанието, маркирано с това описание, може да представлява риск за здравето и безопасността на потребителя и неговите спътници, а също така може да доведе до увреждане на продукта.</p>
	Знак за оценка на съответствието съгласно съответните европейски регламенти и директиви	
	Предупреждение да следвате ръководството за употреба и грижа за продукта	

■ Продукт

Е. Обща конструкция на количката

• Елементи на рамката (фиг. 6.1):

- Ергономична дръжка за бутане на количката (No 2)
- Предно управляемо колело, твърдо (No 12)
- Заклучване на посоката на предното колело (No 15)
- Окачване на вилката на предните колела (No 14)
- Система за бързо освобождаване на предните колела (No 13)
- Задни колела, пълни (No 8)
- Двустепенно окачване на задните колела (No 24)
- Система за бързо освобождаване на задните колела (No 23)
- Централна спирачка (No 9)
- Кошница за пазаруване (No 11)
- Приспособления за закрепване на рамката за седалката (No 6)
- Транспортна бртва (No 3)
- Механизъм за сгъване на рамката (отгоре и отдолу) (No 4)

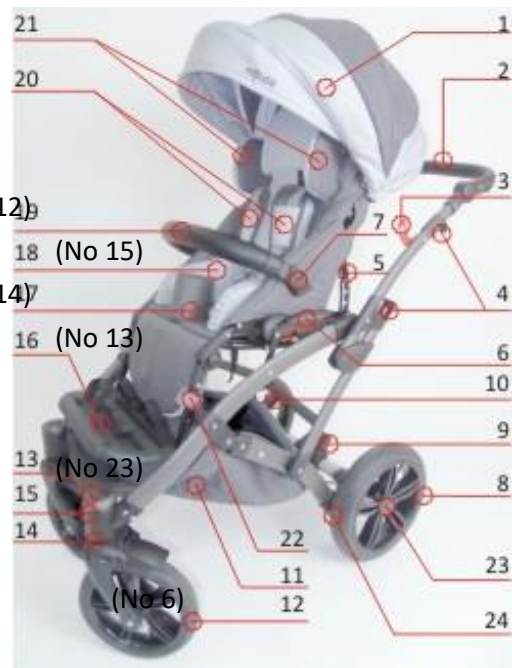

Фиг. 6.1

Обща конструкция на количката (No 18)

• Елементи на седалката

- Комплект за минимизиране на седалките (No 18)
- Регулируема под ъгъл облегалка (No 5)
- Закрепване на бариера (No 7)
- Предпазна бариера (No 19)
- Петточкови колани (No 20)
- Клин (No 17)
- Регулируеми подложки за облегалка за ↔глава и↕ (No 21)
- Регулируем сенник с прозорец (No 1)
- Регулируема поставка за крака с презрамки (No 16)
- Разширения за поставки за крака (No 22)
- Стъпка за накланяне (по избор) (No 10)




Фиг. 7.1.

Точки за сгъване на рамката

Ж.А. Механизъм за сгъване на рамката

- десен и ляв прекъсвач - елемент, който позволява горната част на рамката да бъде сгъната,
- механизъм за сгъване на рамката с ключалка.

Ж.Б. Разгъване на рамката на количката. Транспортна ключалка.

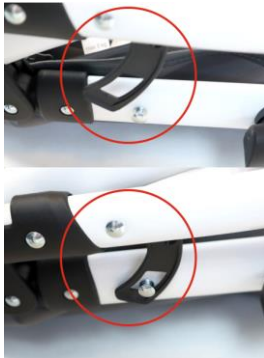

Фиг. 7.2.1

Транспортна брава

Поставете рамката на количката хоризонтално на земята и Отстранете транспортната ключалка

(Фиг. 7.2.1). След това издърпайте облегалката в изправено положение (фиг. 7.2.2.). За да позиционирате количката, издърпайте внимателно дръжката, като я повдигнете леко нагоре, като поставите количката в положение близо до желаното, докато не кликнете върху сгъваемата ключалка на рамката. Рамката на количката ще бъде правилно разгъната само когато сгъваемият механизъм на рамката е правилно



Фиг. 7.2.2

Разгъване на рамката

затворен. Това се доказва от ясения звук на "клик".

Ж.В. Сглобяване на рамката

- **Горен механизъм:** повдигнете лоста за заключване на транспорта от дясната страна на рамката (1 – фиг. 7.3.1) и издърпайте двете дръжки нагоре едновременно (2 – фиг. 7.3.1). Сгънете рамката и прикрепете транспортната ключалка (фиг. 7.3.1).



Фиг. 7.3.1

Горен механизъм



Фиг. 7.3.2

Долен механизъм

- **Долен механизъм:** повдигнете лостовете от двете страни на рамката едновременно (фиг. 7.3.2). След това сгънете рамката на количката и

прикрепете транспортната ключалка.



Фиг. 7.4.1

Бутон за бързо

Ж.Г. Предни колела. Монтаж и демонтаж. Въртящо се заключване

- **Монтаж:** Плъзнете кормилната ос на колелото в отвора на главината на колелото, докато щракне.

- **Разглобяване:** Натиснете бутона за бързо освобождаване и извадете колелото (фиг. 7.4.1).

Въртяща се ключалка: Завъртете копчето, докато заключващият механизъм се включи – виж фиг.7.4.2.



Фиг. 7.4.2

Заключване на въртящото се

Ж.Д. Задни колела. Монтаж и демонтаж на задното колело върху оста



Фиг. 7.5.1

Quick освобождаване скоба

- **Монтиране на задното колело върху оста:** натиснете скобата за бързо освобождаване, разположена в средата на колелото (Pict.7.5.1) и монтирайте колелото на оста. Правилното поставяне на колелото ще бъде потвърдено с ясният звук "щракване".

- **Демонтаж:** задното колело на оста: натиснете скобата за бързо освобождаване, разположена в средата на колелото (Pict. 7.5.1) и плъзнете колелото от оста му (Pict.7.5.2).




Фиг. 7.5.2

Разглобяване на колелото

Ж.Е. Система за окачване на задните колела

Окачването работи автоматично. Регулирането се извършва чрез активиране на лоста нагоре-надолу, разположен от дъното на амортизатора. За да се улесни превключването на настройките от лоста, се допуска едновременно налягане върху пружината на амортизатора. Когато лостът е изместен, пружината на амортизатора ще бъде компресирана (опция за твърда земя) или удължена (мека земя).

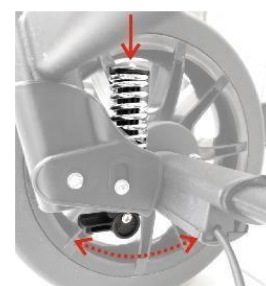

Фиг. 7.6

Система за окачване на

Ж.Ж. Механизъм и

регулиране на ъгъла на дръжката.

Дръжката на количката осигурява здраво сцепление при различни условия на шофиране. Тя има възможност за регулиране за регулиране на височината на дръжката за помощника на детето, който ръководи количката (фиг. 7.7).



Фиг. 7.7

Механизъм за регулиране на ъгъла на

- **Механизъм за регулиране:** Два бутона от външната страна на рамката, разположени върху ставите на дръжката за натискане на количката.
- **Регулиране на ъгъла:** Натиснете едновременно двата бутона на механизма за регулиране на ъгъла на дръжката и променете ъгъла на дръжката, след което ги освободете.

Ж.З. Централна спирачка. Включване и изключване на централната спирачка

Централният спирачен педал (Pict. 7.8), който при натискане блокира директно двете задни колела на количката, се намира в средата на напречната греда, в задната част на рамката на количката!

- **Включване:** натиснете педала на спирачката надолу към земята, докато щракне. Правилното задействане на спирачката се индикира с ясен звук "щракване" от централната спирачка.
- **Изключване:** За да изключите централната спирачка, издърпайте педала на спирачката нагоре.



Фиг. 7.8

Централна спирачка

Ж.И. Наклон - крак

Използването на наклонящото се краче улеснява количката да изкачва малки прагове или бордюри – улеснява повдигането на предната част на количката (фиг. 7.9).



Фиг. 7.9

Наклон крак

Ж.К. Транспортната дръжка

Транспортната дръжка се намира под кошницата за пазаруване фиг. 9.10.



Фиг. 7.10

Транспортна дръжка

Ж.Л. Крака. Настройка и употреба.

- **Регулиране на ъгъла:** натиснете бутоните, маркирани на снимката от двете страни на поставката за крака, след това задайте желаната позиция и освободете бутоните (фиг. 7.11.1).



Фиг. 7.11.1

Бутони за накланяне

Фиг. 7.11.2.

Винтове и


- **Регулиране на височината:** отстранете монтажните винтове на подложката за крака и издърпайте поставката за крака от ставите. На мястото на поставката за крака монтирайте 2 разширения (тръби) и затегнете винтовете.

Плъзнете поставката за крака в тръбата, така че да получите допълнителни 3 монтажни височини на поставката за крака (фиг. 7.11.2).

3. Конфигурация и употреба - терапевтична седалка с облегалка

3.A. Монтаж и демонтаж на седалката към рамката

- **Събрание:** поставете седалката в куките на рамката. Плъзнете седалката, докато има две щраквания (фиг. 8.1.1). Инсталирайте гледащи напред или назад.

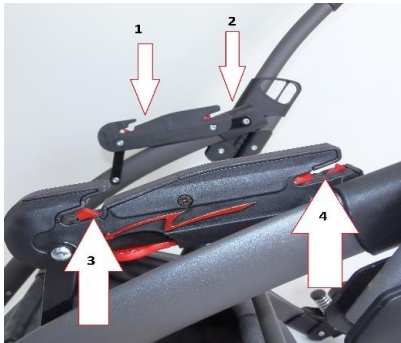

Фиг. 8.1.1



Фиг. 8.1.2

Куките за закрепване на седалките Бутон за освобождаване на седалката

рамката.

- **Отстраняване:** натиснете надолу, към земята, от двете страни на каретата, червените бутони, разположени от долната страна на двете куки на рамката (фиг. 8.1.2). След това плъзнете седалката извън разделите на

3.B. Регулируема седалка, "наклонена седалка"

Издърпайте назад стоманената дръжка, разположена в задната част на седалката, и бавно променете наклона на седалката (фиг. 8.2). След като зададете желаната позиция, освободете дръжката.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Всяка промяна в наклона на седалката променя общия център на тежестта. Това се отразява на стабилността на количката.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Всички настройки на количката и нейните компоненти трябва да се правят **БЕЗ ДЕТЕТО**, поставено в количката! Неспазването на горните предупреждения може да представлява сериозна опасност за детето, което го използва!



Фиг. 8.2

Регулируема седалка

3.B. Регулируема облегалка

Облегалката може да се регулира в различни позиции на наклона: от седнало до легнало положение. За да промените наклона на облегалката, първо я облекчете, като леко преместите цялата облегалка към по-седнало положение. След това издърпайте нагоре дръжката, разположена на гърба на облегалката и бавно променете наклона на облегалката. След като облегалката е в позиция, спуснете дръжката на гърба на облегалката.

БЕЛЕЖКА! Всеки път, когато промените наклона на облегалката, трябва да коригирате дължината на петточковите ремъци! **Корекциите трябва да се правят с включена спирачка.**



Фиг. 8.3

Регулиране на ъгъла на облегалката

ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Всички настройки на количката и нейните компоненти трябва да се правят **БЕЗ ДЕТЕТО**, поставено в количката! Неспазването на горните предупреждения може да представлява сериозна опасност за детето, което го използва!


И. Основно оборудване

И.А. Петточкови колани

- **Регулиране на петточковите ремъци:** Плъзнете регулаторите на раменните ремъци нагоре или надолу и преместете протекторите съответно. За да регулирате височината на приставката за каишка към облегалката, превключете приставката на колана от ниско закрепване към високо закрепване или обратно.

- **Употреба:** поставете колана от дясната и лявата страна на детето и закрепете двата колана в ключалката за закрепване на коланите, която е прикрепена към седалката. За да затегнете колана, натиснете бутона на горната (гърдите) и долната катарам и разкопчайте двата колана от ключалката и бавно издърпайте колана от дясната и лявата страна на детето.

ВНИМАНИЕ! Всяко регулиране на ъгъла на облегалката изисква пренастройване на дължината на 5-точковия колан.

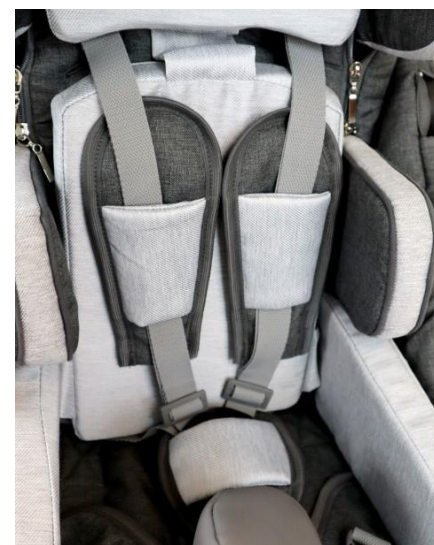

Снимка 9.1.

Петточкови колани

И.Б. Предпазна бариера

- **Инсталирайте** с помощта на същите стойки, както за терапевтичната маса (невъзможно е да се използват и двете едновременно). Плъзнете бариерата в левия и десния монтаж, докато щракне.

- **Отстраняване:** натиснете двата бутона на масата или приставката на релсата и плъзнете парапета.



Фиг. 9.2

Предпазна бариера

И.В. Регулируем сенник с прозорец

- **Елементи на сенника:** рамка на балдахина (предна и задна арка), механизъм за регулиране на отварянето на сенника (отдясно и отляво), две ключалки с червени бутони, прикрепящи козирката към рамката, тапицерия с балдахин и прозорец с мрежа против комари с цип.

- **Монтаж:** Прикрепя се с две пластмасови парчета към външните страни на горната част на облегалката. Поставете облегалката в изправено положение, след което плъзнете паралелно двете ключалки на сенника върху приставките за облегалка.

- **Разглобяване:** натиснете двата червени бутона на закрепващите ключалки на сенника и се плъзнете от стойките.

- **Употреба:** За да промените размера на повърхността на козирката, хванете предната арка и задната арка на рамката на балдахина и регулирайте желаната позиция, като преместите двете арки по-близо или по-далеч една от друга или един към друг. Механизмът за регулиране на размера на повърхността щраква автоматично.

Специална характеристика на кабината е прозорец с мрежа против комари, която осигурява вентилация. Прозорецът се отваря и затваря с цип.



Фиг. 9.3

Регулируем сенник

И.Г. Кошница за пазаруване

Кошницата за пазаруване се използва за транспортиране на малки, обикновени промишлени предмети от ежедневието, устойчиви на удари, удари, счупване, намокряне, разливане и замърсяване. Максималното натоварване на кошницата за пазаруване е 3 кг.



Фиг. 9.4

Кошница за пазаруване

И.Д. Колани за отвличане и стабилизиране



Фиг. 9.5

Колани за отвличане и

Ремъците за стабилизиране се използват за допълнителна стабилизация на таза и предотвратяват изплъзването на детето от количката. Закрепете бедрата на детето си, така че тазът им да седи възможно най-близо до облегалката. Това ще осигури по-здравословна и по-удобна позиция за детето в количката.

- **Регулиране:** Плъзнете регулаторите на ремъците на предния колан нагоре или надолу.

- **Употреба:** За да поставите коланите върху детето, поставете детето върху инсталираните колани, след това увийте около крака на детето и закрепете двете катарамии на колана към двете предни ремъци. За да свалите коланите от детето си, разкопчайте и двете катарамии на колана от предните ремъци.

И.Е. Клин

В случай на специфични индикации, тя осигурява отвличане (отклонение от страни) на долните крайници на детето от центъра на тялото. Клинът има двустепенно ниво на регулиране (фиг. 9.6).

ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Ако коланите не се използват или не се поставят свободно върху детето, съществува риск от натискане на перинеума.



Фиг. 9.6

Клин



Фиг. 9.7

Подложки за

И.Ж. Lininig подложки

Облицовъчните вложки (подложки) закрепват велкрото на облегалката на количката, когато не се носи допълнително оборудване. Фиг. 9.7.

И.З. Тапицерия

Тапицерията е напълно демонтирана за почистване. Разкопчайте всички елементи, които го прикрепят към рамката на количката. Почистването на тапицерията е описано в раздел 15.8. Почистване и грижи.

К. Аксесоари

К.А. Регулируема облегалка за глава - ↔ и ⇕

За да регулирате облегалката за глава, разнесете закопчалката за тапицерия на предната и задната страна на облегалката. След това развийте копчетата (копчетата от подложките), които са разположени от задната страна на облегалката. Преместете подложките на подходящо и безопасно за децата място от предната страна на облегалката. Затегнете подложките с копчетата. Накрая затворете закопчалката за тапицерия отпред и отзад на облегалката.



Снимка 10.1.


Странични подложки

К.Б. Регулируеми подложки за гърди и кръста - ↔ и ⇕

За да регулирате подложките на гърдите и кръста, отменете закопчалката за тапицерия отпред (фиг. 10.2.1) и задната част на облегалката (фиг. 10.2.2). След това развийте копчетата (копчетата, фиг. 10.2.3), които са разположени от задната страна на облегалката, и поставете подложките на подходящо и безопасно за децата място от предната страна на облегалката. Завийте подложките на място с копчетата. Накрая затворете закопчалката за тапицерия отпред и отзад на облегалката (фиг. 10.2.4).



Фиг. 10.2.1.

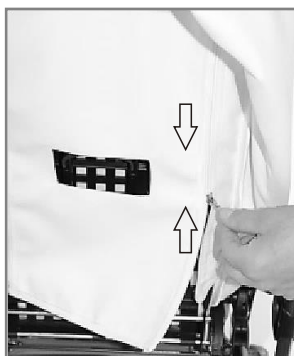

Фиг. 10.2.2.



Фиг. 10.2.3.



Фиг. 10.2.4.

Разкопчайте тапицериата Разкопчайте тапицериата Премахване на винтовете Закрепете тапицериата

К.В. Терапевтична маса

Максималното натоварване е 3кг.

Сглобяване: плъзнете масата в стойката, докато щракне – потвърдете правилното сглобяване.

Разглобяване: натиснете двата бутона на стойката и плъзнете масата.

Забележка! Хоризонталното положение на масата може да се промени с регулирането на люлката и по този начин елементите, поставени на масата, трябва да бъдат обезопасени.



Фиг. 10.3

Терапевтична маса

К.Г. Комплект за минимизиране на седалките

Комплектът за минимизиране на седалките се използва за регулиране на вътрешните размери на дълбочината и ширината на седалката. Тапицериата на комплекта за минимизиране на седалката се сваля благодарение на защитния цип, което позволява да бъде заменен или почистен.

- **Монтаж:** Вложките се монтират навсякъде в количката, на всяка височина, адаптирайки се към показанията на пациента. Монтажът се извършва с велкро на дъното, гърба и външната страна на вложката.

- **Разглобяване** се извършва чрез премахване на елемента - издърпване на велкрото от тапицериата на количката.



Фиг. 10.4

Комплект за минимизиране на

К.Д. Пътна чанта

Пътната чанта е монтирана на две дръжки, разположени от вътрешната страна на дръжката за бутане на количката (фиг. 10.5). Максималното натоварване на чантата е 2кг.

К.Е. Чадър за слънце

Чадърът е показан на фиг.10.6.

К.Ж.Зимни ръкавици

Ръкавиците са показани на фиг.10.7.



Фиг. 10.5

Пътна чанта



Фиг. 10.6

Чадър за слънце



Фиг. 10.7

Зимни

К.З. Зимен спален чувал

Изисква монтаж към друг аксесоар - предпазната бариера.

Монтаж: поставете спалния чувал отдолу на поставката за крака, а отгоре го поставете през предпазната бариера и го закрепете към рамката на количката (фиг. 10.8.)

К.И. Мрежа против комари

Изисква монтаж към друг аксесоар - навес.

Монтаж: свържете мрежата против комари с ключалка в козирката, след това покрийте седалката и подложката за крака и я прикрепете отстрани (фиг. 10.9).

К.К. Дъждобран

Изисква монтаж към друг аксесоар - навес.

Монтаж: поставете дъждобран отгоре върху козирката, а след това покрийте седалката на количката и поставката за крака (фиг. 10.10).



Фиг. 10.8

Зимен спален чувал



Фиг. 10.9

Мрежа против комари



Фиг. 10.10

Дъждобран

Л. Технически характеристики на количката за мишки

Дължина на количката	95-124 см
Ширина на количката	600 см
Височина на количката	122 - 134 см
Маса	17,2 - 23,2 кг
Ефективна дълбочина на седалката	22* / 26 см
ширина на седалката	24* / 32 см
Височина на облегалката	520 см
ширина на облегалката	300 см
разстояние между поставката за крака и седалката / брой настройки	приблизително 14,5-23 см / 4 позиции
дължина на количката, сгъната за транспорт	рамка 84 см /седалка 72 см
ширина на количката, сгъната за транспорт	рамка 58 см /седалка 42 см
височина на количката, сгъната за транспорт	рамка 25 см /седалка 39 см
Товароносимост на кошницата	5 кг
Товароносимост на чантата	2 кг
Макс. Тегло на пациента	30 кг
Растеж на пациента	80-110 см
Ъгъл на равнината на седалката / брой на корекциите	приблизително 8°-23°/ 4 позиции
Ъгъл на наклона на облегалката / брой на корекциите	приблизително 16°-88° / 4 позиции + легнало положение
Ъгъл на поставката за крака / брой на корекциите	приблизително 84°-173° / 6 позиции

*) със заострена и плитка вложка

Толеранс на измерване +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1°.

Производителят си запазва правото да прави промени в техническите параметри

Л.А. Състав на суровината на количката

Прахово боядисана стомана и алуминий, 100% полиестерни тъкани и пластмаса (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU).

М. Доставка и инструменти

Оригиналната опаковка трябва да съдържа следните елементи:

- Сгъната рамка за количка със седалка и облегалка, поставка за крака и колела, сенник,
- Допълнително оборудване съгласно заповедта,
- Ръководство за потребителя с гаранционна карта.

Преди употреба:

- А. проверете дали опаковката не е повредена (в случай на повреда на опаковката, разопакувайте и проверете дали някой от елементите е повреден) в присъствието на доставчика),
- Б. проверете съдържанието на пратката в съответствие със спецификацията (ако някой от компонентите липсва, моля, свържете се с продавача).

Не са необходими инструменти за инсталиране и премахване на количката на мишката, с изключение на регулирането на височината на поставката за крака, където се изисква отвертка Phillips.

Н. Монтаж и разглобяване на количката

• **Сглобяване на количката.** Продуктът, предварително опакован в оригиналната картонена опаковка, вече е предварително сглобен. Завършете инсталирането, като изпълните следните стъпки:

- А) монтирайте задните колела на оста,
- Б) разгънете рамката на количката с поставката за крака, като регулирате параметрите:
 - включване/изключване на въртящата се блокировка на предните колела
 - регулирайте височината и ъгъла на дръжката за натискане на количката
 - регулиране на ъгъла на наклон на седалката
 - Задаване на ъгъла на наклона на облегалката
 - регулира дължината на петточковите колани
 - регулирайте височината на поставката за крака и ъгъла на наклона на поставката за крака
- В) инсталирайте подходящи аксесоари и регулирайте параметрите, например:
 - регулиране на използваемата ширина и дълбочина на седалката (комплект за минимизиране)
 - инсталирайте предпазна бариера или терапевтична маса
 - регулирайте коланите за отвличане и стабилизиране
 - регулирайте сенника с прозореца
 - инсталиране и регулиране на блока за отвличане (клин)
 - Сложете си пътна чанта
 - поставете кошница за пазаруване
 - Поставете избрани елементи от оборудването, посветено на сезоните: зимен спален чувал, зимни ръкавици, мрежа против комари, дъждобран, чадър.

• **Разглобяване на количката.** За да разглобите количката:

- А) разглобяване на аксесоарите,
- Б) разкопчайте седалката,
- В) заключете предните колела, сгънете поставката за крака и рамката на количката,
- Г) разкопчайте задните колела,
- Д) Сгънете количката, като я затворите с транспортна ключалка.

О. Подготовка за употреба

- Проверете дали рамката на количката е правилно разгъната и дали механизмът за сгъване на рамката е правилно затворен (заклучен).
- Проверете дали седалката е правилно монтирана към рамката на количката и дали механизмът за закрепване на седалката към рамката на количката е правилно затворен (заклучен).
- Правилно направете всички корекции и регулирайте количката според нуждите на детето, включително регулиране на правилната дълбочина на терапевтичната седалка и височината на облегалката, правилния наклон на терапевтичната седалка и наклона на облегалката, регулиране на правилния ъгъл на поставката за крака, регулиране на правилната дължина на петточковите ремъци. Проверете дали всички настройки са правилно поставени и обезопасени.
- Проверете дали тапицерията на количката е суха.
- Закрепете детето с всички налични стабилизиращи елементи, като петточкови колани, комплект за минимизиране на седалката, колани за отвличане / стабилизиране, блок за отвличане (клин), подложка за крака, ремъци за поставки за крака, предпазна бариера или терапевтична маса. Това е, за да се предотврати падането и изплъзването на детето от количката и да се предотврати падането на краката на детето от поставката за крака. Уверете се, че всички настройки, направени предварително, са подходящи и безопасни за детето.
- Уверете се, че детето не е поставено в количката без облекло, покриващо тялото в точките на контакт с тапицерията на количката. Това е, за да се предотврати протриване на тялото на детето и по хигиенни причини за детето.
- За деца с проблеми с въздържанието, поставете специална кърпа на седалката на количката, която може да бъде закупена в аптеки или медицински магазини.
- Ако се използват допълнителни помощни средства като венфлони, дренажи, торбички, катетри и т.н., уверете се, че те са добре защитени срещу падане, издърпване, затягане и не пречат на използването на количката.

П. Използване на количката

П.А. Преместване на количката

Най-добрият начин да преместите количка е да я карате с колелата и. В случаите, когато това не е възможно (например за транспортиране на количката в кола), от съображения за безопасност, количката може да бъде повдигната и носена с две ръце след разглобяване на аксесоарите, за да се намали теглото, което трябва да се носи и да се сгъне.

Трябва да се внимава изключително много при преместване или повдигане на рамката на количката. Рамката трябва да бъде преместена след сгъване и монтиране на транспортната ключалка.

Не използвайте допълнително оборудване за носене на количката – тя може да я повреди.

П.Б. Влизане и излизане от количката

Когато влизате и излизате от количката, поставете количката възможно най-близо до стабилно и безопасно място, на което потребителят да се прехвърли. След като се увери, че централната спирачка е включена и плочата на поставката за крака е повдигната, за да се избегне стоенето върху нея, потребителят може да прехвърли.

Не стойте на плочата на поставката за крака, тъй като съществува риск от преобръщане на количката, нараняване на потребителя и риск от повреда на продукта.

Уверете се, че при влизане или излизане от количката, детето и никой друг човек не трябва да стои на поставката за крака, тъй като съществува риск от повреда на количката и нараняване на потребителя!

П.В. Правилна позиция в количката

От съображения за безопасност и здраве се препоръчва на потребителя да има таза и гърба възможно най-близо до облегалката, възможно най-близо, за да поддържа равномерно гръбначния стълб (оптимална подкрепа на всички части на гръбначния стълб, така че да не се създава свободно пространство).

Бедрата трябва да се поддържат колкото е възможно повече, по цялата им дължина, което се постига чрез регулиране на дълбочината на седалката на количката, а стъпалата трябва да бъдат подпирани на плочата на подложката за крака, което предотвратява плъзгането, поддържа оптимално мускулно напрежение в краката и прехвърля част от тежестта от по-високите части на тялото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради високата регулируемост на количката, по време на регулирането на ъгъла на седалката и регулирането на ъгъла на облегалката е възможно да се зададе такава позиция, в която главата на детето ще бъде под тазовата линия. Забранено е използването на такава позиция, тъй като това може да доведе до опасност от задушаване на детето.

П.Г. Езда в количка

Когато използвате количката, винаги дръжте количката за дръжката за натискане, за да предотвратите инертното търкаляне на количката. Освободете централната спирачка, докато държите дръжката на количката и натиснете количката в безопасна посока.

П.Д. Преместване по наклонени повърхности

Винаги позиционирайте количката обърната напред, когато изкачвате хълмове или рампи. Ограничете скоростта си по наклонени повърхности и се движете възможно най-бавно. Лицето, което управлява количката, трябва да има достатъчно сила, за да контролира стабилността на количката.

Винаги имайте предвид, че позицията на центъра на тежестта на количката се променя при преминаване през неравен или наклонен терен. В такъв случай обърнете допълнително внимание и поставете количката.

Когато използвате алеи, уверете се, че алеята е подходяща, че колелата на количката са достатъчно високи, за да преговарят по алеята, че рамката на количката не влиза в контакт с алеята и се уверете, че втори човек помага, тъй като съществува риск количката да се преобърне, да повреди продукта и да нарани потребителя.

П.Е. Преодоляване на прагове или бордюри

При преодоляване на малки препятствия (малки прагове, малки бордюри и т.н.), блокирайте накланящото се краче с крака и дръжката, за да бутнете количката надолу и към вас да повдигнете предните колела на количката и внимателно да закарате предните колела над препятствието. След това бавно издърпайте дръжката за натискане нагоре от земята, за да повдигнете задните колела на количката и внимателно да задвижите задните колела върху препятствието.

П.Ж. Транспорт в колата и в други превозни средства

Извадете всички аксесоари от количката и ги съхранявайте на безопасно място. Сгънете количката и я поставете в багажника.

Ако разглобената количка не е в багажника на колата, отделена от купето, внимателно закрепете рамката на количката към превозното средство. За тази цел можете да използвате неизползвани предпазни колани.

За да транспортирате количка в други превозни средства, като влакове, трамваи, автобуси, самолети, кораби и т.н., трябва да попитате хората, които отговарят за транспорта в тези транспортни средства, за условията за безопасно пътуване до дестинацията с количка и съответните изисквания.



Не използвайте количка mouse като седалка, за да носите дете в превозното средство.

П.3. Почистване и грижи

Тапицериата може да се пере само на ръка при температура до 30°C.

Петната трябва да бъдат отстранени веднага след като се появят на повърхността на количката.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Да не се почиства с химикали, съдържащи разтворители и белина. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използването на неподходящи почистващи продукти.

Уверете се, че продуктът е винаги сух преди употреба.

Ако използвате препарати, предназначени за този вид материал – следвайте инструкциите на използвания агент.



Само ръчно пране



Не избелвайте



Не сушете в сушилня



Изушете в
хоризонтално
положение



Не гладете

Р. Съхранение на колички

Чистата количка трябва да се съхранява в чисто, сухо и добре проветриво помещение, за предпочитане при температура 0-35°C. В случай на дългосрочно съхранение следва да се извършват и стъпките, описани в точка 17 "всеки месец".

С. Сервиз и периодични прегледи

За да използвате количката безопасно и без повреда, тя трябва редовно и старателно да бъде подлагана на следните проверки и обслужване.

В ситуация, в която потребителят на количката не е в състояние сам да извърши гореспоменатите дейности, той трябва да закара количката до специализиран сервизен пункт за колички или директно до производителя, който правилно ще извърши проверката и необходимото обслужване. Тези дейности могат да бъдат допълнително платени.

ЗАБЕЛЕЖКА! Производителят е отговорен за дефекти или технически повреди на количката, които възникват само по време на правилната работа на количката. Отговорността за правилното функциониране на мотокара се носи от производителя само ако всички препоръки на производителя се спазват стриктно.

ЗАБЕЛЕЖКА! Производителят е отговорен за правилното функциониране на количката само ако в нея се използват оригинални части и оригинални аксесоари.

Всички ремонти трябва да се извършват в специализирани, оторизирани сервизни центрове (виж точка 20) или директно при производителя. Ремонтите на количката, извършени от всеки, различен от оторизирания сервиз или производителя, ще анулират гаранцията. Изпълнителят не носи отговорност за телесни повреди или унищожаване на продукта, които могат да бъдат следствие от ремонти, извършени от лица, различни от оторизирания сервиз или Производителя.

Обслужването трябва да се извършва:

- **Всеки път, преди да използвате количката**
 - Централна проверка на ефективността на спирачките - Когато се задейства централната спирачка, и двете задни колела на количката трябва да бъдат блокирани и не трябва да се въртят.
 - Проверка на закрепването на конструктивните елементи - Трябва да се проверят всички механизми на количката и нейните подвижни елементи, и по-специално трябва да се обърне внимание на: правилно монтиране на терапевтичната седалка с облегалка към рамката на количката, правилен монтаж на четирите колела, правилно функциониране на петточковите предпазни колани, правилно заключен механизъм за регулиране на ъгъла на седалката, правилно заключен механизъм за регулиране на ъгъла на облегалката и правилен монтаж на поставка за крака.
 - Проверка на състоянието на гумите - Проверете дали гумите на четирите колела не са повредени или износени.
 - Проверка на фиксирани елементи на рамката, седалка с облегалка и рамка за поставка за крака - Визуално проверете състоянието на структурните профили. Тези компоненти не трябва да бъдат повредени или напукани.
- **Всеки месец**
 - Почистване на количката
 - Визуална проверка на движещи се части, лагери, механизми за регулиране - смазвайте със силиконова грес.
 - Проверка на всички болтови връзки за игра.

Т. Разположение

Изхвърляне и рециклиране: в съответствие с действащите разпоредби в съответната държава.

У. Съответствие с изискванията за медицинските изделия

Медицинско изделие от клас I в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. относно медицинските изделия. Производителят е издал подходяща декларация за съответствие за продукта, която може да бъде намерена на уебсайта www.mywam.eu

20. Списък на оторизираните сервизни центрове

ПОЛША

MyWam sp. z o.o.

Wiosny Ludów 91, 40-373 Катовице, Полша

тел.: +48 32 733 11 31

Уебсайт: www.mywam.eu

Имейл адрес: mywam@mywam.eu

Х. Гаранционна карта

Серия и номер:

Дата на закупуване: - -

Печат и подпис на продавача:

.....
.....
.....

Гаранционни условия

- Продавачът предоставя на купувача гаранция за закупената количка за период от 24 месеца, считано от датата на покупката.
- **Купувачът, който се оплаква от количката, трябва да достави количката на продавача в опаковка, чиста (без петна, допълнително оборудване, което не принадлежи на количката, влага, коса и т.н.) заедно с елементите на количката, защитени от повреди.**
- **Повреди, причинени от недостатъчна защита на мотокарната пратка и нейните компоненти, не подлежат на гаранционен ремонт.**
- Жалбоподателят не може да иска безвъзмездно, ако неправилно етикетира или неправилно застрахова превоза на мотокара и неговите компоненти.
- Гаранционният срок се удължава с времето, когато количката е ремонтирана.
- Предвидените в ръководството дейности, които потребителят е длъжен да извършва самостоятелно и за своя сметка, не могат да се извършват като част от гаранционния ремонт.
- Неизползването на количката в съответствие с предназначението, това ръководство за употреба или правилната работа ще анулира гаранцията.
- Всички структурни промени в товарния автомобил анулират гаранцията (в областта на промяната или в нейната цялост).
- Повреди на мотокара, причинени от: неправилна експлоатация, неправилна поддръжка, неправилно съхранение на количката, механични повреди и естествена абразия и износване на части (напр. тапицерия, колела) не се покриват от гаранцията.
- Производителят предупреждава за гаранционни ремонти в неоторизирани сервизни съоръжения. Намирането на такъв ремонт или неразрешена модификация на количката ще анулира гаранцията.
- **Гаранционната карта е валидна, при условие че има: датата на продажбата, потвърдена с фирмения печат на Продавача, подписа на Продавача, вида и серийния номер на камиона.**
- Гаранционната карта е валидна при условие, че не съдържа заличавания или корекции.
- Производителят на мотокара извършва платен следгаранционен сервиз в централата си.
- По въпроси, които не са обхванати от тази гаранционна карта, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс (Полша).
- Всички въпроси, свързани с гаранцията и оплакването на количката, трябва да бъдат насочени към Продавача.

Ц. Бележки