



БА №: 01.01.053/2021-01-A01

Инструкция за експлоатация

Пътуване и голямо пътуване

1. Описание на артикула

1.1. Въведение

- Описаната тук статия е според **(ЕС) 2017/745 MDR**, медицинско изделие от клас на риск I.
- В това ръководство ще намерите информация и инструкции за пускане в експлоатация, употреба, поддръжка и грижи за артикула. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта. Моля, обърнете внимание на инструкциите за безопасност и действайте според тях.

2. Характеристики на изпълнението

1. Цел

- Продуктът се използва за облекчаване на ограниченията на долните крайници. Позволява на потребителя да преследва желанието си за мобилност. За безопасна употреба трябва да има достатъчно мускули в горната част на тялото. Хората със сензорни увреждания може да не могат да използват този артикул. Статията не поставя специални образователни изисквания към потребителя. Може да се демонтира за целите на пътуването.

Спецификация:

Наименование					
108,50	Пътуване	2	130 кг	с	а
108,00	Голямо пътуване	1	150 кг	с	а

а=Регулируема по височина / с=Употреба на закрито и на открито 1=Стандартна скоба с транспортна позиция / 2=Натиск при смачкване, демонтиран

2. Мисия

- Температурен диапазон: -10°C до +35°C. Директната лъчиста топлина върху изделието трябва да се избягва. Влажност: 40% до 85%. Извън тези условия артикулът може да се използва само за кратко време.
- Артикулът не е подходящ за използване в плувен басейн или сауна, тъй като може да се получи обезцветяване на повърхността и ограничения в механичната якост.

2.3. Съхранение и транспорт

- Температурен диапазон: +5°C до +25°C. Трябва да се избягва директна лъчиста топлина върху артикула. Съхранявайте артикула в сухи помещения с влажност до 65%.

2.4. Изхвърляне

- Изхвърлянето и рециклирането на използвани продукти и опаковки трябва да се извършва в съответствие с приложените разпоредби. Проверете при фирма за изхвърляне на отпадъци. Трябва да се спазва Законът за защита от инфекции. Моля, обърнете внимание на маркировките върху опаковъчните материали и действайте съответно.

3. Символи и табелки

символ	Значение	символ	Значение
	Инструкции сен!		Година на производство Продукт
	Артикулен номер		производител
	език		Максимален потребител тегло в кг

символ	Значение	символ	Значение
	Важна информация информация!		продукт отговаря (ЕС) 2017/745 MDR

4. Гаранция

- Артикулът е с 12 месеца гаранция от производителя.

- Всякакви неоторизирани модификации на този продукт ще анулират съответствието на продукта и ще анулират гаранцията.

4.1. Жалба

- Моля, свържете се с нас, преди да върнете артикул. За да намалите щетите при транспортиране, използвайте оригиналната опаковка, ако е възможно.
- Трябва да се спазва Законът за защита от инфекции.
-Моля, уверете се, че артикулът не представлява риск от инфекция при връщане. Маркирайте артикула с информационен лист за безопасност. Връщанията, които не са маркирани като безопасни, могат да доведат до такси.

5. Инструкции за безопасност



Спазвайте следните инструкции за безопасност:

- Преди първоначална експлоатация инструкциите за експлоатация пълни инструкции, за да избегнете щети, причинени от неправилна работа. за да избегнете наранявания или опасности. Преди всяка употреба проверявайте дали няма видими повреди по артикула. Ако артикулът не работи или е повреден по някакъв начин, той не трябва да се използва. Проверявайте редовно смукателната капсула за повреди и износване; подновете, ако е необходимо.
- Помощното средство за ходене трябва да бъде разположено възможно най-вертикално при ходене. Затова никога не поставяйте помощното средство за ходене твърде далеч от тялото си или твърде далеч напред в посоката, в която вървите. Хванете дръжката напълно и здраво с една ръка. Ако е възможно, накарайте някой да ви придружава и подкрепя, за да може да ви хване, ако паднете.
- Помощното средство за ходене не трябва да се използва за цели, различни от предвидените. Затова ги използвайте само за поддържане на способността за ходене, а не например като помощ при стоеене, за лостове или за преместване на мебели и други предмети. Не прикрепяйте никакви предмети (чанти, торбички и др.) към мощното средство за ходене.
- След дълъг период на неупотреба: Проверете помощното средство за ходене от специалист или търговец. Не могат да се правят независими механични модификации (отговорност за продукта!). Не излагайте помощното средство за ходене на слънчева светлина за дълги периоди от време (на прозореца, близо до нагревателя, в колата). Топлината може да промени свойствата и издръжливостта на материала.
- Внимание, опасност от подхлъзване:** Никога не ходете по заснежени или ледени повърхности с помощното средство за ходене без защита против хлъзгане (ноктъ за лед). Бъдете внимателни, когато ходите по мокри плочки, подове или пресичате разхлабени килими. Никога не почиствайте дръжки или вендузи с мазни вещества. Внимавайте с неравни повърхности, дупки в земята и разхлабени повърхности, тъй като помощното средство за ходене може неочаквано да се подхлъзне или да потъне.
- Съществува риск от нараняване при температура на повърхността > 40°C. Не излагайте артикула на прекомерни температури (слънчева светлина, отопление, гореща вода). Оставете артикула да се охлади преди употреба.



Инструкция за експлоатация Прочетете преди първа употреба и да продължи да го предоставя на потребителя, както и да го запази за бъдеща употреба и да го включи в случай на препродажба.



Когато артикулът се използва от потребители с нечувствителна кожа (без усещане за температура или увреждане на кожата), медицинският персонал трябва да извърши топлинна проверка (напр. докосване с опакото на ръката).

6. Докладване на инциденти

- Сериозни инциденти, свързани с артикула, трябва да бъдат докладвани незабавно на производителя [и BfArM \(www.bfarm.de/DE\)](http://www.bfarm.de/DE), [за да докладвате](#). Използвайте функциите и формулярите за отчитане на BfArM.

7. Повторна употреба, експлоатационен живот

- Артикулът е подходящ за повторна употреба. Броят на повторните употреби зависи от интензивността и вида на употреба на артикула. Преди повторна употреба артикулът трябва да бъде преработен и неговата техническа и функционална безопасност проверена и, ако е необходимо, възстановена. Допълнителна информация е достъпна в [eiding \(01.12.154\)](#). може да се намери. Обработката на това ръководство може да се намери [и](#) може да се изтегли.
- а Когато се използва според указанията, животът на продукта е.
- б Ефективната продължителност на живота може да варира в зависимост от употребата и общото състояние.
- д
- аз

8. установи стабилно състояние


- г Ние ще проверим артикула във фабриката за дефекти и пълнота.
- стр При получаване, моля, проверете артикула за дефекти и се уверете, че съдържанието на доставката е пълно.
- стр

8.1 въз основа на размера на тялото

- л Нека артикулът бъде коригиран по размер от вашия специализиран персонал. Височината се регулира чрез алуминиева тръба с щипки (1). Статията има ли а
- аз Винтовата връзка трябва да се разхлаби, като се завърти обратно на часовниковата стрелка, преди да се регулира.
- т След настройката винтовата връзка трябва да се затегне отново.




8.2 ел

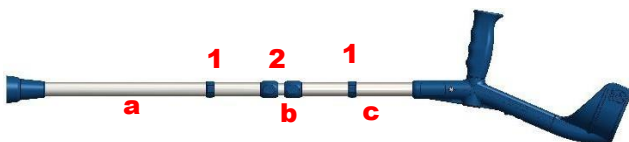

- Доставя се в разглобено състояние за пътуване. Отстранете двете скоби (1) от вътрешната гума. Натиснете трите тръби заедно и вкарайте докрай скобите (1) в желаната позиция. Затегнете двете винтови връзки (2).

8.3. Голямо пътуване

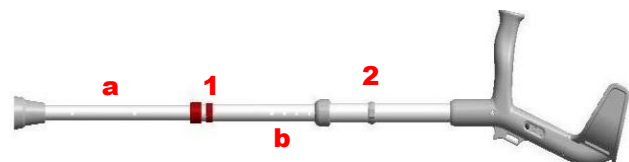

- Доставка в състояние на пътуване. Отстранете червената скоба (1) и сивата скоба (2). Издърпайте вътрешната гума (а) до третата и най-дълга настройка. Поставете отново червената скоба (1). Задайте желаната дължина на средната тръба (b). Поставете отново сивата скоба (2).


8.4. Подлакътници

- За да регулирате/монтирате подлакътника, натиснете бутона и плъзнете подлакътника в желаната позиция, докато бутонът щракне на място.

9. Данни за продукта

- Запазваме си правото да правим промени поради техническо развитие в сравнение с версията, показана в това ръководство за експлоатация.

REF	A / мм	Широчина / мм	C / мм	α
108.50 час а	225-250	785-935	22	23°
108,00	225-250	795-995	19	20°

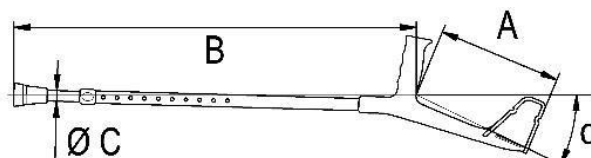

10. Грижа

- За грижа използвайте лек почистващ и дезинфектант, предлаган в търговската мрежа. След почистване избършете с чиста вода и подсушете помощното средство за ходене с кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати или почистващи препарати с агресивни разтворители (следвайте инструкциите на продукта!) или твърди почистващи инструменти, тъй като това може да повреди повърхностите или да причини образуване на отлагания.

11. Поддръжка

- Проверявайте вашето помощно средство за ходене от вашия специализиран търговец поне веднъж на всеки шест месеца. Износените смукателни капюли (износващи се части) трябва да се сменят незабавно. Обърнете внимание на [диаметъра](#) (вижте 9). Издърпайте смукателната капсула от края на тръбата. Натиснете новата капсула за засмукване докрай и проверете дали е здраво поставена.

Резервни части и аксесоари:

Артикул №	Наименование
200.00.00	Вендуза 19 мм, сива
200.50.20	Вендуза 22мм, синя
201.30.00	Щипка за регулиране 22 мм, червена
201.00.25	Щипка за регулиране 25 мм, сива
201.50.00	Щипка за регулиране 22 мм, синя
01.01.001г	Инструкция за експлоатация
01.12.154г	Инструкции за приготвяне
160.02.02	Стандартна подложка за подлакътници
160.02.03	Подложка за подлакътник Голяма
160.01.02	Стандартен грип
160.01.03	Голяма подложка за захващане
255.00.00	Пътна чанта

reha
Г Р У П

www.reha.bg