

NETTI ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПРОДУКТ

pexa
Г Р У П

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ВАШЕТО ИНДИВИДУАЛНО
АДАПТИРАНО РЕШЕНИЕ

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ С ТРАНСПОРТ



Проектиран в Норвегия

Enable joy of life

ПОЗДРАВЛЕНИЯ,

след като станете собственик на усъвършенстван персонализиран продукт на Netti.

ТЯ Е ИЗРАБОТЕНА СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС - за да обслужва вашите нужди по най-добрия начин. Когато се грижи правилно и се използва според предназначението, ще ви се отблагодари с много години надеждна работа.

Моля, отделете няколко минути, за да прегледате това въведение към Netti. Тук сме, за да ви информираме на какви условия се основава и кои гаранционни условия са обхванати.

Вашият персонализиран продукт Netti е разработен и проектиран в съответствие с информацията, получена от вашия терапевт относно нуждите, които имате. Нашият екип от специализирани производители на инвалидни колички разчита на тази информация.

Решенията са разработени на базата на известни и добре изпитани конструктивни принципи. Те са направени от части, които са адаптирани, докато съставят този персонализиран продукт. Уникалните решения, докато се доставят, са оценени на риска и са одобрени, за да притежават здравината и функционалните качества, подходящи за продукта - за да ви осигурят безопасен за използване и надежден продукт.

СЕ-ЕТИКЕТ

Персонализираните продукти на Netti нямат етикет CE, защото не са серийни продукти. Те обаче са произведени въз основа на дългогодишен опит и ноу-хау и отговарят на всяка обикновена употреба.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Отделете време, за да проучите всяка потребителска информация, която се доставя с вашия Персонализиран продукт Netti. Това е жизненоважно за получаване на най-доброто от продукта.
- За инвалидна количка Netti Customized, моля, прочетете ръководството за потребителя за основната инвалидна количка, която е персонализирана - за да научите как да използвате и поддържате вашата персонализирана инвалидна количка.
- Ако вашият продукт Netti Customized е част от инвалидна количка, направете уверете се, че вашият продукт Netti Customized е инсталиран правилно и фиксиран добре. Проверявайте редовно закрепването, за да сте сигурни, че остава фиксирано.
- За персонализирани продукти за тапицерия Netti, не забравяйте да следвате етикетираните инструкции за почистване на тапицерията.
- Ако продуктът Netti Customized има подвижни части, уверете се дали е необходимо редовно да ги смазвате за оптимална функция.

Уверете се, че вашият дилър ви е дал необходимата специална информация и обучение. Той е отговорен за обучението и информирането ви за всякакви рискове и специални предпазни мерки, които трябва да предприемете с вашия продукт Netti Customized.

КРАШ ТЕСТ

Всички инвалидни колички Netti, преминали тестове за сблъсък, и те са тествани със стандартно оборудване Netti и са одобрени за използване като седалка в превозно средство.

Персонализираните продукти на Netti HE са тествани при сблъсък. По този начин са оборудвани инвалидни колички с персонализирани артикули Netti HE Е ОДОБРЕНО за използване като седалка в кола.
Персонализираните части са етикетирани със следния знак:



В някои специални случаи персонализирана инвалидна количка може да бъде оценена като риск достатъчно здрава за използване като седалка в кола. Трябва да кандидатствате за това от вашия дилър на Alu Rehab.

Ако се използва като седалка в превозно средство:

Ако искате да използвате инвалидна количка Netti (като стандартна, тествана при сблъсък и одобрена за използване като седалка в кола) с монтирани персонализирани елементи Netti - като седалка в кола, можете да го направите, ако замените персонализираните елементи със стандартен артикул за момента; например опора за глава или опора за крака. Обърнете специално внимание, за да ги монтирате според описанието за монтаж в ръководството за потребителя.

ТРАНСПОРТ С АВТОМОБИЛ:

Когато инвалидна количка трябва да се използва като седалка в кола, моля, следвайте инструкциите:

- Проверете дали инвалидната количка е одобрена за използване като седалка в а автомобил (съгласно ISO 7176-19:2008)
- Проверете максималното тегло на потребителя и не натоварвайте стола с повече.
- Отстранете всички аксесоари и елементи, които могат да се отделят в случай на инцидент. Съхранявайте ги и ги закрепете на сигурно място.
- Винаги използвайте одобрена инвалидна количка и система за обезопасяване на пътници (ISO 10452:2012) за фиксиране на инвалидната количка в превозното средство. Netti III е преминал успешен краш тест с помощта на комбинирана инвалидна количка и система за обезопасяване на пътници W120/DISR, разработена от Unwin Safety Systems. За допълнителна информация: www.unwin-safety.com

- Проверете дали инвалидната количка е оборудвана "болтове с ухо" за заден монтаж на предпазни ленти.
Артикулен номер за 1 чифт халки с втулка: 21074.



ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ


Отпред: Използвайте приставка за кука или лента. 2 стикера в предната част на рамката, показват къде да фиксирате презрамките отпред.

Отзад: Монтирайте „болт с ухо“ в един от отворите в скобата на рамката на колелото. Закачете куката на карабината в „болта с ухо“

Ъгълът на лентите трябва да бъде 0-45°



⚠ Винаги използвайте предпазните колани на пътниците в колата за ползвателя на инвалидната количка. Коригиращите колани, използвани в инвалидна количка, не са предпазни колани. Уверете се, че предпазните колани са близо до тялото на потребителя (не през подлакътника.)

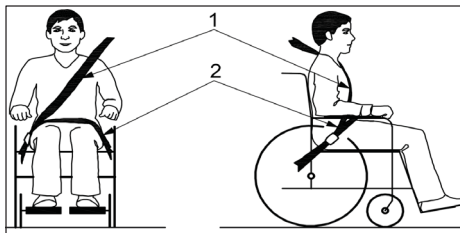

⚠ Инвалидните колички Netti са били тествани за катастрофа без никакъв комплект за захранване и т.н.

Ако в по-късен момент бъде монтиран комплект за захранване, катерене по стълби и т.н., трябва да проверите дали вашето устройство за асистент за електричество е тествано за катастрофа и одобрено за инвалидни колички, използвани като седалка в кола. Ако не, това трябва да се демонтира, когато инвалидната количка се използва като седалка в кола.

⚠ Когато потребителят е висок 1,85 м или по-висок, използвайте Netti III като седалка в кола, трябва да се монтира комплектът за удължаване на гърба.

⚠ Ако ширината на инвалидната количка надвишава максималната ширина от 700 mm, посочена в PRM-TSI, това може да повлияе върху възможността за транспорт с влак и друг обществен транспорт.

⚠ Инвалидните колички Netti са тествани при катастрофа и са одобрени с възглавници Netti. Винаги използвайте Netti Cushions, когато инвалидна количка Netti се използва като седалка в кола.

⚠ Ако опората за глава на Netti е монтирана правилно, тя е много стабилна, но опората за глава за кола е създадена за още по-големи натоварвания.

⚠ Никога не използвайте инвалидната количка като седалка в кола, ако е била замесена в инцидент с удар.

СГЪВАЕМА ЗА ТРАНСПОРТ

Когато инвалидната количка не е заета, сгънете я, както е описано в ръководството за потребителя. Поставете инвалидната количка в багажника или на задната седалка.

Когато е поставен на задната седалка, закрепете рамката с предпазни колани, за да сте сигурни, че не представлява опасност за пътниците в случай на инцидент.

ТРАНСПОРТ В САМОЛЕТ

Ръчните инвалидни колички Netti могат да се транспортират в самолет без никакви ограничения. Инвалидните колички Netti са оборудвани с 2 или 3 газови амортизатори. Те обаче не са класифицирани като опасни стоки. Противно на общата инструкция за опасни товари UN3164, IATA-DGR (специална наредба A114) постановява, че стоките, които съдържат газ и са определени да функционират като амортизатори (включително енергопоглъщащи устройства или пневматични пружини) НЕ са предмет на транспортните инструкции, т.е. те са обезщетени от следните изисквания:

а) всеки артикул има газов обем, който не надвишава 1,6 l и налягане на зареждане, не по-голямо от 250 бара, като производението от капацитета, изразен в литри, и налягането на зареждане, изразено в бара, не надвишава 80.

б) Всеки артикул има минимално налягане на разрушаване 4 пъти налягането на зареждане при +20 градуса по Целзий за продукти, които не надвишават 0,5 l капацитет на газовото пространство.

в) Всеки артикул е направен от материал, който не се раздробява.

г) Всеки артикул е произведен в съответствие със стандарт за качество, който е одобрен от отговорния национален орган.

д) Доказано е и е показано, че артикулът възобновява своето налягане посредством разграждащо се при пожар уплътнение или друго устройство за освобождаване на налягането, така че артикулът да не се раздробява и артикулът да не избухва.

ПЪТУВАНЕ С ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Инвалидната количка трябва да бъде поставена в специално място за инвалидни колички. Инвалидната количка трябва да е обърната срещу посоката на движение. Гърбът на инвалидната количка трябва да е разположен срещу неподвижен обект, като например ред седалки или преграда. Уверете се, че потребителят може лесно да достигне всякакви парапети или дръжки.



ГАРАНЦИЯ

Alu Rehab предоставя 2 години гаранция за ремонт на Netti Customized продукти.

Решенията Netti Customized са уникални и не се произвеждат серийно. Поради това винаги ще трябва да връщате Netti Customized продукта на Alu Rehab, ако има нужда от ремонт или замяна.

Alu Rehab не носи отговорност за щети, произтичащи от неподходящ или непрофесионален монтаж и/или ремонти, пренебрегване и износване, от промени в модулите на инвалидни колички, които не са одобрени от Alu Rehab, или от използване на резервни части, доставени или произведени от трети страни. В такива случаи тази гаранция се счита за невалидна.

ИСК

! Рекламацията трябва да бъде адресирана до търговския агент на Netti Customized продукт или персонализирана инвалидна количка Netti. Моля, имайте предвид, че документацията за продажба трябва да бъде попълнена и подписана правилно, за да се документира времето и мястото на закупуване на конкретния Netti Customized продукт.

! Персонализираният продукт на Netti е етикетиран с уникален номер идентифицирайки го. Моля, обърнете се към този номер или към номера на рамката на инвалидната количка, или към номера на поръчката при всякакви въпроси към продукта.

! Искове трябва да бъдат адресирани до агента по продажбите на инвалидната количка веднага, когато дефектът е открит.

! Търговският агент и Alu Rehab трябва да решат дали даден дефект е покрит от гаранцията. Ищецът ще бъде уведомен за решението възможно най-скоро.

! Ако рекламацията бъде приета, търговският агент и представителят на Alu Rehab трябва да решат дали продуктът да бъде ремонтиран, заменен или клиентът има право на намалена цена.

! Нормалното износване, неправилната употреба или неправилното боравене не е причина за рекламации

! Потребителят е отговорен за употребата, поддръжката и боравенето с Netti Персонализиран продукт според предвидената употреба и ръководството за потребителя, ако рекламациите трябва да бъдат приети.

В ДИАЛОГА НИЕ СЪЗДАВАМЕ ПРОСТИ РЕШЕНИЯ И ДАВАМЕ РАДОСТ ОТ ЖИВОТА

ЖЕЛАЕМ ВИ МНОГО ГОДИНИ КОМФОРТ С
ВАШИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПРОДУКТ NETTI

Актуализации, ръководства за потребителя и информация за
нашите стандартни продукти може да намерите на нашата
уеб страница:

www.My-Netti.com

UM0123UK
2018-12

ЧУВСТВАЙТЕ СЕ СВОБОДНИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:



Alu Rehab AS
Бедрифтсвеген 23
4353 Klepp Stasjon
НОРВЕГИЯ

T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
ДАНИЯ

T: +45 87 88 73 00
info@My-Netti.com



РЕХА груп ООД
8000 гр. Бургас,
тел.: 056 71 50 71,
моб.: 0895 520 540
www.reha.bg