



Патент NO2019050262



Ръководство за потребителя



Този продукт отговаря на регламент MDR (EC)
2017/745 за медицински продукти.

UM0136 UK 2025-03

*inspire
joy of life*

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	6
1.1 ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА / ПОКАЗАНИЯ ЗА NETTI <i>AdaptPro</i>	7
1.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	7
1.3 КАЧЕСТВО И ИЗДРЪЖЛИВОСТ	8
1.4 ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	8
1.5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА	9
1.6 ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО	10
1.7 ЖИЗНЕНО ВАЖНИ МЕРКИ	11
2. БЪРЗА СПРАВКА	14
3. ОПИСАНИЕ	16
3.1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА NETTI <i>AdaptPro</i> СИСТЕМА	18
3.2 КАК НЕТИ <i>AdaptPro</i> РАМКОВА РАБОТА	20
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА NETTI<i>AdaptPro</i>	23
1. АКСЕСОАРИ	24
5. СГЛОБЯВАНЕ И НАСТРОЙКА	28
5.1 РАЗОПАКОВАНЕ	28
5.2 ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕГУЛИРАНЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ – ПРЕГЛЕД	29
5.3 МОНТАЖ НА ДЖАНТИ	30
1. ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА	30
2. ПРЕДНА ВИЛКА	31
3. ПРЕДНИ КОЛЕЛА	31
4. РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ЛАГЕРА НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛЛО	32
5. ПРАВИЛЕН ЪГЪЛ НА РАМКАТА	33
6. БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОСНОВНОТО КОЛЕЛО	34
7. РЕГУЛИРАНЕ НА БАРАБАННАТА СПИРАЧКА	35
8. РАБОТА НА СПИРАЧКИТЕ	36
4. СГЛОБЯВАНЕ НА СЕДАЛКАТА – ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА ЗА ИНВАЛИДНА КОЛЯЧКА	37
1. ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – ПОЗИЦИИ НА КОЛЕЛАТА	37
2. ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА ОТЗАД	37
3. ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА ОТПРЕД	39
4. NETTI СЕДАЛКА	39
5. ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – РЕГУЛИРАНЕ ОТЗАД	41
6. ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА СЕДАЛКАТА В СРЕДАТА НА СЕДАЛКАТА	42
7. ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЕДАЛКАТА ОТПРЕД	43
8. ФИКСИРАНА СЕДАЛКА	45

5.5	Сглобяване и позициониране на облегалката	46
5.5.1	РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕЛКРО ГРЪБ	46
5.5.2	ПОСТАВЯНЕ НА ПОДПОРНА ВЪЗГЛАВНИЦА	48
5.5.3	УТЪЛЖИТЕЛ ЗА ГРЪБ	48
6.	ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ОПОРЕН ЦИЛИНДЪР ЗА ГРЪБ	49
1.	СМЯНА НА НАКЛОНЕН ГАЗОВ ЦИЛИНДЪР	50
2.	СМЯНА НА НАКЛОНЕНА ГАЗОВА БУТИЛКА	52
7.	СГЛОБЯВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОПОРА ЗА ГЛАВА NETTI	53
1.	ОПОРИ ЗА ГЛАВА NETTI	53
2.	РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРАТА ЗА ГЛАВА NETTI DYNAMIC	54
3.	NETTI PUSH BOW ЗАТЯГАНЕ	54
8.	РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРИ ЗА РЪКАТА	55
1.	ВИСОЧИНА НА ОПОРИ ЗА РЪКАТА – ОТПРЕД	55
2.	ВИСОЧИНА НА ОПОРИ ЗА РЪКАТА – ОТЗАД	55
3.	БОРАВЕНЕ С ОПОРИ ЗА РЪКАТА	56
9.	КОЛАНИ И КОЛАНИ	57
10.	ОПОРИ ЗА КРАКАТА	61
1.	РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА И ДЪЛЖИНА НА ОПОРАТА ЗА КРАКАТА	61
2.	ОПОРИ ЗА КРАКА GRANDIS	62
3.	ФИКСИРАНИ ОПОРИ ЗА КРАКА GRANDIS	66
4.	ОПОРИ ЗА КРАКАТА С РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛ	68
5.	NETTI ДВОЙНИ ОПОРИ ЗА КРАКА	73
6.	ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДВОЙНАТА ОПОРА ЗА КРАКА NETTI DYNAMIC	82
7.	РЕГУЛИРАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ДЪЛЖИНИ НА КРАКАТА	83
8.	МОНТИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ОПОРА ЗА КРАКА	86
9.	ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКАТА	87
11.	СТРАНИЧНИ ОПОРИ	88
12.	БЛОК НА АБДУКЦИЯ	89
13.	ОПОРА ЗА БЕДРА	90
14.	ТАБЛИЦА	90

6. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА НА NETTIAdaptPro

91

6.1	КЛЮЧОВИ ДУМИ ОТНОСНО НАКЛОНЯВАНЕ И НАКЛАДАНЕ НА КОМФОРТНИ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ	92
6.2	НАМАЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПЪЛЗВЪЗВАНЕ, СЪРЖАНЕ И РАНИ ОТ НАЛЕЖАНИЕ	92
6.3	ОПЕРАТИВНО НАГЛЕЖДАНЕ: НАКЛАДАНЕ НА ОБСПАЛКАТА НА СТОЛЛА	93
6.4	ОПЕРАТИВЕН НАКЛОН: НАКЛАНАНЕ НА СЕДАЛКАТА	93
6.5	ПРАКТИКУВАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА NETTIAdaptProСИСТЕМА ЗА НАКЛЯНАНЕ И НАКЛАДАНЕ СЪВМЕСТНО С ПОТРЕБИТЕЛЯ	94
6.6	ТРАНСФЕР ОТ И ДО ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА	95
6.7	ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕКАТЕЛ ЗА ПАЦИЕНТ	95
6.8	ЕЖЕДНЕВНА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОБСЛУЖИТЕЛ	96
1.	БУТАЩ ЛЪК	96
2.	АНТИТИПС	97
3.	СПИРАЧКИ	98
6.8.4	ОПОРИ ЗА РЪКАТА	99

5.	ОПОРА ЗА ГЛАВА – МОНТИРАНЕ	100
6.	ОПОРИ ЗА КРАКАТА – МОНТИРАНЕ	101
7.	ОПОРА ЗА КРАКА ДЪСКА ЗА КРАКА	102
8.	ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ОПОРИ ЗА КРАКА	103
8.	КОЛАНИ И КОЛАНИ	104

7. ТРАНСПОРТ 106

7.1	ТРАНСПОРТ С АВТОМОБИЛ	106
7.2	СГЪВАЕМА ЗА ТРАНСПОРТ	109
7.3	ТРАНСПОРТ В САМОЛЕТ	110
7.4	ПЪТУВАНЕ С ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ	110

8. МАНЕВРИРАНЕ 111

8.1	ОБЩИ ТЕХНИКИ	111
8.2	ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ – СЪПКА НАГОРЕ –	114
8.3	ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ – СЪПКА НАДОЛУ –	115
8.4	ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ – НАКЛОН –	115
8.5	ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ – НАГОРЕ И НАДОЛУ ПО СЪЛБИТЕ –	116
8.6	ТРАНСФЕР	116
8.7	ТОЧКА НА БАЛАНС	118
8.8	ПОВДИГАНЕ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА	118
8.9	ПУШ РИМ	119

9. ПОДДРЪЖКА 120

9.1	ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА	120
9.2	ПОЧИСТВАНЕ И ПРАНЕ	120
9.3	ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ	121

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 122

11. ТЕСТОВЕ И ГАРАНЦИЯ 123

11.1	ТЕСТОВЕ	123
11.2	ГАРАНЦИЯ	123
11.3	ИСК	124
11.4	НЕТИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ / ИНДИВИДУАЛНИ	124
11.5	АДАПТАЦИИ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИ ПРОДУКТИ	125
11.6	ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ	126

12. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО 127

1. ВЪВЕДЕНИЕ

НетиAdaptProe инвалидна количка с накланяне и накланяне със система за сядане за подрастващи и възрастни потребители, предназначена главно за употреба на закрито и отчасти на открито. Тестван е по EN 12183. Тестовите са проведени от акредитиран немски институт за изпитване.

В Alu Rehab вярваме, че инвалидните колички трябва да се избират въз основа на задълбочена оценка, фокусирана върху нуждите на потребителя и изискванията на околната среда. Жизненоважно е да сте наясно с възможностите и ограниченията на предлагането на инвалидни колички. НетиAdaptProe инвалидна количка, предназначена за потребители с голяма нужда от комфорт и настройки. Има регулируем ъгъл на седалката и облегалката, което улеснява потребителя при смяна на позицията, мобилизиране или корекция (стабилизация) на позата.

НетиAdaptProe тестван при сблъсък в международния тестов център на TASS в Хелмонд Холандия, съгласно ISO 7176-19.



Макс. теглото на потребителя е 135 кг, също и когато се използва като седалка в кола.



Когато монтирате аксесоари като захранващ комплект и др., теглото на аксесоарите трябва да се извади от макс. тегло на потребителя.



Спецификациите варират в различните страни.



1.1 ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА / ПОКАЗАНИЯ ЗА

1.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

NETTI*AdaptPro*

Нети*AdaptPro*е многофункционална инвалидна количка с възможност за накланяне и накланяне за комфортен транспорт на коледа за частично или напълно неподвижни юноши и възрастни хора с физически и/или умствени увреждания. Нети*AdaptPro*има модулна система, която може да се персонализира и настройва според нуждите на потребителя. Той осигурява средство, чрез което лице с увреждания, което се нуждае от възможността да променя позицията на седене от активност към почивка, ще се възползва от използването на функциите за накланяне и накланяне. Предназначен е за потребители с нужда от комфорт и облекчение. Комбинацията между системата за сядане и ергономичното решение в конструкцията на рамката предлага много възможности за адаптация и настройки.

ВАЖНИ ПРЕДИМСТВА на Netti

AdaptPro Уврежданията могат да имат множество причини. Нети *AdaptPro*има регулируем ъгъл на седалката и облегалката, като по този начин улеснява за потребителя промяна на позицията, мобилизация или корекция на стойката (стабилизация), където са налице следните функционални затруднения с множество възможни причини:

- ограничена или липса на подвижност
- ограничена или липсваща мускулна сила
- ограничен обхват на движение
- липса или ограничена стабилност на тялото
- хемиплегия
- ревматични заболявания
- черепно-мозъчни травми
- Ампутации
- други неврологични или старчески заболявания.



Преди да използвате Netti*AdaptPro*, оценката на местата за сядане трябва да се извърши от обучен специалист.



Ако нашите стандартни решения не покриват вашите нужди, моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти за персонализирани решения на Netti.

Нети*AdaptPro*не трябва да се използва, ако:

- Потребителят има силни неволни движения. За тези потребители се препоръчва използването на Netti Dynamic System.

1.3 КАЧЕСТВО И ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Инвалидните колички Netti AdaptPro са тествани в акредитиран немски тестов институт в съответствие с европейския стандарт EN 12183.

Като производител, Alu Rehab AS оценява теста като равен на 5 – 6 години нормална употреба на стола. Увреждането на потребителя, издръжливостта на употреба, както и нивото на извършена поддръжка, определят преди всичко издръжливостта на инвалидната количка. По този начин издръжливостта ще варира в зависимост от тези три фактора. При подходяща поддръжка може да се очаква животът на инвалидната количка да надвиши 5-годишния гаранционен период с много години.

1.4 ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Alu Rehab и неговите доставчици искат да защитят околната среда.



Това означава:

- Че избягваме използването на вредни за околната среда вещества и процеси във възможно най-голяма степен.
- Че продуктите на Alu Rehab са с гарантиран дълъг експлоатационен живот и висока степен на гъвкавост – в полза на околната среда и икономиката.
- Че всички опаковки могат да бъдат рециклирани.
- Че инвалидната количка е проектирана да бъде разделена на съставните си материали – за да улесни рециклирането.



Свържете се с вашия местен агент за рециклиране, за да получите точна информация как да боравите във вашия район.



ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН

Netti AdaptPro Инвалидната количка е предназначена за температурен диапазон от – 10°C до +40°C.

1.5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

Всички продукти от Alu Rehab са проектирани да предоставят години на малко обслужване. Всички продукти могат да бъдат адаптирани за повторна употреба от оторизиран търговец. За да се гарантира ефективност и безопасност, Alu Rehab препоръчва следните тестове преди повторна употреба.

Моля, проверете следните компоненти за функция, цялост и т.н. и сменете части, ако е необходимо:

- освобождаване Колела (протектор на гума) и бързо
- Рамка за инвалидна количка
- Предни колела и бързо освобождаване
- Хъбове
- Спирачна функция
- Посочна стабилност на колелата
- Лагери: тест за износване и смазване
- Възглавници
- Подпори за крака
- Опори за ръце
- Функция за накланяне / накланяне
- Бутаща лента / дръжки
- Анти-накланяне

Ако са монтирани електрически функции, моля, проверете:

- сменени Батерии – може да се наложи да бъдат
- Кутия за управление
- конектори Точка за зареждане и всички
- Джойстик
- механизми. Електрически функции на всички изпълнители

Моля, проверете състоянието на всички компоненти за повторна употреба. Моля, сменете частите за повреждане или за нов потребител.



Ръководство за обновяване на инвалидни колички Netti може да бъде изтеглено от [My-Netti.com](https://www.my-netti.com)



Ръководство за рециклиране на инвалидни колички Netti може да бъде изтеглено от [My-Netti.com](https://www.my-netti.com)

1.6 ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

За да избегнете щети при използване на Netti *AdaptPro* инвалидна количка, моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете да използвате стола.



Символ на забранени действия.
Не може да бъде поискана гаранция,
когато тези действия се изпълняват.



Символ на предупреждение.
Когато се използва този символ,
трябва да се внимава.



Символ за важна информация.



Символ за полезни съвети.



Символ за инструменти.



Символ за:

Максимален безопасен наклон за ръчна спирачка.



Символ за: Максимално тегло на потребителя.



Медицинско изделие



Производител – Име и адрес



Дата на производство



Сериен номер



Прочетете инструкциите за потребителя



Моля, обърнете внимание, че това ръководство се актуализира според годината и датата, посочени на всяка страница.

Ръководство за потребителя в мрежата – My-Netti.com

За подобрена четливост (изгодно за потребители с проблеми с видимостта), моля, намерете нашето ръководство за потребителя на нашата уеб страница: www.My-Netti.com – ръководства – ръководство за потребителя Netti*AdaptPro*.

Най-новите актуализации на ръководството за потребителя, бележки за безопасност на продукта, адреси и друга информация за продукта, като изтегляне и др., ще бъдат публикувани на нашата уеб страница.

1.7 ЖИЗНЕНО ВАЖНИ МЕРКИ

НетиAdaptProe удобна инвалидна количка, предназначена предимно за употреба на закрито, може да се използва на открито върху гладка и равна повърхност.

Мин. размерите в таблицата се отнасят за ширина на седалката 350 mm.

Макс. размерът се отнася за ширина на седалката 500 mm.



Спецификациите варират в различните страни.

ОБЩО ТЕГЛО: 53 КГ (450

мм ширина на стола)

ШИРИНА НА СЕДАЛКАТА:

350, 380, 400, 430, 450, 500 mm (8 мм по-малко между опорните подложки за ръцете)



ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА:

От задното велкро до предната част на седалката:

При sw 350 – 400 мм:

380, 405, 430, 455 mm (355 mm

– не се предлага с опори за крака Grandis)



Чрез sw 430 – 500 мм: (405 мм*)**430, 455, 480, 505**

mm (*Минимална дълбочина на седалката с облегалката на стола в предно монтирано положение)

ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА:

(От пода до горната плоча на седалката с помощта на 24"

основни колела в трета позиция на отвора)



415 mm*

* Чрез промяна на позицията на основните колела е възможно да се постигне височина на седалката от 445 mm. Други височини на седище могат да бъдат достигнати чрез промяна на размерите на колелата и скобите на колелата.

ВИСОЧИНА НА ОБЛЕГАЛКАТА:

515 mm*

* Използването на удължителя на облегалката дава до 610 mm височина на облегалката.



За НетиAdaptProс ширина на седалката 500 mm и повече, общата ширина надвишава препоръчителните 700 mm.

Спецификация	МИН.	МАКС.
Обща дължина с опора за крака – хоризонтална седалка, облегалка и опори за крака вертикални. Максимална дължина: наклон 30 градуса, включително ъгъл за бутане	1280 мм	1600 мм
Обща ширина = седалка с + 232 mm **	582 мм	732 мм
Дължина в сгънато положение – бивши опори за крака	800 мм	800 мм
Ширина в сгънато състояние (отстранени колела)	538 мм	688 мм
Височина в сгънато състояние (премахнати възглавници на колелата, опора за ръце, глава и крака, гръб, сгънат напред)	715 мм	715 мм
Обща маса – всичко включено	55,5 кг	55,5 кг
Масово най-тежката част: рамка	35 кг	38 кг
Масово най-тежкият компонент: опора за крака Grandis	3 кг	4 кг
Статична стабилност надолу	0 °	13 °
Статична стабилност нагоре	0 °	13 °
Статична стабилност настрани	15 °	15 °
Безопасен наклон, използвайте антисамосвал	0 °	7 °
Ъгъл на равнината на седалката	– 3°	30 °
Ефективна дълбочина на седалката	355 мм	505 мм
Ефективна ширина на седалката	350 мм	500 мм
Височина на повърхността на седалката при предното 24° основно колело (макс. с промяна на размера на колелото)	415 мм	445 мм
Ъгъл на облегалката	87 °	133 °
Височина на облегалката без възглавница	515 мм	625 мм
Разстояние между дъската и седалката	280 мм	560 мм
Ъгъл на крака към повърхността на седалката	99 °	180 °
Подпора за ръцете до разстоянието на седалката	265 мм	375 мм
Предно разположение на опорната конструкция на ръката	408 мм	450 мм
Диаметър на джантата	540 мм	540 мм
Хоризонтално разположение на осите	– 10 мм	95 мм
Ръчна спирачка Максимален наклон	–	7 °
Минимален радиус на завиване, без опори за крака	R 500 мм	R 560 мм

Модел с 24-инчови основни колела.

Измерено без възглавници.

2. БЪРЗА СПРАВКА

Съдържанието на тази страница е резюме на цялото ръководство. Той ви дава кратко въведение в употребата и грижата за NettiAdaptPro инвалидна количка.



Бързата справка не е заместител на ръководството, а само напомняне/контролен списък.

- Разпаковайте инвалидната количка (Глава 5.1)
- Монтирайте основните колела (Глава 5.3)
- Монтирайте предните колела (Глава 5.3)
- Повдигнете облегалката и монтирайте наклонената газова опора към облегалката с помощта на заключващия болт (Глава 5.5)
- Регулирайте опорите за рамото (Глава 5.7)
- Монтирайте възглавниците (Глава 5.4 и 5.5)
- Монтирайте опорите за крака (Глава 5.9)
- Регулирайте лъка за бутане (Глава 6.6)
- Монтирайте опората за глава (Глава 5.6)
- Аксесоар за монтаж (Вижте глава 5 за повече информация. Регулирайте инвалидната количка към потребителя. Регулирайте дълбочината на седалката и евентуално баланса на инвалидната количка, аксесоара.)
- Ако са монтирани електрически височината на дъската за краката, височината на подлакътника, височината и дълбочината на опората за глава, височината на регулируемата облегалката на стола. Ако са монтирани електрически функции: Свържете батерията и стартирайте електрическите функции.

За повече информация относно адаптирането на инвалидната количка към потребителя, моля, вижте

www.My-Netti.com **ЗНАНИЯ И ИНСТРУМЕНТИ**



За отстраняване на неизправности вижте глава 11. За корекции вижте глави 5.



ANTI-TIP: Задната позиция на анти-наклоните е дефинирана и поставена по отношение на задвижващите колела. Те ще следват задвижващите колела независимо от това кой ъгъл на наклон се използва. Това ще осигури стола от преобръщане назад по всяко време.



Ако се съмнявате – свържете се с вашия дилър!



Карайте внимателно!



Имайте предвид, че триенето срещу натискащите джанти може да създаде топла повърхност.



Повърхностната температура на металните части в конструкцията на рамката може да се повиши при излагане на пряка слънчева светлина.



Солената вода може да увеличи риска от корозия. Не са необходими допълнителни предпазни мерки, свързани с условията на околната среда.



Анти-накрайниците се използват винаги за безопасността на потребителя.



Когато столът е наклонен назад, анти-върховете се преместват автоматично назад, спирачките винаги трябва да се използват, когато оставяте потребителя в наклонена назад позиция.



Уверете се, че сте заключили правилно всички дръжки.



Внимавайте за опасност от прищипване при сгъване и разгъване, накланяне, накланяне и всички други движения за регулиране.



Ако са монтирани електрически функции:
Зареждайте батерията ежедневно.



Ако столът е с пневматични гуми:

Уверете се, че проверявате налягането в гумите всяка седмица и ги напompвайте, за да поддържате 24" при 45 PSI и 7" при 36 PSI.



Никога не заставайте на плочите за крака поради риск от преобръщане напред.



Никога не повдигайте инвалидната количка за опорите за краката, ръцете или главата.



Конфигурацията на продукта може да варира в различните държави.



За хора с увредено зрение наръчници и каталози могат да бъдат изтеглени от www.My-Netti.com

3. ОПИСАНИЕ

1. Опора за главата
2. Възглавница за облегалка – модел Stabile
3. Опора за ръка с подложка
4. Възглавница на седалката
5. Наколенка
6. Потребителска спирачка вдясно
7. Закрепване на корпуса на лагера / предната вилка
8. Бързо освобождаване за предна вилка
9. Предна вилка
10. Предни колела
11. Заклучване на плочата на крака
12. Плочка за крака
13. Опора за прасеца
14. Винт за регулиране на ъгъла
15. Винт за регулиране на височината
16. Скоба за опора на краката
17. Анти-бакшиш
18. User Brake – ръчна спирачка
19. Бързо освобождаваща се ос
20. Плъзгаща джанта
21. Основно колело
22. Табелка с име на инвалидна количка върху
напречна греда в долната част на гърба
23. Освободете дръжката за
опора на ръката
24. Придружаваща задвижваща спирачка
25. Освободете дръжката за бутане на лък
26. Пуш лък
27. Дръжка за височина на опората за главата



Имайте предвид, че спецификациите може да варират в различните страни.




Ако някоя от тези части липсва, моля, свържете се с вашия дилър.



За пълна информация, моля, свържете се с вашия дилър.



Имайте предвид, че илюстрациите и снимките може да се различават от получения продукт.

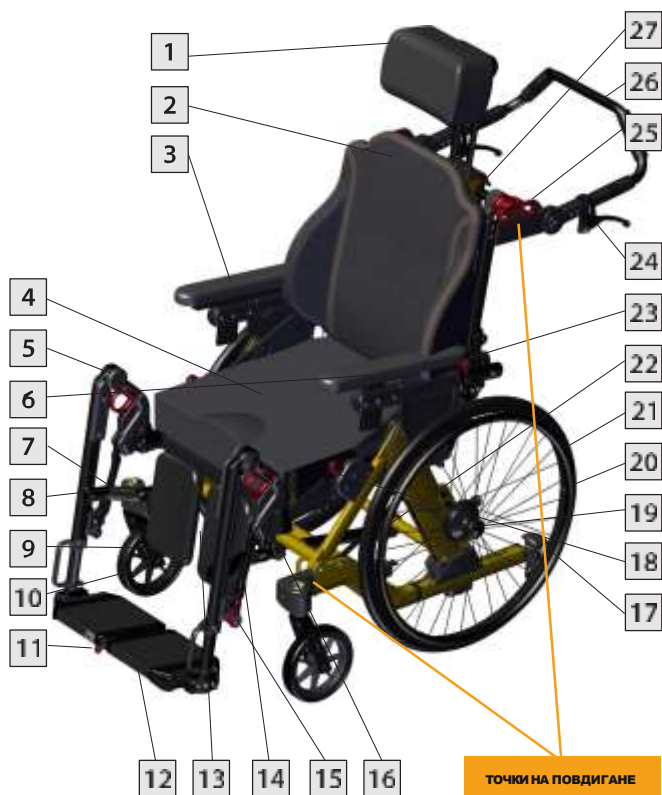

3.1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕТИAdaptProСИСТЕМА

НетиAdaptProe усъвършенствана помощ за придвижване,
включваща патентованото решение на Netti:

- РазширеноAdaptProрамка с голям диапазон на накланяне.

Обхват на накланяне:

Патентованата NettiAdaptProрамката на инвалидна количка позволява широк диапазон на наклон от 3° напред до 30° назад. Иновативната структура на рамката се адаптира към ъгъла на наклона чрез преместване на основните колела назад, като гарантира, че точката на тежестта винаги остава в рамките на отпечатъка на колелата. Това гарантира стабилността на инвалидната количка във всяко наклонено положение. Защитните накрайници следват основните колела и следователно винаги запазват сигурността против накланяне.

Маневреност:

НетиAdaptProима много къса междуосие от 375 mm, когато се използва наклон от 3 ° напред, осигурявайки лесно маневриране в тесни пространства. Междуосието се увеличава до 465 mm, когато столът е наклонен 30 ° назад.

НетиAdaptProe разработен за потребители, нуждаещи се от различни позиции на седене.



30 ° макс. наклон



30 ° макс. наклон – 133° макс. облеганете се



3.2 КАК NETTI*AdaptPro* РАМКОВА РАБОТА

Нети*AdaptPro*frame е патентована рамкова конструкция с иновативни функции за накланяне и накланяне.

Той е разработен като отговор на привидно неблагоприятните искания на потребителите за много голям диапазон на накланяне, без разходи за намалена стабилност и маневреност. Той също така покрива нуждата от ниска височина на седалка за потребители, които използват краката си, за да преместят инвалидната количка чрез спъване.

Решението е рамка на инвалидна количка, която има къс отпечатък от колелата при изправено седене – което позволява много добра маневреност в тясно пространство – като същевременно увеличава отпечатъка веднага щом се използва функцията за накланяне на седалката. Това позволява на центъра на тежестта на стола да остане добре в рамките на отпечатъка на колелата при всяко наклонено положение – което води до много добра стабилност по всяко време.

Като допълнителна функция за безопасност, анти-върховете следват движението назад, когато функцията за накланяне е активирана.

ДИАПАЗОН НА НАКЛОНА:

Патентованата Netti*AdaptPro*рамката на инвалидна количка позволява широк обхват на накланяне. На Нети*AdaptPro* задава се от 3° напред до 30° назад.

ФУНКЦИЯ НАКЛОН:

управлява се от червената дръжка за накланяне от лявата страна на бутацията.

За работа:


- Завъртете дръжката за накланяне към себе си и притиснете щангата за накланяне нагоре или надолу.

Седалката остава наклонена в позицията, в която сте оставили дръжката за накланяне разхлабена.

Дръжката за накланяне управлява 2 накланящи се газови бутилки, разположени под рамката на седалката. Чрез кабели за управление на боудън. 2-те газови бутилки работят едновременно.

Кабелът за накланяне от дръжката за накланяне отива към разделена кутия, разположена на рамката. От сплит кутията се задействат 2 проводника – по един към всеки цилиндър.

Регулиране на цилиндъра за накланяне вижте глава 5.6.

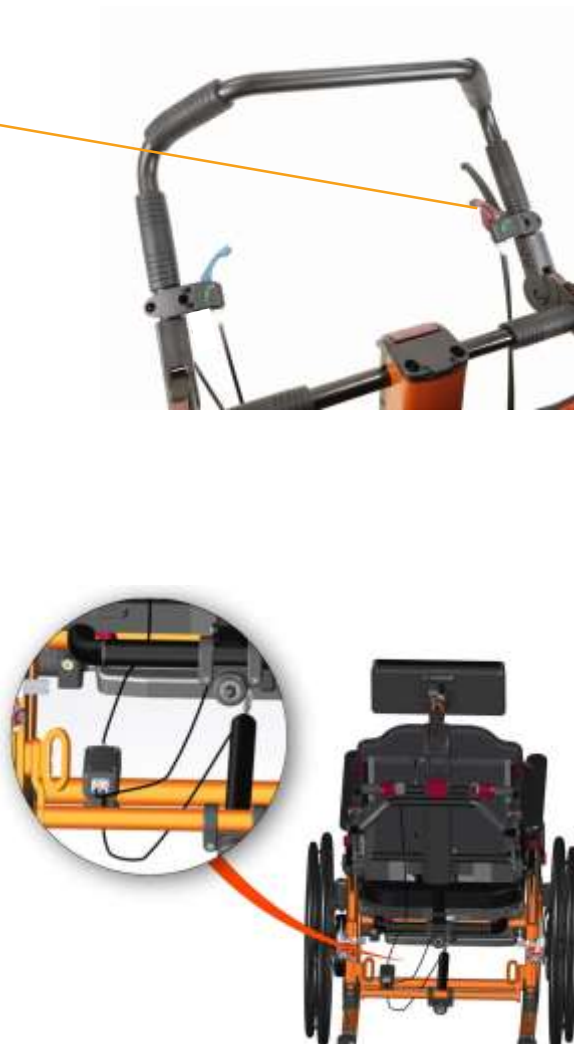

ФУНКЦИЯТА ЗА ЛЕЖАНЕ:

се управлява от синята дръжка за накланяне от дясната страна на лъка за бутане.

Облегалката на стола може да се накланя и заключва във всякакъв ъгъл.



За работа:

Издърпайте синята ръкохватка за накланяне към вас и притиснете щангата, за да наклоните гърба нагоре или надолу.

Гърбът остава наклонен в позицията, в която сте оставили дръжката за накланяне хлабава.

**Регулиране на накланяне / динамични
газови бутилки вижте глава 5.6.**

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА NETTIAdaptPro

СТАНДАРТ

СЕДАЛКА

- Възглавница Netti Sit Възглавница с добро разпределение на натиска
- Наклон – 3° до + 30°
- Регулируема височина от 415 мм до 445 мм чрез промяна на размера и позицията на колелото
- Регулируема дълбочина от 355 – 505 мм

КОЛЕЛА*

- 24" x 1" PU основни колела с бързо освобождаваща се ос и барабанна спирачка
- Бутаща джанта: Алюминиева
- 7" устойчиви на пробиване предни колелца с бързо освобождаваща се ос

Стандартните основни колела може да се различават в различните страни.

* **Напрегна греда за повишена стабилност на рамката.**

ПУШ ЛЪК

- Регулируема на височина, люлееща се

СПИРАЧКИ

- Спирачки за обслужване и Барабани потребител

АНТИ-БАКШИШ

- Автоматично следване на основната позиция на колелото SW 300 – 400 ниско против преобръщане, 450 – 500 високо против преобръщане

ОБЛЕГАЛКА – NETTI SMART

- Ъгъл: 86° – 133°
- Височина: 500мм
- Удължение на облегалката, интегрирано в гърба (вижте глава 5)
- Възглавница за облегалката с интегрирана лумбална опора и странична опора, регулируема по височина

ОПОРА ЗА КРАКА

- Регулируеми под ъгъл Grandis опори за крака, люлеещи се, подвижни

- Регулируеми по височина и ъгъл плочи за крака

- Подпори за прасци и тапицерия за коленете

ОПОРА ЗА РЪКАТА

- Регулируема височина
- За въртете се

- Регулируеми на дълбочина подложки

ОПЦИИ / АКСЕСОАРИ

СЕДАЛКА

- Подноси и стойка за четене на подноси (вижте глава 5)
- Тазобедрени колани и колани с 4 точкови колани (вижте глава 5)
- Абдукционен блок

КОЛЕЛА

- 16" устойчиви на пробиване колела с барабанна спирачка и удължител на рамката с регулиране на височината
- Пневматични предни колела (вижте глава 5)
- Предпазители за спии (вижте глава 5)
- Разширител на рамката – повишена стабилност
- Страничен стабилизатор
- Бутащи джанти (вижте глава 5)

ОБЛЕГАЛКА

- Възглавници за облегалка – различни модели
- Корекция на страничната опора
- Безплатен заден цилиндър, Evoflex
- Стойка за закрепване на Н-колан
- Тазов стабилизатор

ОПОРИ ЗА КРАКАТА

- Регулируеми ъгъл
- Грандис
- Универсала опора за крака
- Динамични опори за крака (вижте глава 5)
- Немеі подлакътник и Немеі възглавница (вижте глава 5)

ОПОРИ ЗА ГЛАВА NETTI

- Регулиране на височина, дълбочина и ъгъл – няколко модела
- Подвижен
- Динамична функция на динамична опора за глава

4.1 АКЕСОАРИ



Актуализираната по всяко време пълна програма за аксесоари се намира на нашата уеб страница www.My-Netti.com



Не всички аксесоари са налични за всички конфигурации на инвалидни колички.

Моля, проверете началната страница или попитайте отдела за обслужване на клиенти за допълнителни подробности.

КОЛАНИ

Няколко модела:
Колани за бедрата с или без тапицерия и с пластмасова брава или брава за кола.



И-ОБРАЗНА СТОЙКА ЗА ПРИКРЕТЯВАНЕ НА КОЛАН

Да се монтира върху скоби за носещи дъги.



ТАВИ

3 модела:

Въртяща се, заключваща се и стандартна „натискане“. Да се използва внимателно, тъй като масата следва подложките за ръце, които се люлеят с облегалката на стола.



ТАПИЦЕРИЯ ЗА ТАВА

Предлага мека основа за ръката, лежаща върху подноса.



КЛИН

Увеличава страничната опора.



ЛУМБАЛНА ОПОРА

Увеличава лумбалната кривина.



БЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ОБЛЕГАЛКАТА

Много за избор. Моля, свържете се с вашия дилър.



БЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЕДАЛКИ

Много за избор. Моля, свържете се с вашия дилър.



ОПОРИ ЗА КРАКА:

Регулируем ъгъл на Grandis



Фиксиран ъгъл на Grandis

Регулируеми във фиксирани позиции между 33 ° до 105 ° с помощта на шестостепенен ключ.



Удължител Grandis Необходим за монтаж на всякакви опори за крака Grandis.



Универсална опора за крака



Регулируема под ъгъл опора за крака



АБДУКЦИОНЕН БЛОК


Блокът намалява
отвличане.

малък:	80 мм	ширина
Среден	110 мм	ширина
Голям:	140 мм	ширина




ОПОРИ ЗА ГЛАВА


Поддръжка А Предлага се и
странична опора с
каишка за чело

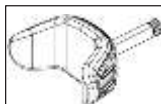


Поддръжка Б Малък

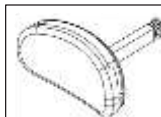

Поддръжка С Големи

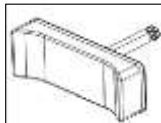

Подкрепете D комфорт
разпределение на налягането

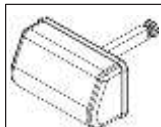

Подкрепете E Регулируема
странични опори



Подкрепете F лента за поддържане на
бузите/брадичката



Подкрепете Relaxo



ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ГЛАВА

400 x 400 мм възглавница с
пълнеж Kospoflex и гума.



ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ГЛАВА КОМФОРТ

Възглавница с Kospoflex
пълнеж за издържане върху
облегалката за глава.



ХИГИЕННО ПОКРИВАЛО

Защитава сърцевината на
опората за главата.



ХЕМИ ВЪЗГЛАВНИЦА

По-сговорчив
опора, отколкото опората за
хеми ръка.



ПОДЛОЖКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЪКАТА

Ширина: 385 x 58 mm



КОРЕКЦИЯ НА СТРАНИЧНАТА ОПОРА

Предназначен за коригиране на
неблагоприятни пози

в горната част на багажника.



СТРАНИЧНА ОПОРА СТАБИЛ

ДЪСКА ЗА КРАКА СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ

Опорите за крака могат да се люлеят настрани като стандартен крак

поддържа.



ПРОТЕКТОРИ ЗА СПИЦИ

За 24".

Черно или прозрачно е по избор.



ТАПИЦЕРИЯ ЗА ТЕЛЕ ОПОРА

Намалява налягането.



БУТАЦИ ДЖАНТИ

Алуминий: 24"

Фрикционна натискаща джанта 24"



РАМКА НАПРЪЧНА ЛЕНА

Повишена странична стабилност

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ



ОСНОВНИ КОЛЕЛА

налични в размери:

16" с барабанна спирачка 24" с барабанна спирачка. Устойчив на пробиване Flexel или PU.



Колело удължител на рамката 60 мм задна позиция за основните 24" колела.



Колело удължител на рамката за регулиране назад и височина 16" основни колела

ПРЕДНИ КОЛЕЛА / КОЛЕЛА

налични в размери: 7"



5. СГЛОБЯВАНЕ И НАСТРОЙКА



5.1 РАЗОПАКОВАНЕ

(Вижте глава 5 и 6 за подробности относно монтажа)

1. Разопакувайте всички части и проверете дали всичко е доставено според опаковъчния списък.
2. Монтирайте главните колела и предните колела.
3. Монтирайте облегалката, опорите за ръцете, възглавниците и опорите за краката.
4. Монтирайте аксесоари.

Тегло на компонентите (450 мм ширина на стола):

Задвижващи колела:	1,7 кг всеки
Предни колела:	0,9 кг всеки
Опора за крака Grandis отляво:	2,8 кг
Опора за крака Grandis отдясно:	2,1 кг
Netti Smart Back:	1,4 кг
Нети Сит:	1,0 кг



Под всяка глава са описани необходимите инструменти.



Аксесоарите, описани в глава 4, са представяне на опции и ще бъдат доставени с отделни описания за монтаж.



Когато регулирането на седалките и колелата се извършва във възможните позиции чрез стандартно оборудване, настройките няма да надхвърлят безопасните граници.

5.2 ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – ПРЕГЛЕД


Започнете с потребителя, който седи в нормално изправено положение.

РЕГУЛИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА – БАЛАНСИРАНЕ НА СТОЛ

Важно е да регулирате правилно седалката.

Настройките на седалката променят центъра на тежестта, което влияе върху баланса на инвалидната количка.

Правилно регулираната седалка осигурява стабилност и възможност за маневриране на инвалидната количка, дори при максимално разтягане на динамичните части на количката.

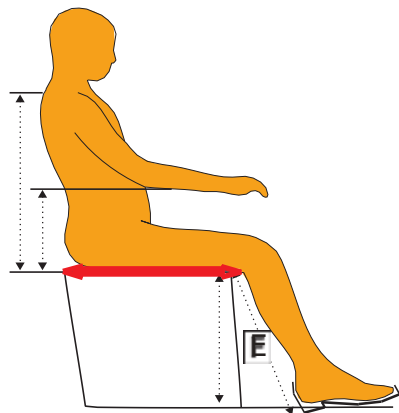

Правилна дълбочина на седалката

зависи от дължината на бедрото на потребителя и се измерва в седнало положение – вижте червената хоризонтална стрелка на илюстрацията.

- Дълбочината на седалката може да се регулира на облегалката на стола чрез преместване на облегалките, последвано от регулиране на позицията на цилиндъра на облегалката.
- Дълбочината на седалката може да се регулира в средата на стола чрез удължаване или скъсяване на седалката.
- Дълбочината на седалката може да се регулира отпред чрез регулиране на позицията за предната част на седалката.

Удължителите, където са монтирани опорите за крака, могат допълнително да бъдат позиционирани по-напред за регулиране към неравномерни дълги крака.



Връзката между ъгъла на седалката и ъгъла на облегалката трябва да се поддържа постоянна, когато функцията за накланяне се използва за създаване на вариация за потребителя.

- Височината на седалката трябва да се гледа заедно с опорите за краката и позициите на колелата.
- Опорите за краката трябва да се регулират, за да отговарят на височината на седалката.



Моля, обърнете внимание: настройките на опората за крака Netti са описани подробно в глава 5.10.



Моля, вижте чертежите на следващата страница относно регулирането на дълбочината на седалката.

5.3 СГЛЮБЯВАНЕ НА КОЛЕЛА

5.3.1 ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА

За да монтирате задвижващото колело, отстранете болта за бързо освобождаване от втулката на главината, прекарайте го през центъра на основното колело и във втулката на главината, докато натискате копчето в центъра на втулката за бързо освобождаване.



Пясъкът и морската вода (солта, използвана за пясъчинки през зимата) могат да повредят лагерите на основните колела. Почистете инвалидната количка старателно след излагане.

Налични са следните джанти: 16" и 24". Изборът на размер на основното колело и позиция в конзолата на колелото позволява характеристики на шофиране – самостоятелно шофиране или съпътстващо шофиране и регулиране на височината на седалката. И 24-инчовите, и 16-инчовите колела имат барабанны спирачки.



Изборът на размер и позиция на колелото изисква регулиране на ъгъла на стеблото на предното колело.



За да проверите дали задвижващото колело е правилно закрепено към главината, махнете пръста от централното копче и издърпайте основното колело.



Ако задвижващото колело не блокира, вижте глава 5.3.6 и регулирайте. Ако все още не се заключва, не използвайте инвалидната количка, а се свържете с вашия търговец.

5.3.2 ПРЕДНА ВИЛКА

Предните вилки се предлагат стандартно с оси за бързо освобождаване. Предната вилка се отстранява лесно чрез натискане на бутона за бързо освобождаване в горната част на корпуса на лагера.

5.3.3 ПРЕДНИ КОЛЕЛА

Премахване

- Натиснете бутона за освобождаване в горната част на корпуса на лагера на предната вилка – като натиснете върху силиконовата капачка, покриваща бутона за освобождаване.

Монтаж

- Вкарайте оста за бързо освобождаване в корпуса на лагера и в предната вилка.
- Издърпайте леко вилицата, за да сте сигурни, че вилицата е напълно заключена.



Пясъкът и морската вода (солта, използвана за пясъчинки през зимата) могат да повредят лагерите на предните колела. Почистете инвалидната количка старателно след излагане.



5.3.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ЛАГЕРА НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛЛО

Позицията на лагера на предните колела може да се регулира, променяйки разстоянието между предните колела и основните колела.

Макс. обхватът на регулиране е 75 мм.

- Отстранете капачите над удължителната тръба на корпуса на лагера на предното колело.
- Развийте 2-та винта, държащи удължителната тръба отдолу.
- Позиция на желаната дълбочина на корпуса на лагера на предното колело.




Уверете се, че и двата вертикални винта са захванати в удължителната тръба.

- Затегнете здраво вертикалните главни винтове.
- Сменете капачите.

Ако дълбочината е увеличена, имате нужда от един чифт допълнителни капаци. Ако дълбочината е намалена, имате един резервен чифт капаци.

- Повторете от другата страна.

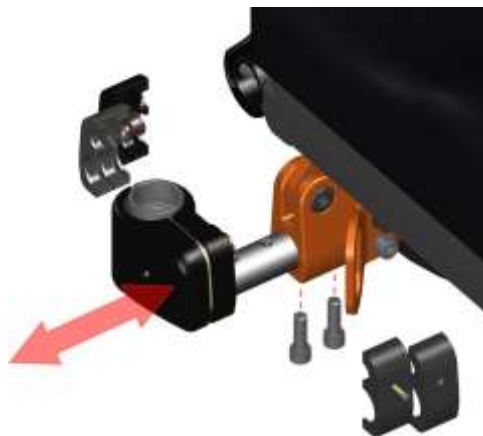

5.3.5 ПРАВИЛЕН ЪГЪЛ НА РАМКАТА

За да осигурите добри характеристики на шофиране, трябва да проверите и регулирате – с монтирани задвижващи колела и предни колела – дали долната рамка е хоризонтална, а корпусът на лагера на предното колело е вертикален.

Вижте пунктираните червени линии.



РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА ЛАГЕРА:

- Развийте винта в предната част на капака на корпуса на лагера и свалете капака.
- Разхлабете 2-те винта, затягащи корпуса на лагера, и преместете корпуса на лагера нагоре или надолу, докато стане под ъгъл от 90 градуса спрямо равната земя, когато инвалидната количка стои на всичките си 4 колела.
- Ако е необходимо, за да направите корпуса на лагера по-лесен за преместване, можете леко да завиете средния винт навътре. Това ще отвори затягането на корпуса на лагера и ще улесни регулирането на височината.

• Преди това завийте фиксиращия винт навън.

• Затягане на 2-те затягащи винта на корпуса на лагера.

• Сменете капака.




Повторете от другата страна.



Проверете ъгъла на корпуса на колелцата.

1. Препоръчителен ъгъл 5 mm.

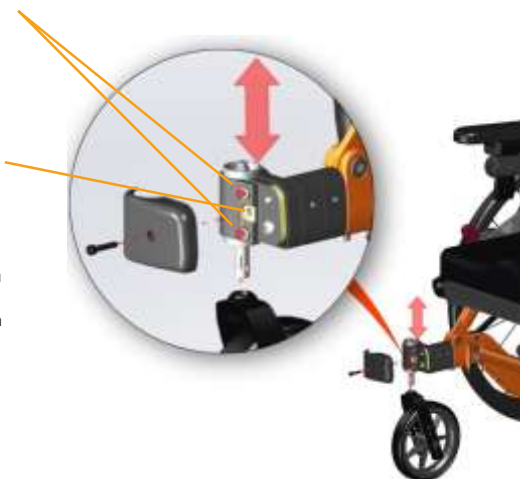

5.3.6 БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОСНОВНОТО КОЛЕЛО

Оста за бързо освобождаване свързва колелото и рамката. Гайката, разположена под главата на оста за бързо освобождаване, може да се регулира, за да пасне плътно на оста, когато се постави в рамката.

Регулирайте гайката назад към главата на оста, ако оста не щракне.

Регулирайте гайката напред, ако оста е разхлабена, когато е поставена през колелото и спиращката.



5.3.7 РЕГУЛИРАНЕ НА БАРАБАННАТА СПИРАЧКА

Инвалидната количка е оборудвана с ръчно задвижвани барабани спирачки.

Ако спирачката не спира правилно:

Регулирайте телта от едната или от двете страни, регулирайте крачния винт 2 – 4 кръга. След това проверете отново спирачките.

Ако жицата е твърде разхлабена:

Регулирайте винта на крака докрай. Затегнете жицата, като разхлабите скобата, преди да издърпате жицата още повече през нея. Затегнете телената скоба и регулирайте крачния винт отново



1 бр. гаечен ключ 10 мм.



За да се гарантира правилното функциониране на телта, те никога не трябва да са опънати.

5.3.8 РАБОТА НА СПИРАЧКИТЕ

Работа и задействане на съпътстващата спирачка

Инвалидната количка е снабдена с ръчно задвижвани спирачни дръжки на главината за барабанните спирачки, за да се позволи регулиране на скоростта по хълмовете и по време на движение. Те се намират на лъка за натискане.

- За да задействате спирачките, дръпнете спирачните лостове (1) равномерно и плавно към дръжката и спрете инвалидната количка.
- Ръчната спирачка е в същото време спирачката на потребителя.



Задействане и задействане на потребителската спирачка / спирачката за паркиране

Инвалидната количка е снабдена с ръчно управлявана спирачка за паркиране, по една от всяка страна. Потребителската спирачка активира същата барабанна спирачка като съпътстващата спирачка.

- За да активирате ръчната спирачка: натиснете дръжките от двете страни, напред.
- За да освободите спирачките: повдигнете дръжките нагоре.



Потребителските спирачки не могат да се използват като работни спирачки.



Не оставяйте потребителя в инвалидната количка, без да активирате ръчната спирачка.

5.4 СГЛОбЯВАНЕ НА СЕДАЛКАТА – ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА НА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

Изборът на височината на седалката е комбинация от идентифицираното предназначение (утрояване или само шофиране) и размера на потребителя (дължина на крака).

1. ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – ПОЗИЦИИ НА КОЛЕПАТА

Височината на седалката зависи от:

- **Размерът на главни задвижващи колела.**
- **Позицията на задвижващите колела в скобите на основните колела на рамката.**

Вижте долната илюстрация на следващата страница.

- **Размер на предни колела.**
- **Позиция на предните колела в предната вилка.**
- **Размер на предната вилка.**
- **Височина на предната вилка в корпуса на лагера на предната вилка.**

Чрез репозициониране на основните колела в скобите има 2 налични височини на седалката; започвайки от височина на седалката 417 mm с 24" основни колела, можете да увеличите височината на седалката до 447 mm.

5.4.2 ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА ОТЗАД

Височината на седалката отзад зависи от:

- **Размер на основните колела.**
- **Позиция на основните колела.**

ОСНОВНО КОЛЕЛО:

Разхлабете втулката на главината, включително шайбата и гайката, и я монтирайте в необходимата позиция в скобата на основното колело. Дисковата спирачка трябва да бъде позиционирана в отвора по-ниско от втулката на колелото.



2 бр. гаечен ключ 24 мм.



Уверете се, че гайката от вътрешната страна на рамката завива напълно втулката на колелото.



Когато се променя височината на седалката, уверете се, че лагерната кутия на предните колелца е регулирана вертикално спрямо земята.



Рискът от преобръщане се увеличава, когато основното колело се премести напред в конзолата на основното колело.



Проверете позицията на предпазителя.



Регулирайте отново спирачките (вижте глава 5.3.6).



TheAdaptPro рамката е снабдена с анти-върхове, които автоматично следват позицията на основните колела. Анти-накрайниците се доставят регулирани според поръчания размер на основното колело и стандартна позиция.

УДЪЛЖИТЕЛ НА ОСНОВНОТО КОЛЕЛО:

Потребителите с големи модели на движение назад могат да се възползват от увеличения отпечатък на колелата за още по-голяма първоначална стабилност.

Предлагат се скоби за удължаване на колелата, които могат да бъдат монтирани към основната скоба на колелото – разширявайки отпечатъка между междусието с 60 mm.

- главината на колелото. Свалете



- удължителя на мястото му. Монтирайте

1 бр 16 мм и
1 бр. гаечен ключ 17 мм.

- Монтирайте главината на колелото към удължителя.



Винаги проверявайте височината на защитата срещу преобръщане. Може да се наложи да добавите удължител към колелото против преобръщане, за да получите желаното разстояние от земята – около 30 mm.

5.4.3 ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА ОТПРЕД

Височината на седалката отпред зависи от:

- Размер на предните колела.
- Размер на предната вилка.
- В глава 4.2 прегледът показва, че можете да избирате между 2 модела предни колела 6" и 7" (стандартни) и предни вилки.
- За да промените височината на предните колела – разхлабете колелото от предната вилка и поставете оста ѝ в желаната позиция.



2 бр. гаечен ключ 13 мм.



Винаги проверявайте и регулирайте ъгъла на корпуса на лагера на предната вилка след смяна на модела и/или позицията на предното колело.

Вижте глава 5.3.5.



5.4.4 НЕТТИ СЕДАЛКА

Плочата за сядане Netti Seat е усъвършенствана платформа за сядане, разработена, за да осигури на хората дълго седнало положение, подобрен комфорт и намаляване на проблемите при сядане.

- По-ниската повърхност под зоната на седалищната кост позволява намален натиск под седалищната кост.
- Скосеният ръб от долната към по-високата зона на седалката осигурява ограничител на плъзгане за сеящата кост, намалявайки плъзгането.
- Възможността за регулиране на дълбочината на седалищната плоча позволява правилното позициониране на освобождаващата налягане спусната зона и осигурява добра опора под бедрата.
- Перфорираната повърхност позволява вентилация – намалена влажност.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА:

Дълбочината на седалката може да се регулира в няколко позиции и на 3 различни места:

- Отзад чрез преместване на пантата на облегалката – 2 позиции.
- В средата на плочата на седалката – като издърпате задната част на плочата на стола, удължавайки самата плоча на седалката.
- Отпред чрез промяна на позицията на седалката в рамката на седалката.

В допълнение, удължителите за опора за крака могат да бъдат преместени напред, стърчащи в предната част на седалката.

Извършват се корекции, за да се даде на потребителя удобна позиция за сядане с подходяща лумбална опора, докато колянната става е подравнена с колянната става на опората за крака и за да се гарантира, че сеящите кости са правилно поставени върху плочата на седалката.

Чрез регулиране на дълбочината на седалката балансът на стола и характеристиките на шофиране могат да се променят. Добре балансираният стол се управлява лесно, без лесно да се накланя назад.



Моля, направете внимателна оценка на това как да се направят най-благоприятните настройки на дълбочината на седалката, за да се поддържа добър баланс в инвалидната количка.

Когато е необходимо регулиране на дълбочината на седалката, позицията на седалната плоча също трябва да се регулира, за да се осигури добра лумбална опора и същевременно да се запази подравняването на колянната става на опората за крака с колянната става на потребителя.

Дълбочината на седалката се доставя стандартно, като се следва ширината на седалката, както е показано в таблицата.

Ширина на стола	Дълбочина на седалката стандартен	Дълбочина на седалката диапазон
350 мм	380 мм*	380 – 455 мм
380 мм	405 мм*	380 – 455 мм
400 мм	405 мм	380 – 455 мм
430 мм	455 мм	430 – 505 мм
450 мм	480 мм	430 – 505 мм

* С преместен гръб с 25 мм напред.

5.4.5 ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – РЕГУЛИРАНЕ ОТЗАД

Регулиране на дълбочината на седалката отзад чрез преместване на задната шарнирна точка:


Пантата на облегалката има 2 възможни позиции с 25 mm разстояние между тях, което позволява преместване на облегалката и по този начин промяна на дълбочината на седалката – това е промяна на разстоянието от предната част на седалката до облегалката на стола.

- Разхлабете винтовете на пантите от двете страни и фиксирайте гърба в желаната позиция.



2 бр. Шестограмен ключ 6 mm.

Регулирайте позицията на задния цилиндър, след като задната панта бъде преместена.

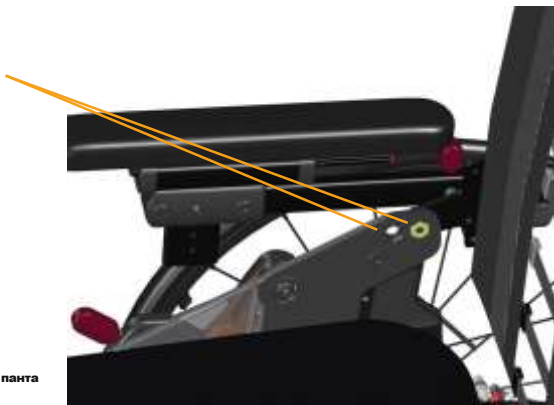

5.4.6 ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА СЕДАЛКАТА В СРЕДАТА НА СЕДАЛКАТА

Наклонете седалката много високо, за да получите достъп до винта от страни, както е показано на илюстрацията.

Дълбочината на седалката се регулира чрез премахване на дългия фиксиращ болт, преминаващ през седалката, и издърпване или натискане на задната част на седалката до желаната дълбочина.




2 бр. Шестограмен ключ 5 мм.

СКАЛА ЗА ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА:

Скалата на табелата на седалката показва коя дълбочина на седалката е избрана.

Когато облегалката е преместена в предна позиция, дълбочината на седалката е с 25 мм по-къса от това, което показва скалата.

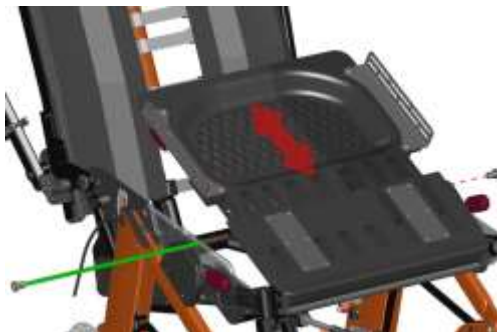

5.4.7 ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЕДАЛКАТА ОТПРЕД

Дълбочината на седалката може да се регулира чрез издърпване на задната половина назад, както е описано в предишната глава.

Когато дълбочината на седалката е променена, нейната позиция върху рамката на седалката трябва да се регулира, за да се гарантира, че седалката пасва правилно. Задната част на плочата на седалката трябва да се отнася до велкро лепенката на гърба.

ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЕДАЛКАТА:



- Наклонете инвалидната количка възможно най-назад, за да получите достъп до страничната част на рамката на седалката
- Отстранете предната платнена защита, като развиете винта, който се намира под капака.
- Отстранете задния комплект от 2 винта (от всяка страна), показани в зелено.
- Издърпайте седалката с удължения за опора за крака и фиксирайте, когато се достигне желаната предна позиция на седалката.



1 бр. Шестограмен ключ 5 мм.



С помощта на велкро ремъците за регулиране в облегалката на стола можете да увеличите няколко mm на дълбочина.

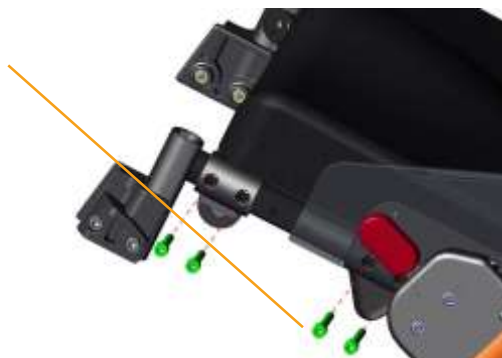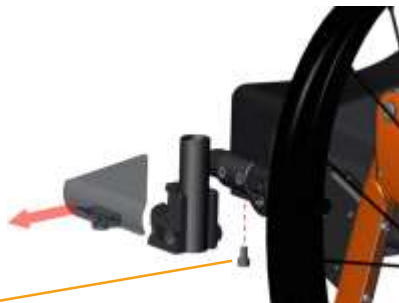



Регулиращите удължители на опората за крака позволяват регулиране на коленните стави, които не са подравнени с колянната става на опората за крака.

- Отстранете предната платнена защита, като развийте винта, който се намира под капака.
- Разхлабете 4-те винта, държащи удължителя за опората за крака.
- Поставете удължителя в желаната позиция.
- Фиксирайте винтовете, затегнете ги с 25 Nm.

От неспокойни потребители удължителят не трябва да се регулира на повече от 50 mm.



Чрез поставяне на удължителите на различни позиции е възможно да се компенсира завъртян



таз или различна дължина на бедрата.
1 бр. Шестограмен ключ 5 mm.



5.4.8 ФИКСИРАНА СЕДАЛКА

Плочата на седалката се заключва със скоби под плочата на седалката отзад.

Когато регулирате дължината на плочата на седалката, е необходимо да я разхлабите чрез разхлабване на скобите. Завъртете седалката нагоре, за да получите достъп до винтовете за промяна на дължината на седалката, както е показано в глава 5.4.6.

5.5 Сглобяване и позициониране на облегалката на стола

ЗА МОНТИРАНЕ НА ГАЗОВАТА ПРУЖИНА ЗА ЛЕЖАНЕ:

- Повдигнете облегалката за бутачката ъ дъга с една ръка,
- Поставете заключващата глава на газова пружина в покритата стоманена скоба, която се намира на долната напречна греда отзад.
- Закрепете облегалката, като натиснете заключващия болт отстрани през скобата и заключващата глава на газова пружина.



За да проверите дали облегалката е заключена, хванете дъгата за бутане и натиснете облегалката напред.



Ако облегалката падне напред – повторете процедурата за заключване или се свържете с вашия дилър.



1. РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕЛКРО ГРЪБ

- Разхлабете презрамките и поставете възглавницата на облегалката, така че потребителят да има място за дъното и интегрираната лумбална опора в правилна позиция.
- Затегнете презрамките така, че да следват извивката на гръбнака и да осигурят малко допълнителна опора в горната част на сакрума.



ПОДМЯНА НА ВЕЛКРО ГРЪБ:

В случай, че велкро гърба трябва да бъде сменен, удължителят на гърба трябва да бъде премахнат – вижте 5.5.3 на следващата страница.

- Отстранете горната капачка на задния профил.
- Разхлабете фиксиращия винт M4 x 8 mm, който държи велкрото – поставено от горната вътрешна страна на задната тръба.
- Плъзнете велкрото нагоре и навън от задния профил.
- Монтирайте новото велкро, като го плъзнете – с пластмасови пръти – в профилите на облегалката на стола.
- Поставете фиксиращия винт, за да държите велкрото на място във височина.
- Монтирайте разширителя на гърба.



5.5.2 ПОСТАВЯНЕ НА ПОДПОРНА ВЪЗГЛАВНИЦА

Възглавницата за опора на гърба се фиксира и регулира върху инвалидната количка с помощта на велкро за гърба.



Наложително е правилно да настроите седалката и възглавниците за гърба, за да осигурите добър комфорт при седене.



Калъфите за възглавници могат да се перат и по този начин могат да се използват многократно. Следвайте инструкциите на гърба на възглавницата за правилно поддръжка и пране на възглавницата.



5.5.3 УГЪЛЖИТЕЛ ЗА ГЪРБ

Височината на гърба на НетиAdaptPro е 510 мм, измерено от плочата на седалката до горната част на облегалката с велкро. За потребители, по-високи от около 1,85 м, може да е изгодно да имат по-висок гръб за по-добра опора около областта на раменете.

НетиAdaptPro е подготвен за разширител на гърба, позволяващ увеличаване на височината на гърба с до 115 мм. Поръчва се като аксесоар.

Удължителят на облегалката се монтира чрез фиксиране на профилите на удължителя на облегалката към вътрешната страна на тръбите на облегалката на стола с 2 броя винтове от всяка страна.

Регулиране на височината на удължителя на гърба:

- Разхлабете леко винтовете и плъзнете удължителните профили до желаната височина, затегнете добре.



1 бр. Шестограмен ключ 5 мм.



5.6. ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ОПОРЕН ЦИЛИНДЪР ЗА ГЪРБ

Позицията на облегалката на стола се определя от цилиндъра на облегалката на стола. Има различни мощности на цилиндрите за *NettiAdaptPro*:

ИНДИКАТИВЕН корелация между телесното тегло и подходящата сила на газовата пружина при накланяне:

450 N газова бутилка – 65 kg тегло на потребителя

600 N газова бутилка – 80 kg тегло на потребителя.

Моля, свържете се с вашия дилър, ако имате нужда от друга сила.

1. СМЯНА НА НАКЛОНЕН ГАЗОВ ЦИЛИНДЪР

- Отстранете възглавницата на гърба и сгънете опорите за ръцете.

- Свалете шината на задния цилиндър.

- Сгънете облегалката на стола напред.



- Отстранете задния капак на цилиндъра, като развиете 4-те винта – показани в зелено на илюстрацията.



1 бр. Шестограмен ключ 3 мм.

- Разкачете кабелите, прикрепени към главата на цилиндъра.

- Отстранете цилиндъра, като го развиете от главата на цилиндъра.



- Сменете цилиндъра с нов – с подходяща здравина за потребителя.
- Монтирайте всички части, които са били премахнати.
- Регулирайте проводниците.
- Сгънете облегалката на стола и проверете дали решението отговаря на силата на потребителя и върнете потребителя обратно в изправено положение, когато движението му/нейното разгъване приключи.



- Сгънете облегалката на стола и я фиксирайте с болта.
- Тествайте дали здравината на новия газов цилиндър отговаря на силата на потребителя и е достатъчно здрава, за да върне спокойно потребителя обратно в изправено положение, когато движението му/нейното разтягане приключи.



5.6.2 СМЯНА НА НАКЛОНЕНА ГАЗОВА БУТИЛКА

НетиAdaptProe оборудван с 2 наклонящи се газови бутилки.
Горният цилиндър е този, който поема голямо натоварване.
Долната е опора за горния цилиндър. И двата цилиндъра
могат лесно да бъдат заменени по същия начин:

- Развийте 2-те винта М5, държащи скобата на задната газова бутилка, и натиснете 2-те U-образни скоби настрана.



1 бр. Шестограмен ключ 4 мм.

- Сгънете газова бутилка надолу.
- Развийте главите на газовите бутилки от двата края на газова бутилка.
- Сменете газовия цилиндър и обърнете операцията.




7. СГЛОБЯВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОПОРА ЗА ГЛАВА NETTI

1. ОПОРИ ЗА ГЛАВА NETTI

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ:

- За да монтирате опората за глава Netti, повдигнете червената дръжка отгоре на задния газов цилиндър.
- Поставете 2-те опорни пръта за главата в горната част.
- Фиксирайте на желана височина, като натиснете дръжката надолу.

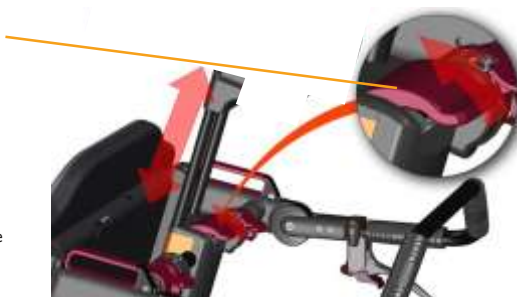


РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА НА ОПОРАТА ЗА ГЛАВА:

Средата на възглавницата за опора на главата трябва да бъде разположена така, че да отговаря на главата малко по-ниско от най-задната част на главата.

- Отворете дръжката, държаща 2 вертикални стълбове на опората за глава.
- Издърпайте опората за глава нагоре или надолу до желаната височина и затворете дръжката, като натиснете надолу.
- Пластмасова правоъгълна запушалка е монтирана към вертикалните пръти, за да ви помогне да намерите същата височина всеки път, когато сменят опората за глава.

Когато се определи правилната височина, натиснете ограничителя надолу, докато срещне горната част на кутията на газовата бутилка. Фиксирайте го, като затегнете винтовете, които го държат в позиция към 2 вертикални ленти.

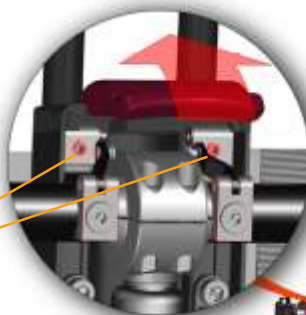

РЕГУЛИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА:

Основната дръжка може да се регулира, за да запази стегнатостта си, като поддържа стабилна опората за главата.

- Свалете капака на газовата бутилка, за да получите достъп до 2-та винта, показани на снимката.
- Затегнете или разхлабете според необходимостта.



5.7.2 РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРАТА ЗА ГЛАВА NETTI DYNAMIC

Нети*AdaptPro* може да бъде оборудван с динамична опора за глава Netti. Опората за главата следва движението на главата назад, когато главата е притисната към нея.

Малък цилиндър смекчава движението и връща главата в нормално положение след екстензия.



РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНА:

- Отключете двата червени лоста, по един от всяка страна на хоризонталната тръба за опора на главата.
- Преместете опората за глава напред или назад до желаната позиция.
- Фиксирайте здраво двата лоста.

5.7.3 NETTI PUSH BOW ЗАТЯГАНЕ

Бутащата дъга може да започне да губи позицията си, след като столът е бил използван известно време. След това трябва да се затегне механизмът за задържане на лъка.

- Разхлупете фиксиращия винт M4
- Затегнете винта M5, разположен отдолу
- Сгънете дръжката надолу и проверете дали не е по-трудно да се работи.
- Затегнете фиксиращия винт.

- Повторете от другата страна, ако е необходимо.

- Тествайте дали бутаният лък вече задържа позицията си, когато се борави с него.



1 бр. Шестограмен ключ 2 мм

1 бр. Шестограмен ключ 4 мм.



8. РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРИ ЗА РЪКАТА

1. ВИСОЧИНА НА ОПОРИ ЗА РЪКАТА – ОТПРЕД

Регулирайте височината на опората за ръката, за да пасне на потребителя. Височината трябва да осигурява добра опора под мишниците, без да повдигате рамото. Налични са 4 позиции на височина с 18 мм разстояние между всяка.

- Развийте и поставете опората за ръката на правилната височина за потребителя.



1 бр. Шестограмен ключ 5 мм.



5.8.2 ВИСОЧИНА НА ОПОРИ ЗА РЪКАТА – ОТЗАД

Ако настройките в предната част на опората за ръката не ви осигуряват достатъчна височина, моля, преместете опората за ръката в задния край.

Предлагат се 2 височини с 58 мм разстояние.

- Развийте и поставете опората за ръката на желаната височина.
- От новата позиция за опора на задната ръка могат да се извършват фина настройки отпред.



1 бр. Шестограмен ключ 6 мм.



5.8.3 БОРАВЕНЕ С ОПОРИ ЗА РЪКАТА

Опората за ръката е шарнирно закрепена към опорната рамка на гърба на инвалидната количка. За да остане стабилен, когато се използва, ключалката го фиксира в хоризонтално положение.

Ключалката лесно се избутва леко назад и опората за ръката може да се завърти нагоре.

При сгъване опората за ръката се заключва сама.



Когато опората за ръката е завъртяна нагоре, има свободно място за странично преместване.

С опорите за ръце, завъртени нагоре, има добър достъп за поставяне на платна и т.н. зад гърба на потребителя.



Винаги заключвайте спирачките, когато планирате действия и завъртете опората за ръката нагоре.

5.9 КОЛАНИ И КОЛАНИ

МОНТИРАНЕ, ПОЗИЦИОНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ТАЗОВИТЕ ОПОРИ И ПОДПОРНИТЕ КОЛАНИ:

НетиAdaptPro е подготвен за монтиране на няколко различни типа тазови стабилизатори и поддържащи колани, като всеки тип е разработен, за да предостави на потребителя най-добрата опора за стабилизиране в зависимост от условията.

НАЛИЧНИ КОЛАНИ И КОЛАНИ:

- зов стабилизатор Та
- лани за горната част на тялото Ко
- егръдки за глезена Пр
- рпуси за обувки Ко

СТАБИЛИЗАТОР НА ТАЗА:

Монтиран към плочата на седалката, помага на потребителя да запази позицията си на седалката, дори когато той / тя седи доста неспокоен.



КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ СТАБИЛИЗАТОРА НА ТАЗА:

Тазовият стабилизатор е монтиран върху фиксиращите скоби на колана върху седалката, както е показано на илюстрацията.

- Плъзнете тазовия стабилизатор до позиция, в която пресича горната част на бедрата, ъгъл: 70 – 90 градуса.
- Нагласете стабилизатора на таза/точката за монтиране на колана, за да затегнете колана.
- Не забравяйте да скъсите стабилизатора под последния използван отвор, за да избегнете конфликт с рамката на стола.



Винаги трябва да се използва колан за стабилизиране на таза, когато се използва колан за горната част на тялото.

Седалката е подготвена с монтажни халки в задния си край за фиксиране на 2-та задни колана на 4-точковия тазов стабилизатор.

Н-КОЛАН ЗА КОЛАНИ ЗА ГОРНАТА ЧАСТ НА ТЯЛОТО:

Релсата за колани за горната част на тялото е монтирана към профилите на облегалката чрез отделни скоби. Вижте отделно описание на монтажа за коланите за горната част на тялото на: www.bodypoint.com



ПРЕГРЪДНИЦИ ЗА ГЛЕЗЕНИТЕ И ЧАПКИ ЗА ОБУВКИ:

Помога да се задържат краката върху дъската за крака, като не им позволява да се плъзгат по време на употреба.

Прегръдките за глезени се монтират, като се прокарат през прорезите в дъската за крака на опората за крака и се фиксира коланът от долната страна на пластината за крака, резбата е показана на илюстрацията – следвайте номерата.





КОЛАНИ И КОЛАНИ за Netti Dynamic System	СТАТИЯ НОМЕР	ОПИСАНИЕ	СНИМКИ
КОЛАНИ / СТАБИЛИЗАТОРИ			
Тазов стабилизатор Evoflex M	82788	Среден	
Тазов стабилизатор Evoflex L	82789	Голям	
4-точков колан с подплата M	45013	Среден	
4-точков колан с подплата L	45014	Голям	
СПРЯГИ			
Опора за гърди Stayflex без цип	45015	Среден	
Опора за гърди Stayflex без цип	45016	Голям	
Колан през рамо Pivotfit M	45017	Среден универсал	
Колан през рамо Pivotfit L	45018	Голям универсал	
ДОЛНИ КРАЙНИЦИ			
Подложка за поддържане на прасъц	45019	Среден	
Подложка за поддържане на прасъц	45020	Голям	
Ankle-Huggers S	44863	Малък 170 - 200 мм	
Глезени-Huggers M	44864	Среден 190 - 230 мм	
Ankle-Huggers L	44865	Голям 220 - 290 мм	
Глезени Huggers XL	44904	Изключително голям 280 - 330 мм	

За пълен и актуализиран преглед,
моля, вижте нашата начална страница


— продуктов
каталог
— www.My-Netti.com

5.10 ОПОРИ ЗА КРАКАТА

Netti AdaptPro се доставя стандартно с опори за крака Netti Grandis.

Столът може да бъде оборудван и със следните алтернативни опори за крака:

- Подпора за крака Grandis
- Универсална опора за крака
- Стандартна опора за краката с регулируем ъгъл
- ДВОЙНИ динамични опори за крака
- Опора за крак при ампутация.

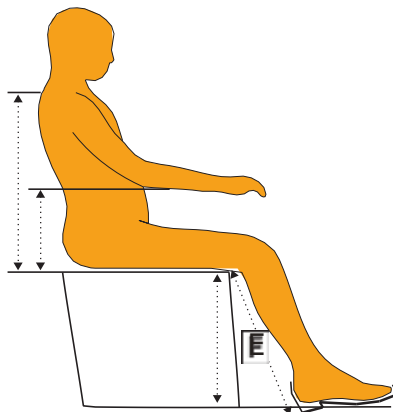

5.10.1 РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА И ДЪЛЖИНА НА ОПОРАТА ЗА КРАКАТА

Регулирането на опората за краката става в 2 посоки. Първото регулиране е височината на дъската за крака, а второто регулиране на дълбочината на седалката. Целта е колянната става за опора на крака и колянната става на потребителя да са подравнени по една и съща ос.

Измерете дължината на долната част на крака на потребителя F – свито на 90 градуса коляно – измерете от долната страна на бедрото до долната страна на петата на нормална използвана обувка.

Колянната става на опората за крака може да бъде скрита под тапицерията на коляното. Регулирайте височината на дъската за крака според измерената дължина на подбедрицата.



Уверете се, че има достатъчно свободно пространство под дъската, за да може инвалидната количка да премине през малки препятствия.

Лекото накланяне на седалката може да помогне. Ако не е достатъчна, височината на стола трябва да се регулира, както е описано в това ръководство за потребителя, глава 5.3.



ПРАВИЛНА ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА:
Регулирайте седалката и позицията, както е описано в глава 5.4.

5.10.2 ОПОРИ ЗА КРАКА GRANDIS



Опорите за крака Grandis изискват удължителни скоби за опора за крака Grandis.

Опората за крака Grandis е с регулируем ъгъл – от вертикално до хоризонтално положение.

- Може да се люлее и сваля.
- Регулира се по височина и се предлага с регулируема по височина и дълбочина опора за прасеца.
- Плочите за крака са шарнирни и могат да бъдат наклонени във фиксирани позиции.

Като стандарт плочите за крака се доставят с ключалка, свързваща 2-те плочи. Това прави плочите по-здрави и намалява поддръжката. Ако не е необходимо заключване, резето на ключалката може да се отстрани с помощта на шестостенен ключ.

МОНТИРАНЕ НА ОПОРА ЗА КРАКА GRANDIS:

- Сгънете плочите за крака нагоре.
- Хванете опората за крака на горната става и поставете вертикалния болт във фиксиращата скоба на опората за крака на инвалидната количка, леко обърнат навън.
- Завъртете опората за крака навътре и я натиснете леко надолу, докато щракне в заключена позиция.



РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛ GRANDIS:


За да регулирате ъгъла на опората за краката, просто освободете червения лост и го повдигнете или спуснете. Опората за крака ще остане в позицията, в която сте заключили лоста.



РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКА GRANDIS:

Плочите за крака са безстепенно регулируеми по височина.

- Разхлабете регулирания винт, за да може регулиращата лента да се движи свободно.
- Плъзнете плочата за крака до необходимата височина, след което затегнете добре винта.

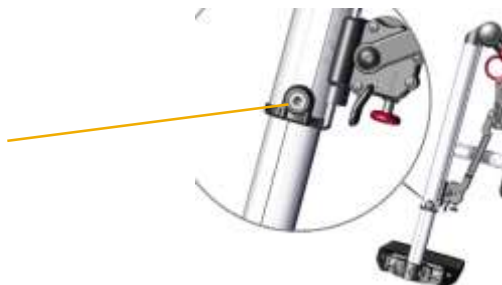

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКА GRANDIS:

- Развийте 2-та винта, както е показано по-долу, като използвате 5 мм шестограмен ключ.
- Регулирайте плочата за крака на необходимия ъгъл и затегнете винтовете.



РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКА GRANDIS:

- Развийте напълно 2-та винта, както е показано по-долу, като използвате 5 mm шестограмен ключ.
- Издърпайте плочата за крака и разхлабете следващите 2 винта, които са станали видими.
- Плъзнете плочата за крака напред или назад до желаната дълбочина, преди да фиксирате отново всички винтове.



ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЧИТЕ ЗА КРАКАТА:

- Плочите за крака се доставят с ключалка, свързваща 2-те плочи за крака, което прави плочите по-здрави.
- За да заключите плочите за крака, оставете дясната плоча за крака да падне и да покрие болта, излизащ от левия, той щраква в ключалката.
- За да освободите плочата за крака, натиснете пластмасовото копче под дясната плоча за крака и повдигнете дясната плоча за крака нагоре.



Докато извършвате настройката, не трябва да има натоварване върху плочите за крака.



За използване на открито трябва да има разстояние от 40 – 50 mm между плочата за крака и земята.



Когато регулирате ъгъла на опора на краката, имайте предвид опасността от притискане между движещите се части.

ПРЕМАХВАНЕ НА ОПОРАТА ЗА КРАКА GRANDIS:

- Освободете плочата за крака, като натиснете червеното пластмасово копче под дясната плоча за крака и повдигнете дясната плоча за крака нагоре.
- Издърпайте червената кръгла ръкохватка отгоре на опората за крака и повдигнете опората нагоре, докато я завъртате леко навън.



РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРАТА ЗА ПРАСЕЦА GRANDIS:

Опората за прасеца се регулира на височина и дълбочина и трябва да се регулира на височина и дълбочина, които предотвратяват плъзгането на краката от плочата за крака.

За стол с ширина 43 – 60 см, където се използва високата версия на опора за прасеца, има възможност за конфликт с петата или седалката, когато опората за крака е регулирана за къса дължина на крака.

За да коригирате **височина**, разхлабете винта на опорната скоба за прасеца и я плъзнете в желаната позиция, преди да фиксирате винта.



Уверете се, че регулирате опората за прасеца, така че да не влиза в конфликт със седалката или плочите за крака.

За да се настроите **дълбочина** на подложката за прасеца, разхлабете винта, държащ опората за прасеца, и го плъзнете до желаната позиция, преди да фиксирате винта отново.



Шестограмен ключ 5 мм.



5.10.3 ФИКСИРАНИ ОПОРИ ЗА КРАКА GRANDIS



Фиксираните опори за крака Grandis изискват удължителни скоби за опора за крака Grandis.


МОНТАЖНА ОПОРА ЗА КРАКА GRANDIS FIXED:

- Сгънете плочите за крака нагоре.
- Хванете опората за крака във вертикалния профил и поставете закрепващия болт в издърпващата част на опората за крака Grandis под ъгъл навън.
- Завъртете опората за крака навътре и я натиснете леко надолу, докато влезе в заключена позиция.

ЗА ДА ПРЕМАХНЕТЕ ОПОРАТА ЗА КРАКА:

- Хванете около вертикалния профил и по този начин ръката ви повдига червения заключващ лост.
- Повдигнете и обърнете навън.

Фиксираната опора за крака Grandis може да се достави и с плоча за крака – поръчва се допълнително.

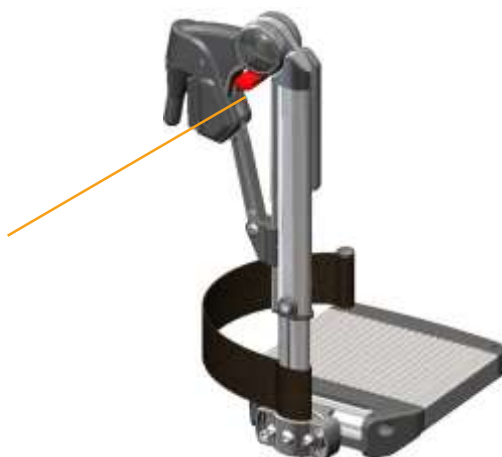

РЕГУЛИРАНЕ НА ФИКСИРАНА ОПОРА ЗА КРАКА GRANDIS:

РЕГУЛИРАНЕ НА ФИКСИРАНЪГЪЛ:

- Разхлабете винта от външната страна на вертикалния профил.
- Завъртете опората за крака до желания ъгъл, преди да я затегнете и фиксирате.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКАТА:

- Разхлабете винта от външната страна на вертикалния профил.
- Преместете плочата за крака (или дъската за крака) на желаната височина, преди да затегнете и фиксирате.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА ПЛОЧКАТА НА КРАКАТА:

- Разхлабете 2-те винта от външната страна на плочата за крака и завъртете до желания ъгъл, преди да фиксирате.
- Подробности са показани също в глава 5.10.2.



Шестограмен ключ 5 мм.



Никога не стойте върху плочите за крака!



Никога не повдигайте инвалидната количка за опорите за краката.

5.10.4 ОПОРИ ЗА КРАКАТА С РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛ

Регулируемите под ъгъл опори за крака са люлеещи се, регулируеми по височина и подвижни. Предлагат се с регулируеми на височина и дълбочина опори за прасци. Плочите за крака са шарнирни и могат да бъдат наклонени във фиксирани позиции.

Плочите за крака се предлагат с ключалка, свързваща 2-те плочи, което прави плочите по-здрави. Ако не е необходимо заключване, болтът може да се отстрани с помощта на шестостенен ключ без загуба на функционалност.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОПОРА ЗА КРАКА С РЕГУЛИРУЕМ НА ЪГЪЛ:

- Сгънете плочите за крака нагоре.
- Хванете опората за крака на горната става и я поставете в скобата за опора за крака на инвалидната количка под ъгъл навън, както е показано на снимката.
- Завъртете опората за крака навътре и я натиснете леко надолу, докато влезе в заключена позиция.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА:

- Разхлабете звездообразното колело от външната страна на опората за крака.
- Повдигнете долната част на опората за крака до необходимия ъгъл.
- Затегнете звездообразното колело.



Имайте предвид опасността от притискане между движещите се части.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКАТА:

Плочите за крака са стъпаловидно регулируеми по височина.

- Развийте регулиращия винт, така че регулиращата лента да се движи свободно.
- Плъзнете плочата за крака до необходимата височина.
- **Затегнете винта.**



Като аксесоар винтът може да се замени със звездообразно копче или ръкохватка.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА ПЛОЧКАТА НА КРАКАТА:

- Разхлабете винта от външната страна на плочата за крака – виж снимката – с шестостенен ключ.
- Наклонете плочата за крака до желания ъгъл и затегнете винта.



Шестограмен ключ 5 мм.



ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЧИТЕ ЗА КРАКАТА:

- За да заключите плочите за крака, оставете дясната плоча за крака да падне върху болта, излизащ от левия, той щраква в ключалката.
- За да освободите плочата за крака, дръпнете пластмасовата ключалка между плочите за крака и повдигнете дясната плоча за крака нагоре.



Докато извършвате настройката, не трябва да има натоварване върху плочите за крака.



За използване на открито трябва да има разстояние от 40 – 50 mm между плочата за крака и земята.



Никога не заставайте на плочите за крака поради риск от преобръщане напред.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРАТА ЗА ПЛЕЦЕЦА:

Опорите за прасеца се регулират на височина и дълбочина. Опорите за прасеца трябва да се регулират на височина и дълбочина, които предотвратяват плъзгането на краката от плочата за крака.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА:

Разхлабете гайката **А** върху опорната скоба за прасеца и я плъзнете в желаната позиция, преди да фиксирате винта.



Гаечен ключ 10 мм.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНА:

Разхлабете винта **Б** между опората за прасеца и скобата и го преместете в желаната позиция, преди да фиксирате винта.



Шестограмен ключ 13 мм.



Никога не стойте върху плочите за крака!



Никога не повдигайте инвалидната количка за опорите за краката.

ПРЕМАХВАНЕ НА ОПОРАТА ЗА КРАКА:

- Ако има заключване на плочата за крака, освободете плочата за крака, като издърпате червената пластмасова ключалка между плочите за крака.
- Повдигнете десния крак нагоре.
- Повдигнете опората за крака в колянната става леко нагоре.
- Завъртете го навън.
- Повдигнете го.



5.10.5 NETTI ДВОЙНИ ОПОРИ ЗА КРАКА

NETTI DYNAMIC DUAL ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НЕТИAdaptPro може да се достави с Netti DUAL Dynamic опора за крака.

Netti Dynamic Dual опора за крака е специално проектирана за потребители, бутачи с неравномерна сила с долните си крайници, осигурявайки отворена кинетична верига.

Едностранно разгъване на бедрото (лявата или дясната част на опората за крака се спуска надолу).

Газовите бутилки работят независимо и позволяват опорите за краката да се удължават по различен начин – наклоняйки дъската за крака настрани и също така я наклоняват напред.

Това множество възможни гъвкави движения – дава на потребителя свобода да извършва доброволни и неволни движения на краката в много висока степен.

Когато силите на разтягане се намалят, газовите бутилки леко връщат стъпалата и краката обратно към

първоначална позиция.

Износването на инвалидната количка е по същество намалено, тъй като приложените сили са sorbed от над газовите бутилки и гъвкавата система.



ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД:

Двойните опори за крака Netti Dynamic позволяват контролирани движения с отворена кинетична верига (оКС) на долните крайници на потребителя. За разлика от статичните инвалидни колички, дисталните сегменти на потребителя се поддържат, но могат да се движат. Това помага да се постигне контрол върху проксималните сегменти, особено когато потребителят не може да възпрепятства движенията поради медицинското си състояние.

Системата Netti Dynamic опора за крака DUAL позволява динамично:

- Плантарна флексия на стъпалата (подложката за крака се завърта напред).
- Едностранно удължаване на тазобедрената става (опората за един крак се спуска надолу).
- Удължаване на коляното: (опорите за крака се движат напред).


Когато тонусът намалее, долните крайници се връщат в неутрално положение.



Двойната опора за крака Netti Dynamic се предлага в 2 различни дължини.

Netti Dynamic Dual**кратко** Дължините за опора на краката са подходящи за хора с дължина на долната част на крака от около 350 mm до приблизително 450 mm (измерено, когато коленете са свити на 90 °, от под бедрото до под петата – включително нормални обувки).

Netti Dynamic Dual**нормално** Дължините на опората за крака са подходящи за хора с дължина на долната част на крака 450 – 550 mm подбедрици.

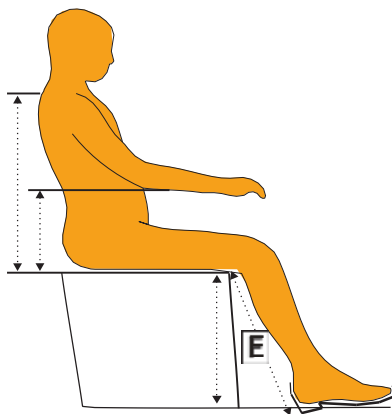

ДВОЙНА ОПОРА ЗА КРАКАТА

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА И ДЪЛЖИНА:

Регулирането на опората за краката става в 2 посоки. Първото регулиране е височината на дъската за крака, а второто регулиране на дълбочината на седалката. Целта е колянната става на опората за крака и колянната става на потребителя да са подравнени по една и съща ос.

Измерете дължината на долната част на крака на потребителя F – свито на 90 градуса коляно – измерете от долната страна на бедрото до долната страна на петата на нормална използвана обувка.

Централната става на опората за крака е скрита под тапицерията на колянната става. Илюстрацията с отстранена тапицерия показва центъра на колянната става на опората за крака, която трябва да бъде на същата ос като колянната става на потребителя. Регулирайте височината на дъската за крака според измерената дължина на подбедрицата.



NETTI DYNAMIC DUAL

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КРАКАТА:

- Разхлабете винтовете М6, държащи дължината на опорния профил за крака от външната страна с 5 mm шестограмен ключ.
- Регулирайте подножието на височина от горния ръб на предната възглавница на седалката до подножието, равна на дължината на подбедрицата – размер F.



1 бр. Шестограмен ключ 5 mm.



Уверете се, че има достатъчно свободно пространство под дъската за краката, за да може инвалидната количка да премине през малки препятствия. Лекото накланяне на седалката може да помогне. Ако не е достатъчна, височината на стола трябва да се регулира, както е описано в това ръководство за потребителя, глава 5.4.





ПРАВИЛНА ДЪЛБОЧИНА НА СЕДАЛКАТА:
Регулирайте седалката и позицията,
както е описано в глава 5.4.4.

Разхлабете велкро лентите на опората за гърба. Оставете потребителя да седне на инвалидната количка – с монтирани възглавници. Проверете дали потребителят се качва здраво на стола.

Регулирайте опората за гърба, като издърпате лентите на велкромто. Коленете на потребителя трябва да са подравнени със ставата на опората за краката както на височина, така и на дълбочина.

Това ще гарантира, че потребителят получава добра опора за гърба и разпределение на натиска под бедрата.

Удължителите позволяват корекции за различни дължини на краката.

ДВОЙНИ ОПОРИ ЗА ПРАСЕЦА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА И ДЪЛБОЧИНА:

Когато и двете опори за крака са на правилна височина, опорите за прасеца трябва да се регулират.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА:


Разхлабете двата винта М6 с 5 mm шестограмен ключ – върху скобите на полумесеца – като държите рамото на подложката за прасеца. Това позволява на рамото с опорна подложка за прасеца да се движи нагоре и надолу. Опорите за прасеца трябва освен да поддържат прасеца, да помагат и за предотвратяване на плъзгането на краката назад от дъската за крака.

Изберете височина, покриваща средната и долната част на прасеца на потребителя и затегнете винтовете.

Завъртете подложките на прасеца до ъгъл, осигуряващ опора за крака, когато опората за крака е под ъгъл. Подложките за прасеца могат да се люлеят свободно, за да следват движенията и да се приспособят към позицията на краката на потребителя.



1 бр. Шестограмен ключ 5 мм.

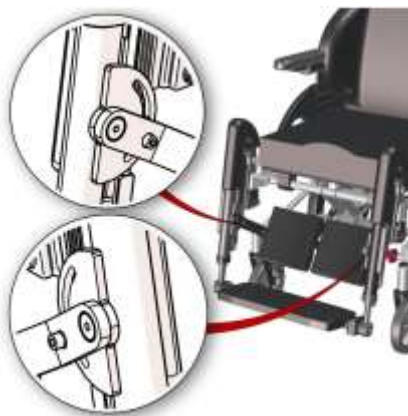

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНА:

Разхлабете винта М8, който държи подложката за прасеца на рамото на подложката за прасеца с 2 бр. 13 мм гаечен ключ и плъзнете подложката за прасеца навътре или навън до желаната дълбочина – подложката за прасеца едва докосва прасеца, докато краката стоят в средата на дъската за крака.

Освен че поддържат прасеца, те трябва да помагат и за предотвратяване на плъзгането на краката назад от дъската за крака.



2 бр. гаечен ключ 13 мм.



ДВОЙНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА КРАКАТА:

Разхлабете винта M8 на лявата дъска за крака с шестостенен ключ 6 mm. Това позволява на дъската за крака да се Изберете Тейт. ъгъл на дъската за крака, за да се приспособите към ъгъла на краката на потребителя. Фиксирайте винтовете здраво, така че Д дъската за крака да не се движи.



1 бр. Шестограмен ключ 6 mm.



Двойната дъска за крака все още позволява известно завъртане напред, за да се огъва, когато потребителят изпълне краката си.



Смазване на профила на плъзгащата дължина с бял вазелин е важно, за да се осигури безпроблемна работа на система Netti Dynamic опори за крака Dual.



5.10.6 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДВОЙНАТА ОПОРА ЗА КРАКА NETTI DYNAMIC

Копчетата с червена звезда позволяват заключване на динамичното повдигане на опорната плоча за крака.

За динамичното използване на системата Netti Dynamic (ОК-С), това трябва да се държи свободно, за да може колянната става да се движи (движение ОК-С за колянната става).

Може да се наложи заключване на опората за крака, ако внезапното разтягане може да накара опорите за крака да ударят хора или околните. Изисква се и ако инвалидната количка се използва като седалка в кола.



5.10.7 КОРЕКЦИИ ЗА РАЗЛИЧНИ ДЪЛЖИНИ НА КРАКАТА

ЕДНОСТРАННО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА КРАКАТА:

При неравна дължина на крака или позиция на крака: опората за крака и дълбочината на дъската за крака могат да се регулират, за да компенсират това чрез използването на удължители и удължителна скоба на дясната опора за крака.


Удължителят се изтегля напред и се фиксира с необходимата дължина от страната, където кракът е по-дълъг. Опората за крака седи в удължителя и следователно също се премества напред.



За да може дъската за крака да падне в ключалката на дъската за крака след едностранно регулиране на удължителя, дъската за крака трябва да бъде репозиционирана.

Заклучването на дъската за крака се отстранява от профила на дължината, където обикновено се намира – и се монтира към удължителната скоба.

Удължителната скоба се монтира към профила по дължината, където е била разположена бравата.

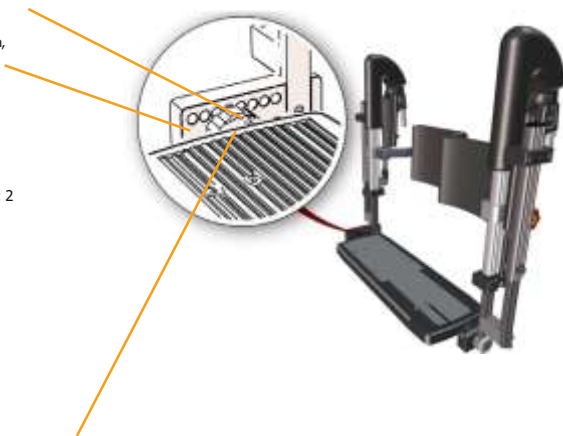

Фиксирайте удължителната скоба на дъската за крака с 2 винта М6 с 5 mm шестограмен ключ през профила по дължина в

2 ядки.



1 бр. Шестограмен ключ 5 mm.


Фиксирайте ключалката на дъската с един винт М8 с шестостенен ключ 6 mm.



1 бр. Шестограмен ключ 6 mm.

Тази снимка показва скобата, достигаща напред, което позволява по-дълъг ляв крак, където опората за десния крак и подложката за пресеца трябва да се движат назад:

– подходящ за потребител с по-къс десен крак.

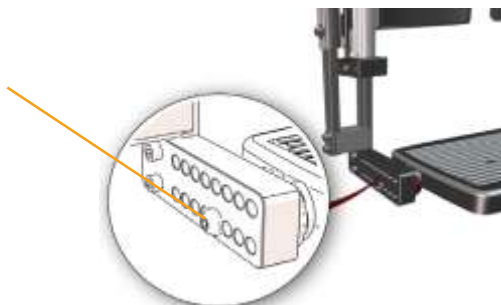

Тази снимка показва скобата, достигаща назад, което позволява по-дълъг десен крак, където опората за десния крак и подложката му за пресеца вървят напред:


– подходящ за потребител с по-дълъг десен крак.



Всички илюстрации за монтаж са показани за Netti Dynamic Parallel.

Процедурата за монтиране на Netti Dynamic Dual е подобна.

Комплект платформа за удължаване за двойна опора за крака: 82940 и 82941.

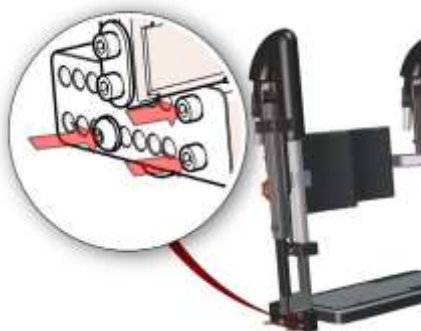

5.10.8 ОПОРА ЗА КРАКА

МОНТИРАНЕ НА АН Д ПРЕМАХВАНЕ

Монтирайте опорите за крака към инвалидна количка. Осигурете отворения ъгъл на опората за крака W вмъкване на кокошка:

Позиционирайте болта вертикално в завъртане на отвора на него на около 30 градуса навън f рамката или лесно влизане. Завъртете го навътре, докато щракне потребителска позиция.



5.10.9 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОЧКАТА ЗА КРАКАТА

Опорите за крака могат да имат плочи за крака, заменени с дъска за крака. С поставени и двете опори за крака, дъската за крака се сгъва надолу в ключалката на опората за крака.

Ключалката се затваря чрез завъртане на външния пръстен 90 градуса напред!



Ключалката на дъската за краката МУ винаги да е затворена, когато столът е зает.

СТ
ЧД



5.11 СТРАНИЧНИ ОПОРИ

Нети*AdaptPro* подготвен за фиксиране на странична опора към задните тръби.

- Сгънете облегалката на стола напред, като освободите щифта.
- Поставете квадратни гайки в задната тръба. В горната част на тръбата има по-широко пространство, където квадратните гайки могат да се поберат в жлеба.
- Фиксирайте страничната опорна скоба към задната тръба, като я завинтите към квадратните гайки, които току-що поставихте.
- Повдигнете гърба и регулирайте позицията на страничната опора, подходяща за потребителя.
- Регулирайте височината, дълбочината и позицията навътре.



Шестограмен ключ 5 мм.



5.12 БЛОК НА АБДУКЦИЯ

Нети*AdaptPro* плочата на седалката е подготвена за монтиране на абдукционен блок към предната ѝ част.

- Завийте абдукционния блок към плочата на седалката в подготвените за това гайки.
- Поставете го в центъра на чинията.




Шестограмен ключ 3 мм.

- Регулирайте височината, за да пасне блокът плътно върху възглавницата на седалката.



Шестограмен ключ 4 мм.

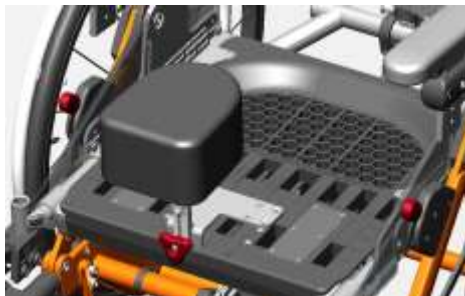

5.13 ОПОРА ЗА БЕДРА

Нети*AdaptPro*седалката е подготвена за монтиране на опора за бедрата към горната ѝ част.

Те са фиксирани подобно на блока за отвличане.

5.14 ТАБЛИЦА



Нети*AdaptPro*може да се монтира с маса. Тъй като опорите за ръцете следват движението на гърба, е необходимо столът да се фиксира в позиция с хоризонтални опори за ръце, когато се използва масата.



Моля, направете потребителска оценка, за да определите дали таблицата е подходяща.



Никога не поставяйте никакви предмети на масата, които могат да причинят повреда или могат да спрат, когато опорите за ръцете не са хоризонтални.

6. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА НА NETTIAdaptPro

Една NettiAdaptPro инвалидната количка е усъвършенствано средство за подпомагане на придвижването. Моля, отделете малко време, за да прочитате това ръководство и да се запознаете с инвалидната количка и всичките й възможности.

Макс. потребителско тегло за NettiAdaptPro: **160 кг.**

След като инвалидната количка е правилно настроена за потребителя, описан в предишните глави, вие като придружител трябва да научите как да използвате функциите за накланяне и накланяне, за да дадете на потребителя най-много предимства на стола.

ЪГЪЛ НА СЕДАЛКАТА – НАКЛОН

Ъгълът на седалката се регулира с дръжката за накланяне отляво на бутачката щанга. Седалката може да се накланя от -3° до $+30^{\circ}$.



За да се предотврати неволно накланяне на седалката от вертикала до 3 градуса напред, е необходима повече сила.



Функцията за накланяне се използва за предоставяне на вариация на позицията на седалката за потребителя.

ЪГЪЛ НА ОБЛЕГАЛКАТА – НАКЛОН

Ъгълът на облегалката се регулира с дръжката за накланяне на дъгата за бутане, вдясно. Ъгълът на наклон може да се регулира от 86° – 133° . Скала върху долната тръба на задния цилиндър показва кой ъгъл на наклон се използва.



Ъгълът на накланяне се регулира от терапевта, за да се приспособи към най-добрата позиция на потребителя.

Винаги се връща към този ъгъл, когато седите в изправено положение.



6.1 КЛЮЧОВИ ДУМИ ОТНОСНО НАКЛЯНА И НАКЛОНА НА КОМФОРТНИТЕ ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Накланянето и накланянето са основните предимства на удобната инвалидна количка. Той позволява различни позиции на седене по време на времето в инвалидната количка, за създаване на правилна позиция, поддържане на стабилност, стимулиране на ADL и защита на кожата.

Прегледахме клиничните доказателства относно накланянето и накланянето и открихме, че има няколко проучвания и насоки за най-добри практики, които предполагат, че последователността на накланяне и накланяне е важна за намаляване на срязването и плъзгането:

При смяна на позиция за почивка с наклон назад първо се наклонете, след това евентуално легнете.

Когато изправите потребителя от позиция на покой, последователността трябва да е обратна; първо коригирайте ъгъла на наклон, а след това наклон.

Най-голямото срязване се предизвиква при изправяне от легнало и наклонено положение.

6.2 НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПЛЪЗЪВАНЕ, СЪРЖАНЕ И РАЗВИ ОТ НАЛЕЖАНИЕ

При изправено нормално седане мускулният тонус на врата и гърба трябва да бъде възможно най-нисък, за да се предотврати плъзгане. Терапевтът ще определи правилния ъгъл на наклон. Промяната на ъгъла на наклон от тази позиция може да наруши правилната позиция на тялото и да причини повишен мускулен тонус на врата.



Ако функцията за накланяне се използва по време на ситуация на преместване или други ситуации, много е важно ъгълът на накланяне да се регулира обратно до правилната, първоначална позиция, когато потребителят се върне в нормална позиция на седене.




Неправилното използване на наклон може да причини загуба на позиция, повишен риск от плъзгане, повишена опасност от разтягане на срязване и рани от налягане.

6.3 ОПЕРАТИВЕН НАКЛОН:

НАКЛАДАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА НА СТОЛА

Задействайте дръжката за накланяне от дясната страна на плъзгащата се дъга и наклонете облегалката на стола. Тя ще спре там, където я пуснете.

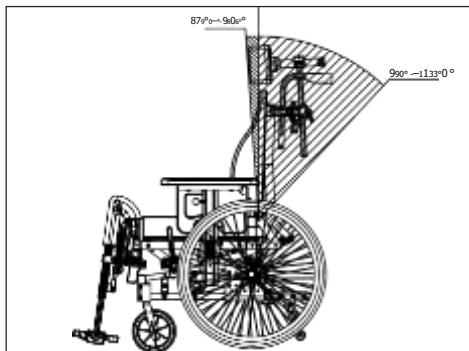


6.4 РАБОТЕН НАКЛОН:

НАКЛАНЯНЕ НА СЕДАЛКАТА

Задействайте дръжката за накланяне от лявата страна на щангата и преместете седалката в желаната позиция. Относителният ъгъл между горната и долната част на тялото остава същият, когато седалката е наклонена.

Скала за накланяне от страни на стола показва кой ъгъл на наклон е избран. Нети*AdaptPro* може да бъде наклонен напред – 3° и наклонен назад + 30°. Наклонена назад седалка може да създаде позиция, намален риск от плъзгане, намалена опасност от срязване и рани от налягане.

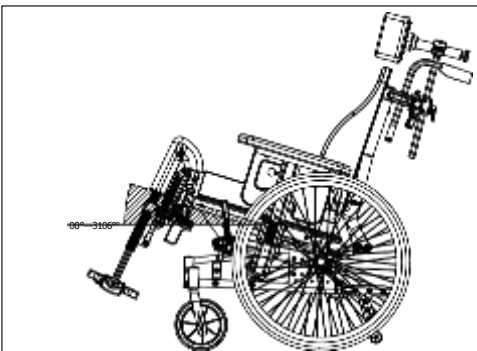

УВЕРЕТЕ СЕ ТЪ А ПОТРЕБИТЕЛЯТ В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НАКЛАНЯНЕ ИЛИ RECLINE АР ЕЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАН:

Моделите с накланяне и функции на всички ръчни операции на накланяне са „едно инвалидна количка Netti“. Това е предимство, при за потребителя: Скоето даващият може да установи очна Контактът и ком комуникация с потребителя, когато забавление с накланяне или накланяне ще бъде използвана. Потребителят могат да се чувстват по-сигурни, е, когато е наклонен или наклонен, докато контактът е поддържан погледът е между служител и потребител.


Наклонена напред седалка brings потребителя в stance позиция, където дейности, за i от таблица или чрез изправяне от инвалидната количка, се поддържа.



Никога не оставяйте потребителя сам, когато седалката е наклонена напред. Потребителят може да се плъзне напред от стола.

6.5 ПРАКТИКУВАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕТИAdaptPro НАКЛОНЕТЕ И ЛЕГНЕТЕ СИСТЕМА КЪМ ЗАЕДНО С

ПОТРЕБИТЕЛ

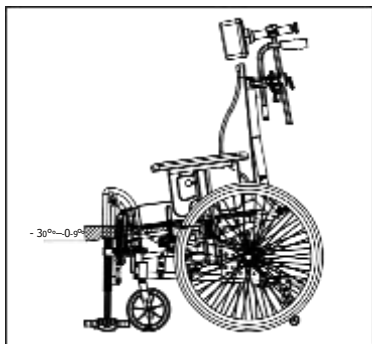

Уверете се, че коланите и коланите са фиксирани по най-добрия начин за потребителя.



Коланът за бедрата често е от полза за потребителя – за запазване на позицията на седене и за безопасност.

Коланите за горната част на тялото могат да бъдат полезни за свързване на потребителя към опората за гърба. Когато използвате горната част на тялото колани винаги първо трябва да се заключва бедреният колан.



Прегръдките за глезена могат да бъдат полезни, като свързват стъпалата с плочата на стъпалото, като помагат за предотвратяването им от плъзгане.

- Практикувайте използването на функцията на накланя гнидата назад и пълното седане и напред, определяйки как преживяване и т потребителят реагира. d да се Накланянето е препоръчително използва за промяна на наклона места за седане, л назад за почивка - ails. виж страница 91 за дет

- Упражнявайте се да използвате decline функция чрез промяна на . Това подменника само за задния е полезно, когато използвате ъгъл, за да прехвърлите потребител в и извън стола. прав Моля, върнете се към кор ъгъл на наклон след прехвърляне.



6.6 ТРАНСФЕР ДО И ОТ ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

Техниките за преместване на/от инвалидната количка трябва да се практикуват добре с участващите лица.

Някои важни съвети за подготовката на стола:

- Инвалидната количка трябва да бъде поставена възможно най-близо до дестинацията на трансфера.
- Уверете се, че спирачките на инвалидната количка са задействани, за да не се търкаля.
- Отстранете опората за крака.
- Завъртете опората за ръката отстрани на трансфера.
- В крайна сметка отстранете опората за главата.

6.7 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВИСКАТЕЛ ЗА ПАЦИЕНТ

- Уверете се, че спирачките на инвалидната количка са задействани, за да не се търкаля.
- Наклонете стола леко назад.
- Отстранете опората за крака.
- Отворете леко опорния ъгъл на гърба, докато държите потребителя и регулирате подемника зад гърба на потребителя.
- Опция: Завъртете опорите за ръце, за да се доближите до пациента и/или премахнете опората за главата.
- Сменете компонентите, когато прехвърлянето приключи.



8. ЕЖДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛЯ

1. БУТАЩ ЛЪК

Бутацият лък лесно се завърта нагоре или надолу по всяко време, което позволява добър контрол над инвалидната количка в различните позиции.

За безопасно маневриране на инвалидната количка и предотвратяване на наранявания на придружителя, лъкът за бутане трябва да се регулира според височината на ръцете на придружителя, когато лакътят е в **90** градусов ъгъл.

Отворете **2** дръжки, държащи лъка за бутане и го завъртете до желаната височина, преди да ги фиксирате, като ги натиснете надолу.

Бутацият лък може да се върти нагоре или надолу с всеки таймер, намалявайки дължината на инвалидната количка.



Моля, обърнете внимание: Ако дъгата за бутане започне да се плъзга надолу по време на употреба, **2-те** дръжки, държащи дъгата за бутане, трябва да бъдат затегнати. Вижте инструкциите на стр. 54.

6.8.2 АНТИТИПС

NettiAdaptPro има анти-съвети, за да осигури безопасна и стабилна инвалидна количка по всяко време. Те са предварително монтирани и следват позицията на основните колела, като гарантират, че функцията против преобръщане е активна по всяко време.

Анти-наклоните имат педал за тропане, който се използва за накланяне на инвалидната количка назад при преминаване на препятствия.

- Стъпете с един крак върху педала за тропане.
- Натиснете лъка за бутане надолу и едновременно с това.
- Наклонете инвалидната количка.



Моля, обърнете внимание: Когато седалката е наклонена назад, задвижващите колела се преместват назад, и предните колела ще бъдат повдигнати по-високо, отколкото при ненаклонена седалка.

6.8.3 СПИРАЧКИ

НетиAdaptProe оборудван с барабани спирачки, които могат да се управляват както със спирачните ръкохватки на бутащата щанга, така и от ръчната / потребителската спирачка пред основните колела.

Спирачните дръжки на дъгата за бутане могат да се използват като спирачки за движение като на велосипед.

ПОТРЕБИТЕЛСКА СПИРАЧКА = РЪЧНА СПИРАЧКА

Натиснете червената дръжка на спирачката напред, за да заключите спирачката от всяка страна на стола.



Винаги използвайте ръчната спирачка, когато инвалидната количка е оставена без придружител. Заключете ръчните спирачки от двете страни.



6.8.4 ОПОРИ ЗА РЪКАТА

Нети*AdaptPro* оборудван с опори за въртящи се рамена.

ЗАКЛЮЧВАНЕ – ОТКЛЮЧВАНЕ

Опорите за ръце са заключени в хоризонтално положение, за да се гарантира, че опората за ръце няма да се завърти неволно.

За да отключите ключалката за опора на ръката:

Натиснете малката червена дръжка близо до лакътя – задния край на опорната подложка за ръката – назад и завъртете опората за ръката нагоре.

Когато потребителят трябва да напусне стола, опората за ръцете може да се завърти настрана. Това прави прехвърлянето много по-лесно.

Моля, вижте илюстрацията на стол с опора за въртящи се ръце.




6.8.5 ОПОРА ЗА ГЛАВА – МОНТИРАНЕ

NettiAdaptPro може да бъде оборудван с Netti Dynamic опора за глава.

Динамичната опора за главата следва движението на врата назад. Това е от полза както за потребители с неволни движения, така и за потребители, които кимат или удрят главата си.

Дълбочината на опората за главата трябва да се регулира така, че едва да докосва задната част на главата на потребителя, когато седи отпуснат.

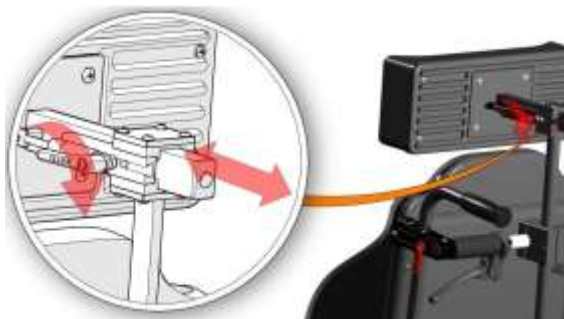

Регулирането на дълбочината на опората за главата трябва да се извърши от терапевта, който регулира инвалидната количка спрямо вас.

МОНТИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА ОПОРА ЗА ГЛАВА

Стойки за глави за NettiAdaptPro лесно се монтират и демонтират:

Отворете ключалката отгоре на задната цилиндрична кутия. Опорите за глава се освобождават и могат да се свалят.

Когато резето е отворено, монтирайте опората за глава, като поставите 2 пръсти за поддръжане на главата в горната част на корпуса на задния цилиндър и затворете резето.

Височината на опората за главата трябва да се регулира така, че да пасва директно зад главата, осигурявайки опора на долната част на черепа.



6.8.6 ОПОРИ ЗА КРАКАТА – МОНТИРАНЕ

ОПОРИ ЗА КРАКА NETTI СЕ МОНТИРАТ ТАКА:

Натиснете вертикално фиксиращия болт на опората за крака в фиксиращата скоба на опората за крака на инвалидната количка – като държите опората за крака леко обърната навън.

Опората за крака ще падне на място и ще се завърти сама.

ЗА ДА ГИ ПРЕМАХНЕТЕ:

Отключете плочата за крака. Издърпайте опората за краката леко нагоре и я завъртете навън, преди да повдигнете и отделяйки го от стола.



6.8.7 ОПОРА ЗА КРАКА ДЪСКА ЗА КРАКА

Опорите за крака Netti Dynamic DUAL са оборудвани с дъска за крака. Той е свързан с лявата опора за крака и се сгъва в заключване на дъската за крака в дясната опора за крака.



ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДЪСКА ЗА КРАКА:

С двете опори за крака на място, оставете f да се от дъска завърти надолу и поставете болта в к, виж локационните снимки вдясно.

Завъртете външния пръстен, за да го заключите.



Винаги заключвайте дъската за крака, когато потребителят седи на стола. Незаклучването може да доведе до повреда на опорите за крака и евентуално до увреждане на потребителя.

6.8.8 ЗАКЛЮЧВАНЕ ДИНАМИЧНО ОПОРИ ЗА КРАКАТА

Ъгълът на опората на Netti Dynamic Dual Leg може да се заключи чрез затягане на червеното колело от външната страна на опорите за крака.

Вижте илюстрацията:

Това спира динамичните движения с изключение на ограниченото въртене на дъската за крака.



Винаги заключвайте динамичната функция на опорите за краката, когато столът се използва като седалка в кола.

6.9 КОЛАНИ И КОЛАНИ

Използвайте колани, тазови стабилизатори и прегръдки за глезени/черупки за обувки, за да осигурите на потребителя необходимата стабилизираща опора.



Винаги използвайте монтираните колани, колани и прегръдки за глезените, за да осигурите потребителя, когато седи в *NettiAdaptPro*.

Нети*AdaptPro* е подготвен за монтиране на няколко различни типа тазови стабилизатори и поддържащи колани, като всеки тип е разработен, за да предостави на потребителя най-добрата опора за стабилизиране в зависимост от условията:

- Тазов стабилизатор
- Колани за горната част на тялото
- Прегръдки за глезена
- Корпуси за обувки.

СТАБИЛИЗАТОР ЗА ТАЗА,

монтиран към плочата на седалката, помага на потребителя да запази позицията си на седалката дори при безпокойство и неволно движение.



Макс. наклон назад, макс. облегане се

КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ СТАБИЛИЗАТОРА НА ТАЗА:

Тазовият стабилизатор е монтиран върху скобите за фиксиране на колана на плочата за седане.

- Плъзнете тазовия стабилизатор до позиция, в която пресича горната част на бедрата и под ъгъл 70 – 90 градуса.
- Регулирайте дължината на тазовия стабилизатор/колан а и точката на закрепване, така че коланът да може да се затегне.



Винаги трябва да се използва стабилизиращ колан за таза, когато се използва колан за горната част на тялото и винаги да се заключва, преди да се заключи коланът.



ГОРНИ КОЛАВИ

са монтирани с Quick-Locks към релсата на колана зад опората за гърба. Бързите брави са лесни за отваряне и регулиране по всяко време.

ПРЕГРЪДНИЦИ ЗА ГЛЕЗЕНИТЕ И ЧАПКИ ЗА ОБУВКИ

се монтират към дъската за крака. Те помагат да се задържат краката върху дъската за крака, без да им позволяват да се плъзгат от плочите за крака или дъската за крака.

7. ТРАНСПОРТ

7.1 ТРАНСПОРТ В АВТОМОБИЛ

Когато е възможно, преместете се на столче за кола с предпазни колани на автомобила, когато пътувате с кола. Закрепете инвалидната количка или я съхранявайте в товарното отделение на колата.

НетиAdaptPro е тествано и одобрено чрез краш тест ISO 7176-19, което посочва, че е подходящо за използване като седалка в превозно средство.

Преди да използвате НетиAdaptPro като седалка в кола, не забравяйте да премахнете и закрепите всички спомагателни части и аксесоари (напр. тави), които могат да паднат от стола в случай на злополука, и ги закрепете безопасно другаде.



Винаги използвайте одобрена инвалидна количка и система за обезопасяване на пътника (ISO 10452) за фиксиране на инвалидната количка в превозното средство.



Столът е маркиран със стикери, показващи къде да фиксирате презрамките. 4 бримки за фиксиране на автомобила са част от рамката.



отпред:

Използвайте приставка за кука или лента.



В задната част:

Закачете кука за кука / кука за карабина в фиксиращите примки на колата на рамката.

Ъгълът на лентите трябва да бъде близо до 45 °.



Повдигнете стола до изправена седалка с максимум 10 градуса наклон и 10 градуса наклон. Завъртете лъка за бутане нагоре и го фиксирайте зад опората за главата.



НетиAdaptPro ширина на седалката 350 – 500 mm е одобрена за потребителско тегло до 135 kg, когато се използва като седалка в превозно средство.



ПРЕМАХНЕТЕ АКСЕСОАРИТЕ

НетиAdaptPro е тестван за катастрофа без каквото и да е устройство за асистент за хранене и т.н. Ако в по-късен момент бъде монтиран комплект за хранене, катерене по стълби и т.н., трябва да проверите дали вашето устройство за асистент за електричество е тествано за катастрофа и одобрено за инвалидни колички, използвани като седалка в кола. Ако не, асистентното устройство трябва да се демонтира и закрепите на друго място, когато инвалидната количка се използва като седалка в кола.



ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Винаги използвайте 3-точкови предпазни колани за пътниците в автомобил.


Уверете се, че предпазният колан на таза на автомобила лежи плътно напречно или пред таза – ъгълът между тазовия колан и хоризонталата е между 30 – 75 градуса, колкото по-стръмен е ъгълът, толкова по-добре. Раменният колан трябва да лежи близо до тялото на потребителя. Вижте илюстрацията.



Коригиращите колани, използвани в инвалидната количка, не са предпазни колани.



Раменният колан не трябва да лежи върху опори за ръце, колела и т.н. Вижте илюстрацията

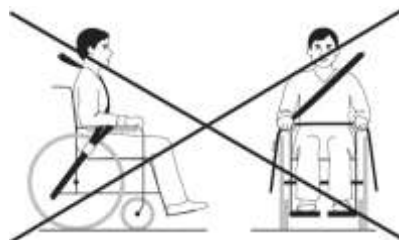

НетиAdaptProe преминал успешен краш тест в ориентация с лице напред с тазови и раменни колани, съгласно изискванията на ISO 7176-19, използвайки комбинирана инвалидна количка и система за обезопасяване на пътници W120/DISR от Unwin Safety Systems.

За допълнителна информация:

BraunAbility Europe.

<https://www.braunability.eu/wtors>

Оценката за настаняването на инвалидната количка на закрепените предпазни колани на превозното средство е оценена **A = добро**.



Винаги използвайте тазови и раменни ограничители, за да намалите възможността от сблъсък на главата и гърдите с компонентите на превозното средство.



Никога не използвайте инвалидната количка като седалка в кола, ако тя е участвала в инцидент с удар, преди столът да бъде инспектиран и одобрен за това от представител на производителя.

Внимавайте коланът да не е усукан и освобождаващата катарама да не влезе в контакт със стола в случай на катастрофа.



Ако потребителят е 1,85 м или по-дълъг, комплектът за удължаване на гърба трябва да се монтира, когато Netti AdaptPro използва се като седалка в кола.



Ако опората за глава Netti е монтирана правилно, тя е много стабилна, но не замества необходимостта от външна опора за врата, монтирана в колата.



Винаги използвайте Netti Cushions, когато Netti AdaptPro инвалидна количка се използва като седалка в кола.



НетиAdaptPro широчина на седалката 500 mm и повече, надвишават максималната ширина от 700 mm, посочена в PRM-TSI, и оказват влияние върху възможността за транспорт с влак.



Промени или замени не трябва да се правят на точките за закрепване на инвалидна количка или на структурни и рамкови части или компоненти без консултация с производителя на инвалидната количка.

7.2 СГЪВАНЕ ЗА ТРАНСПОРТ

Когато инвалидната количка не е заета, сгънете я, както е описано по-долу. Поставете инвалидната количка в багажника или на задната седалка. Когато се постави на задната седалка, закрепете рамката с предпазни колани.

- 6.9.5) Отстранете опората за глава (гл. 6.9.1)
- 6.9.1) Завъртане с лък за избутване нагоре (гл. 6.9.4)
- нагоре (гл. 6.9.4) Завъртете опорите за ръце
- 6.9.6) Отстранете опорите за крака (гл. 6.9.6)
- Свалете възглавницата на облегалката
- Освободете облегалката и я сгънете напред (гл. 5.5)
- 5.3) Отстранете основното колело (глава 5.3)
- 5.3.3). Свалете предното колело (гл. 5.3.3).

7.3 ТРАНСПОРТ В САМОЛЕТ

Нети*AdaptPro* инвалидна количка може да се транспортира в самолет без никакви ограничения. Нети*AdaptPro* инвалидните колички са оборудвани с 3 газовой бутилки. Те обаче не са класифицирани като опасни стоки. Нети*AdaptPro* е конфигуриран с функции за накланяне и накланяне, които се активират с газовой пружини.

Противно на общата инструкция за опасни товари UN3164, IATA-DGR (специална наредба A114) постановява, че стоките, които съдържат газ и са определени да функционират като амортизатори (включително устройствата за поглъщане на енергия или пневматични пружини), НЕ са предмет на транспортните инструкции, т.е. те са обезщетени от следните изисквания:

- a)** Всеки артикул има обем газ, който не надвишава 1,6 l и налягане на зареждане, не по-голямо от 250 бара, като производението от капацитета, изразен в литри, и налягането на зареждане, изразено в бара, не надвишава 80.
- б)** Всеки артикул има минимално налягане на разрушаване 4 пъти налягането на зареждане при + 20 градуса по Целзий за продукти, които не надвишават 0,5 l капацитет на газовото пространство.
- в)** Всеки артикул е изработен от материал, който не се раздробява.
- г)** Всеки артикул е произведен в съответствие със стандарт за качество, който е одобрен от отговорния национален орган.
- д)** Доказано е и е показано, че артикулет възобновява своето налягане посредством разграждащо се при пожар уплътнение или друго устройство за освобождаване на налягането, така че артикулет да не се раздробява и артикулет да не избухва.

7.4 ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Инвалидната количка трябва да бъде поставена в специално място за инвалидни колички.

Инвалидната количка трябва да е обърната срещу посоката на движение. Гърбът на инвалидната количка трябва да е разположен срещу неподвижен обект, като например ред седалки или преграда. Уверете се, че потребителят може лесно да достигне всякакви парапети или дръжки.

Използвайте колани и колани в стола, за да държите потребителя. Използвайте предпазни колани, ако има такива, за да осигурите потребителя в автомобила.

8. МАНЕВРИРАНЕ

8.1 ОБЩИ ТЕХНИКИ

СЕДНА НА СТОЛА СИ

След като седнете на стола си, уверете се, че сте се разположили удобно и че опорите за краката и ръцете са настроени така, че да отговарят на вашите нужди и че имате добра опора за гърба.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА



Винаги шофирайте внимателно. Уверете се, че позицията ви на сядане не е наклонена и легнала по начин, по който нямате преглед, когато шофирате.



БАЛАНС

Теглото и балансът на стола оказват влияние върху способността за маневриране на инвалидната количка. Теглото, размерът и позицията на седене на потребителя също са влияещи фактори.

Размерът и позицията на колелата ще повлияят на ефективността на шофиране. Колкото по-голяма тежест има върху основните колела, толкова по-лесно е маневрирането. Ако върху предните колелца се постави голяма тежест, столът ще бъде тежък за маневриране.

За увеличаване на стабилността назад може да се монтира скоба за удължаване на рамката.



Избягвайте да носите чанти върху дръжките за бутане, това може да направи стола нестабилен.



Големите налични позиции на накланяне и накланяне на стола оказват влияние върху маневреността на инвалидната количка. Когато се използва голямо наклонено/легнало положение, столът не е предназначен за шофиране на дълги разстояния. Като завърти дъгата за бутане нагоре, придружителят може да управлява инвалидната количка с голяма наклонена/легнала позиция за по-къси разстояния, като прехвърляне от стая в стая.



КОРАВИНА

Големите налични движения на накланяне и накланяне оказват влияние върху твърдостта на инвалидна количка. Може да се поръча и монтира допълнителна напречна греда между дясната и лявата рамка на стола за повишена странична стабилност. Изборът на основните колела също влияе върху твърдостта. 16" колела са по-твърди от 24" колела.



ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

Анти-самосвалите, следващи позицията на задните колела, могат да влязат в конфликт със стъпала и препятствия при преминаване. Бъдете много внимателни, когато трябва да преминете дори малки височини.



СТЪПЪЛЕН ПОДХОД

Винаги се приближавайте към стъпало на забавен каданс, като не позволявате на предните колелца да ударят стъпалото със сила. Потребителят може да падне от стола от удара. Предните колела можеха да се спрат.



ШОФИРАНЕ НАПРЕД ПО СЪТЪПАЛКИ / ТРОТОАРИ

Внимавайте да не слизате по стъпала, по-високи от 30 mm. Опорите за краката може да ударят земята първи. По този начин може да загубите контрол и опорите за крака може да се спрат.



ПАРКИНГ

Увеличете долната опора на инвалидната количка, като преместите стола с около 100 mm назад, карайки предните колела да се обърнат напред.



ШОФИРАНЕ ПО МЕКА, ГРАВА ИЛИ ХЛЪЗГАВА ПЪТНА

може да затрудни безопасното маневриране, тъй като колелата могат да загубят сцепление и е трудно да се контролира инвалидната количка.



ОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ БЕЗ НАДЗОР: Ако потребителят е оставен сам в инвалидната количка, винаги блокирайте спирачките и се уверете, че анти-накрайниците са обърнати надолу.



АВАРИЙНИ МАРШРУТИ ЗА БЯГСТВО: Нети *AdaptProc* широчина на седалката 500 mm и повече, има обща ширина над 700 mm и може да има затруднения при преминаването на аварийни евакуационни пътища.

Моля, имайте предвид, че по-широките инвалидни колички имат по-голям радиус на завиване и намалена маневреност в превозните средства. По-малките инвалидни колички обикновено осигуряват по-лесен достъп до превозното средство и маневреност до позиция, обърната напред.

8.2 ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ

– СЪПКА НАГОРЕ –



Анти-самосвалите, следващи позицията на задните колела, могат да влязат в конфликт със стъпала и препятствия при преминаване. Бъдете много внимателни, когато трябва да преминете дори малки височини.

Спътници, карайте крачка напред:

- Сгънете лъка за бутане надолу.
- Наклонете инвалидната количка назад върху задвижващите колела, като стъпите върху подложката против преобръщане, преди да натиснете дръжките за бутане.
- Натиснете напред, докато предните колела застанат на стъпалото и продължете да бутате, докато повдигате, като държите дръжките за бутане.



Потребители, карайте крачка назад:

Тази техника е полезна само ако стъпалото е много ниско. Зависи и от разстоянието между плочите на краката и земята.

- Закарайте стола назад към стъпалото.
- Хванете здраво джантите за бутане и движете тялото напред, докато дърпате.

Спътници, карайте крачка назад:

- Сгънете лъка за бутане надолу.
- Дръпнете стола назад до стъпалото.
- Наклонете инвалидната количка назад, като преместите предните колелца леко нагоре във въздуха.
- Издърпайте инвалидната количка нагоре за дръжките за бутане върху стъпалото и се върнете назад достатъчно дълго, за да оставите предните колелца на стъпалото.

8.3 ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ

– СЪТЪКА НАДОЛУ –



Анти-самосвалите, следващи позицията на задните колела, могат да влязат в конфликт със стъпала и препятствия при преминаване. Бъдете много внимателни, когато трябва да преминете дори малки височини.

Спътници, карайте надолу крачка напред:

- Сгънете лъка за бутане надолу.
- Наклонете инвалидната количка назад, като преместите предните колелца леко нагоре във въздуха.
- Карайте внимателно надолу по стълбите и наклоните инвалидната количка напред, като поставите предните колелца обратно на земята.

Спътници, сплезте стъпка назад:

- Преместете инвалидната количка назад до стъпалото.
- Карайте внимателно надолу по стъпалото и преместете инвалидната количка назад на основното колело, докато предните колелца се отделят от стъпалото.
- Поставете предните колела на земята.

8.4 ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ

– НАКЛОН –

Важен съвет за шофиране надолу и нагоре по хълм, като избягвате риска от обръщане.



Избягвайте да обръщате инвалидната количка по средата на наклон.



Винаги шофирайте възможно най-право.



По-добре е да поискате помощ, отколкото да рискувате.

Каране нагоре:

Преместете горната част на тялото напред, за да запазите баланса на стола.

Каране надолу:

Преместете горната част на тялото назад, за да поддържате баланс на стола.

Контролирайте скоростта на стола, като хванете джантите за натискане. Не използвайте спирачките.



8.5 ТЕХНИКИ НА ШОФИРАНЕ – НАГОРЕ И НАДОЛУ СЪЛБИ –



Поради натоварването с тегло – с инвалидна количка и потребител, не препоръчваме шофиране на Netti AdaptPro инвалидна количка нагоре или надолу по стълбите.

Натоварването на асистентите ще бъде повече от регулирането на ръчното боравене и ергономичната оценка на максималното натоварване.

Рискът от загуба на контрол по време на преминаване по стълбите може да доведе до опасност както за ползвателя на инвалидна количка, така и за асистентите.



Използвайте рампи и асансьори, когато премествате потребителя на по-висок или по-нисък етаж.



Никога не използвайте ескалатори, дори ако сте подпомогани от придружител.



Не повдигайте инвалидната количка, като я държите за опорите за бутане, крака, ръце или глава.

8.6 ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Техниките за преместване на/от инвалидната количка трябва да се практикуват добре с участващите лица. Тук даваме някои важни съвети за подготовката на стола:



С или без придружител – настрани. Преди прехвърляне:

- Инвалидната количка трябва да бъде поставена възможно най-близо до дестинацията на трансфера.
- Издърпайте инвалидната количка назад с 50 – 100 mm, за да накарате предните колела да се завъртят напред.
- Блокирайте спирачките.
- Премахнете опората за крака и завъртете нагоре опората за ръцете отстрани на трансфера.

С или без придружител - напред. Преди прехвърляне:

- Инвалидната количка трябва да бъде поставена възможно най-близо до дестинацията на трансфера.
- Издърпайте инвалидната количка назад с 50 – 100 mm, за да накарате предните колела да се завъртят напред.
- Блокирайте спирачките.
- Наклонете стола напред.

Използване на асансьор/подемник

Преди преместване на стол:

- Наклонете стола леко назад.
- Отстранете опората за главата.
- Отстранете опорите за краката.
- Отворете леко ъгъла на облегалката.
- Сменете компонентите, когато прехвърлянето приключи.



Никога не стойте на плочите за крака поради риск от преобръщане на стола напред.

8.7 ТОЧКА НА БАЛАНС

Регулирайте точката на баланс, като регулирате правилната дълбочина на седалката за потребителя. Това ще премести неговия/нейния център на тежест и ще балансира инвалидната количка.

Освен това може да се обмисли промяна на позицията на основното колело в конзолата на основното колело.

- Преместете главината на основното колело и основното колело. (Глава 5.3.1)
- Регулирайте барабанните спирачки. (Глава 5.3.6)
- Проверете дали основното колело и бързото освобождаване са заключени правилно. (Глава 5.3)



2 бр. гаечен ключ 24 мм.



Шестограмен ключ 5 мм.

НетиAdaptProосновната скоба на колелото позволява промяна на позицията на колелото и по този начин промяна на височината на седалката. Ако е необходимо, може да се монтира скоба за удължаване на рамката, за да премести основното колело с 60 mm назад.

За потребители със силни неволеви движения е възможно да се монтират противотежести на предната част на рамката на колелото.




Точката на баланс може да се промени и чрез регулиране на ъгъла на седалката и/или ъгъла на облегалката.

8.8 ПОВДИГАНЕ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

Разгънатата инвалидна количка без потребител трябва да се повдига само от 2-ма души, държащи се за рамката и бутачката щанга.

Маркирано е със символ на мястото, където трябва да се повдигне.

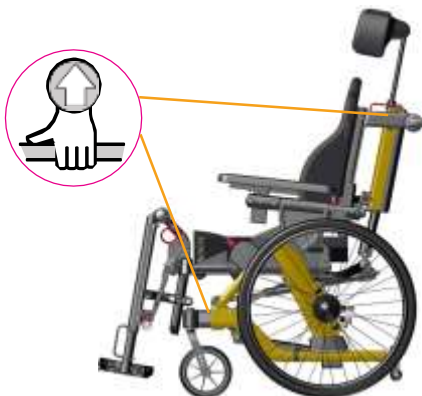


Никога не повдигайте инвалидната количка, докато се държите за опори за крака, ръце или глава. Те могат да се отделият и инвалидната количка може да падне и да се повреди.

8.9 ПУШ РИМ

Инвалидните колички Netti се доставят стандартно с алуминиеви джанти. Материалът и разстоянието до основното колело влияят върху способността на потребителя да се захваща. Свържете се с вашия дилър, за да получите информация относно джантите за натискане, които пасват на вашия стол.



Алтернативните бутаци джанти могат да дадат по-добро сцепление, но триенето може да се увеличи. Когато използвате ръцете за спиране на стола, рискът от изгаряне на ръцете се увеличава.

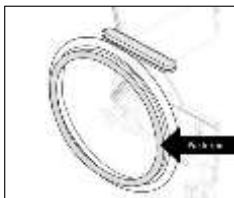

Опасност от притискане и прихващане на пръстите може да възникне при преминаване през тесни проходи и ако пръстите попаднат между спиците. За да избегнете този риск, препоръчваме протектори за спици като аксесоар.



Ако искате/трябва да смените натискащите джанти или да увеличите/намалите разстоянието между натискащите джанти и колелото, моля, свържете се с вашия дилър.



Никога не повдигайте инвалидната количка с потребител в нея.

9. ПОДДРЪЖКА

9.1 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА



Вие като потребител на инвалидната количка (и вашите придружители и семейство) сте отговорни за ежедневната поддръжка на стола. Почиствайте го редовно. Извършете поддръжката, за да осигурите безопасни и надеждни функции за дълго време и хигиеничен външен вид.

Честота	Ежедневно	Месечно
Проверете дефекти/повреди, напр. счупване/липсващи части	X	
Пране на инвалидна количка		X
Пране на възглавници		X
Проверете функцията против преобръщане		X
Проверете регулирането на спирачката		X
Проверете нивото на гумата		X
Смазване на лагери с велосипедно масло		X
Смажете вертикалните опорни профили за крака с бял вазелин	X	

9.2 ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВАНЕ

1. Отстранете възглавниците преди измиване на инвалидната количка.
2. Почистете рамката с вода и парцал.
3. Препоръчваме да използвате мек сапун.
4. Изплакнете добре инвалидната количка с чиста вода, за да отстраните целия сапун.
5. Използвайте метилов спирт, за да премахнете останалата мръсотия.
6. Почистете възглавниците и калъфките според инструкциите, отпечатани върху възглавниците.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗГЛАВНИЦИ NETTI

ЯДРО	
Измиване	Ръчно пране 40°C
Дезинфекция	Виркон С
	Автоклав 105°C
Сушене	Стиснете
	Изсушете на въздух в изправено положение
ВЪНШНА КОРИЦА	
Измиване	Машинно пране 60°C
Сушене	Сушене в сушилня макс. 85°C

9.3 ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ

Ако инвалидната количка трябва да се съхранява за по-дълго време (над 4 месеца), не са необходими специални действия. Препоръчваме столът да се почисти преди съхранение. Преди да го използвате отново, изпълнете горните инструкции за поддръжка.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

Отстранете възглавниците.

Вижте отделните инструкции за измиване по-горе:

Дезинфекция на кърпи: използвайте мек парцал, намокрен с водороден перексид или технически алкохол (изопропанол) и избършете целия стол. Препоръчва се водороден перексид:

NU-CIDEX „Джонсън и Джонсън“.



Проверявайте/регулируйте отново винтовете и гайките на редовни интервали.



Пясъкът и морската вода (солта, използвана за пясъчинки през зимата) могат да повредят лагерите на предните колела и основните колела. Почистете инвалидната количка старателно след употреба.

*

Като основно правило използвайте масло върху подвижните части и всички лагери. Alu Rehab препоръчва използването на обикновено масло за велосипеди.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Столовете Netti са изградени от модули. Alu Rehab разполага със склад от всички части и е готов да ги достави в кратки срокове. Необходимите инструкции за монтаж ще последват частите.

Частите, с които потребителят трябва да работи, са дефинирани в каталози с резервни части, които могат да бъдат изтеглени от www.My-Netti.com.

Тези части могат, ако е необходимо, да бъдат премахнати и изпратени на производителя/дистрибутора при поискване.



Частите, свързани с конструкцията на рамката на инвалидната количка, трябва да се обработват от производител или оторизиран сервиз.



Ако възникнат дефекти или повреди, моля, свържете се с вашия дилър.



Оригинална боя за ремонт на надраскано, може да се поръча от Алу Рехаб.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Симптом	Причина/Действие	справка в ръководството
Инвалидната количка е върви накриво	• Ъгълът на корпуса на лагера може да не е 90°. • Проверете дали предните колела са монтирани на еднаква височина. • Главините на главните колела може да са неправилно монтирани. • Една от спирачките може да е твърде стегната. • Потребителят седи много накриво в стола • Потребителят може да е по-силен от едната страна от другата.	5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5
Инвалидната количка е тежък за маневра	• Главините на главните колела може да са неправилно монтирани. • Почистете предните колела и вилиците за мръсотия. • Прекалено голямо тегло над предните колелца (Регулирайте точката на баланс, като преместите основните колела назад).	5.3.2 5.3.3
Инвалидната количка е трудно се обръща	• Контролирайте предните колелца да не са фиксирани твърде здраво. • Регулирайте ъгъла на носещата кутия. • Твърде голямото тегло над предните колела регулира точката на баланс.	5.3.3 5.3.4
Предните колелца се клатят	• Предните колелца не са фиксирани правилно. • Проверете дали предните вилки са монтирани на еднаква височина. • Ъгълът на корпуса на лагера може да не е 90°. • Твърде голямото тегло над предните колела регулира точката на баланс.	5.3.2 5.3.3 5.3.4
Основните колела са трудни за съблечете и облечете	• Почистете и смажете бързото освобождаване. • Регулирайте дължината на втулката на главината.	5.3.6
Спирачките са не функционира добре	• Регулирайте барабанната спирачка.	5.3.7
Инвалидната количка чувства се „клатещо се“	• Проверете винтовете и точките за настройка като цяло.	



Моля, свържете се с вашия дилър за информация относно оторизираните сервизни съоръжения, които могат да предоставят поддръжка, ако не бъде намерено решение в този формуляр.



Когато имате нужда от резервни части, моля, свържете се с вашия дилър.



Когато правите промени, засягащи конструкцията на рамката, свържете се с търговеца/производителя за потвърждение.

11. ТЕСТОВЕ И ГАРАНЦИЯ

1. ТЕСТОВЕ

НетиAdaptProe тестван и одобрен за употреба както на закрито, така и на открито. Столът има CE маркировка.

МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

135 кг за НетиAdaptPro с ширина на седалката 350 – 500 мм

Тестван е от акредитирана немска тестова лаборатория съгласно EN 12183

НетиAdaptproe тестван за краш в ТАСС Холандия съгласно ISO 7176-19.

Одобрен е за използване като седалка в превозно средство.



Максимално тегло на потребителя, когато се използва като стол в кола:

135 кг

Системата за сядане Netti е тествана за устойчивост на огън съгласно: EN 1021-2:2014.

11.2 ГАРАНЦИЯ

Alu Rehab ви предоставя 5-годишна гаранция за всички компоненти на рамката и за монтажа на напречната тръба. Има 2-годишна гаранция за всички останали компоненти с етикет Netti, с изключение на батериите. За батериите се предоставя 6 месеца гаранция.



Alu Rehab не носи отговорност за щети, произтичащи от неподходящ или непрофесионален монтаж и/или ремонти, пренебрегване, износване, от промени в комплектите на инвалидни колички или инструкции, които не са одобрени от Alu Rehab, или от използването на резервни части, доставени или произведени от трети страни. В такива случаи тази гаранция ще се счита за невалидна.



Тази гаранция е валидна само когато потребителят използва, поддържа и борава с инвалидните колички, както е описано в това ръководство за потребителя.

11.3 ИСК

Ако даден продукт е развил дефект по време на гаранционния период в резултат на дефект в дизайна или производството, можете да предявите гаранционен иск.

- Претенциите се изпращат веднага след откриване на дефекта и не по-късно от 2 седмици след откриването на дефекта.
- Претенциите се предявяват към търговския агент на инвалидната количка. Моля, обърнете внимание, че документацията за продажба трябва да бъде попълнена и подписана правилно със сериен номер и евентуален NeC номер, за да се документира времето и мястото на закупуване на инвалидната количка.
- Търговският агент и Alu Rehab трябва да решат дали даден дефект се покрива от тази гаранция. Ищецът ще бъде уведомен за решението възможно най-скоро.
- Ако рекламацията бъде приета, търговският агент и представителят на Alu Rehab трябва да решат дали продуктът ще бъде ремонтиран, заменен или дали клиентът има право на намалена цена.
- Ако претенцията по гаранцията бъде преценена като невалидна - след внимателна проверка на дефекта (дефект поради неправилна употреба и/или липса на необходима поддръжка) вие сте свободни да решите дали искате продуктът да бъде ремонтиран (ако е възможно) за ваша сметка или искате да закупите нов продукт.



Нормалното износване, неправилната употреба или неправилното боравене не е причина за рекламации.

11.4 NETTI ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ / ИНДИВИДУАЛНИ АДАПТАЦИИ

Персонализираните / индивидуалните адаптации на Netti се определят като всички настройки, които не са включени в това ръководство. Индивидуалните адаптации, направени от Alu Rehab, са етикетирани с уникален NeC номер за идентификация.

Инвалидни колички, които са специално регулирани / адаптирани от клиента, не могат да запазят маркировката CE, дадена от Alu Rehab AS Norway. Ако настройките са извършени от различни от одобрените от Alu Rehabs дилъри, гаранцията, предоставена от Alu Rehab AS Norway, няма да бъде валидна.

Ако имате някаква несигурност относно специалния монтаж и адаптации, моля, свържете се с Alu Rehab AS



Ако имате различни нужди от тези, които нашата стандартна програма за инвалидни колички може да покрие, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти за евентуални специални корекции или персонализирани решения на Netti.

11.5 КОМБИНАЦИИ С ДРУГИ ПРОДУКТИ

Комбинации от Netti и други продукти, които не са произведени от Alu Rehab AS:

Обикновено в тези случаи маркировката CE на всички включени продукти няма да бъде валидна.

Alu Rehab AS обаче е сключила споразумения за комбиниране с някои производители относно някои комбинации. При тези комбинации CE маркировката и гаранциите са валидни.



За допълнителна информация, моля, свържете се с вашия дилър или директно с Alu Rehab AS Norway.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА

Нети*AdaptProc* различни конфигурации на оборудване Netti е тествано/оценен на риска от Alu Rehab.

Не трябва да се правят никакви промени или замени на точките за закрепване на инвалидна количка или на структурни и рамкови части без консултация с производителя на инвалидна количка Alu Rehab.

Замени или промени на компоненти от трети доставчици на Netti*AdaptPro* изисква оценка на риска и приемане на отговорността за продукта и безопасността за използване на инвалидната количка от производителя, който извършва замяната или промяната.

11.6 СЕРВИЗ И РЕМОНТ

Информация за сервизно обслужване и ремонтни услуги във вашия район, моля, свържете се с вашия местен дилър.



Уникален идентификационен номер / сериен номер може да се намери на напречната греда на рамката на колелото от лявата страна на стола.



Каталог с резервни части за инвалидната количка може да бъде получен от вашия местен дилър или да бъде изтеглен от

www.My-Netti.com



Ръководство за обновяване на инвалидната количка може да бъде получено от вашия местен дилър или изтеглено от

www.My-Netti.com



Информация относно бележките за безопасност на продуктите и изтеглянето на продукти е достъпна на

www.My-Netti.com



Ръководство за рециклиране на инвалидната количка може да бъде получено от вашия местен дилър или изтеглено от

www.My-Netti.com

12. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

размер *	Дълбочина на седалката Стандартен **	Височина на гърба *** (удължител)	Обща ширина	Тегло
350 мм	355 – 455 мм	515 (625) мм	633 мм	48,0 кг
380 мм	355 – 455 мм	515 (625) мм	663 мм	48,6 кг
400 мм	355 – 455 мм	515 (625) мм	683 мм	49,0 кг
430 мм	405 – 505 мм	515 (625) мм	713 мм	49,8 кг
450 мм	405 – 505 мм	515 (625) мм	733 мм	51,0 кг
500 мм	405 – 505 мм	515 (625) мм	730 мм	53,0 кг

* Размер между ръбовете на рамковите тръби.

Разстоянието между платнените протектори: отстранете 15 мм.

* * Размер от предния ръб на седалката до задната панта – без възглавница. Чрез правилно поставена облегална възглавница UNO са. 30 мм трябва да се извадят от този размер. Размер от

* ** седалката до горната част на гърба.



Теглото включва основни колела, предни колела, опори за крака и опори за ръце. Възглавниците не са включени.



Препоръчително налягане в гумите за гуми с пневматично задвижване: 40 – 45 PSI.



Макс. потребителско тегло за NettiAdaptProc ширина на седалката до 500 мм: 135 кг. Когато се използва като седалка в кола: Макс. тегло на потребителя 135 кг.



Когато са монтирани аксесоари и допълнително оборудване, теглото им трябва да се извади от макс. тегло на потребителя.



Багажът, натоварен на инвалидната количка, не трябва да надвишава 10 кг. Багажът не трябва да се поставя по начин, който намалява стабилността на стола.

Дилър:	
Номер на рамката:	
дата:	
печат:	

Производитель на Netti:



Alu Rehab AS
Бедрифтсвеген 23
N-4353 Klepp Stasjon
Норвегия

Alu Rehab ApS
Кльофтехой 8
DK-8680 Ry
Дания



post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com

info@meyragroup.com
T: +45 87 88 73 00
my-netti.com

pexa
Г Р У П

РЕХА груп ООД
8000 гр. Бургас,
тел.: 056 71 50 71,
моб.: 0895 520 540
www.reha.bg